

MED-RIGID

Bocal d'Aspiration Rigide à Usage Unique



**Un système
d'aspiration
pratique et
précis.**



MED-RIGID Le bocal d'aspiration rigide à usage unique

Une structure alliant solidité, durabilité et simplicité lors de son utilisation

MED-RIGID est un système d'aspiration totalement à usage unique, composé d'un bocal et d'un couvercle pour la collecte des fluides corporels, liquides et déchets d'aspiration. Positionné sur son support réutilisable, le bocal est quant à lui éliminé après utilisation. Le système MED-RIGID se compose d'un bocal gradué et transparent ainsi que d'un couvercle rigide jetable sécurisé. L'ensemble est à patient et usage unique. Ce dispositif médical favorise l'élimination des déchets à risques infectieux en participant à assurer la sécurité des patients ainsi que du personnel médical et chirurgical.

Des supports spéciaux ainsi que des pieds mobiles sont disponibles pour répondre aux différentes configurations que rencontrent les services utilisateurs.

Le site patient est équipé d'un connecteur coudé à 90° amovible. Son usage facilite la connexion afin d'éviter la plicature de la tubulure patient

Couvercle hermétique avec système de fermeture sécurisé. Le couvercle verrouillé au bocal empêche la désolidarisation pendant son utilisation et évacuation

Concept PPV (Porous Plastic Valve)
Filtre Bactérien Efficace (BFE)
> 99,99% pour éviter la contamination de la source de vide

Fond du bocal plat pour une bonne stabilité. Traçabilité (N° lot, Date...)




Transparent.
Résiste aux chocs et entièrement jetable

Graduations précises
Zone de marquage

Anneaux de support réutilisables MED-RIGID

Les anneaux de support réutilisables MED-RIGID en polycarbonate, sont équipés d'un robinet ON/OFF pour la gestion du vide. Ils sont utilisés pour supporter l'ensemble bocal-couvercle MED-RIGID sur différents types de supports, tels que les rails muraux ou les pieds mobiles. L'anneau est équipé d'un tube de vide rouge renforcé permettant d'acheminer le vide au bocal MED RIGID via le site de connexion VACUUM du couvercle.

| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| OR159 | Anneau de support pour bocal 1.2L | 20/carton |
| OR139 | Anneau de support pour bocal 2 ou 3L | 20/carton |

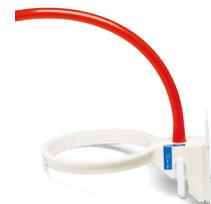

Les bocaux d'aspiration MED-RIGID

Les bocaux MED-RIGID sont à usage unique. Disponible sous différentes contenances ainsi qu'une version 12L, chacun se compose d'un contenant avec un couvercle rigide. Le tout à usage unique.

| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|---|-----------|
| OR212 | Bocal d'aspiration MED-RIGID 1.2L | 40/carton |
| OR220 | Bocal d'aspiration MED-RIGID 2L | 40/carton |
| OR230 | Bocal d'aspiration MED-RIGID 3L | 40/carton |
| ORLVC | Bocal d'aspiration MED-RIGID 12L Pour le bocal de 12L, merci d'utiliser le pied mobile associé OR12LTR | 4/carton |



Les bocaux d'aspiration MED-RIGID avec tubulure d'aspiration

Les bocaux MED-RIGID avec tubulures sont disponibles en kits incluant une tubulure ORNEX non stérile. ORNEX est une tubulure souple, avec une surface externe striée qui lui permet d'augmenter sa solidité.

| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|--|-----------|
| OR312 | Bocal d'aspiration MED-RIGID 1.2L + Tubulure 1.80 m, diamètre 5 mm | 30/carton |
| OR319 | Bocal d'aspiration MED-RIGID 1.2L + Tubulure 3 m, diamètre 6 mm | 30/carton |
| OR320 | Bocal d'aspiration MED-RIGID 2L + Tubulure 1.80 m, diamètre 5 mm | 30/carton |



Tubulure tandem MED-RIGID

Utilisée pour les montages de plusieurs bocaux (Tandem ou série). La tubulure tandem permet le passage automatique des fluides d'un bocal à un autre.

| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|---|-----------|
| OR542 | Tubulure tandem pour bocal d'aspiration MED-RIGID | 50/carton |



Accessoires et équipements réutilisables

Accessoires de prélèvement à usage unique

Les chaussettes et paniers de prélèvement à usage unique sont utilisés pour collecter et conserver des échantillons de matières pour analyse. Ils se fixent sur le couvercle de tous les bocaux MEDLINE et sont reliés à une tubulure d'aspiration de 7 mm ou 10 mm.



| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|---|------------|
| OR123 | Format court 9 cm, connecteur mâle diam. 7 mm | 100/carton |
| OR125 | Format standard 23 cm, connecteur mâle diam. 7 mm | 100/carton |
| OR124 | Format large 23 cm, connecteur mâle diam. 10 mm | 100/carton |
| OR84 | Panier de prélèvement, diam. 10 cm | 20/carton |

Pince de rail et fixation murale

| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|--|-----------|
| DYNDSCCLW | Plaque murale | 20/carton |
| ORCLAMP | Pince à rail en plastique | 20/carton |
| FKD0036 | Adaptateur pour système d'aspiration Medline compatible au support VacSax | 10/carton |
| ORCONVS | Adaptateur pour système d'aspiration Medline compatible au pince à rail Serres | 20/carton |



Pieds mobiles

Les pieds mobiles permettent de s'adapter aux différentes configurations en fonction des besoins.

| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|--|-----------|
| DYNDSCC | Pied mobile métallique hauteur réglable de 61 - 106 cm, adapté pour 4 bocaux | 1/carton |
| ORBASE | Pied mobile hauteur fixe 50 cm, adapté pour 2 bocaux | 1/carton |
| ORSTAND | Pied avec une base adhésive | 10/carton |
| ORSTANDR | Support de bocal avec roulette | 2/carton |



Manifold pour connexion au vide

Nos tubulures d'acheminement du vide réutilisables, permettant de répondre à des configurations personnalisées. Plusieurs bocaux sont ainsi reliés à la source de vide (montage à l'aide d'une tubulure).

| Référence | Description | Cdt. |
|-----------|----------------------------|-----------|
| DYND2MNF | Manifold, montage 2 bocaux | 10/carton |
| DYND3MNF | Manifold, montage 3 bocaux | 10/carton |
| DYND4MNF | Manifold, montage 4 bocaux | 10/carton |



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 130 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sarl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

ORCLAMPS, ORCONVS, et ORSTAND sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

Support des bocaux Med-RIGID, Bocaux MED-RIGID, bocaux MED-RIGID avec tubulure d'aspiration, tubulure Tandem pour MED-RIGID. Panier de recueil d'échantillons, DZNSCLW, DYNDSCC, ORBASE, DYNDXMNF, sont des dispositifs médicaux de class I non stérile destiné à être utilisés par les professionnels de santé.

Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML546_FR 03/2024.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

