

Drap housse de protection Sahara

Améliorer l'efficacité. Promouvoir la sécurité. Réduire les coûts.



Le nouveau drap housse de protection est conçu pour aider les services d'urgence à couvrir les brancards. La conception ajustée garantit une mise en place rapide et facile. Le revêtement extérieur est antidérapant afin d'optimiser la sécurité du patient.

Avantages


- Partie extérieure matelassée sans aspérité pour plus de confort
- Sa conception à base de polymère draine rapidement les fluides et aide à maintenir l'intégrité de la peau
- Revêtement antidérapant
- Reste en place grâce à la bande élastique sur sa périphérie
- Dispositif à usage unique, ce qui diminue les risques de contaminations croisées
- Minimise le risque de réactions allergiques car il ne contient pas de latex

Couche externe

- Doux, non tissé. Offre plus de confort au patient

Couche intermédiaire

- Technologie à base de polymère absorbant, draine et bloque rapidement l'humidité
- Le design contribue à évacuer rapidement l'humidité de la surface

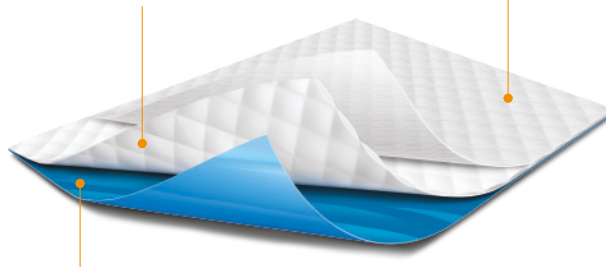

Couche inférieure

- Le revêtement imperméable en polyéthylène (PE) offre une protection du brancard ainsi que celle du matelas

Information pour passer une commande

Référence	Description	Quantité
DYNDE4090FTD	Drapp housse de protection Sahara 228 x 101 cm	20 unités par carton

Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial ou visiter notre site internet sur : fr.medline.eu

Drapp housse de protection Sahara est un Dispositif Médical de classe I non stérile destiné à l'usage des professionnels de santé. Avant utilisation, consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML1070_FR 11/2020.

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

