

Cobertura Absorvente Ajustada Sahara

Melhore a eficácia. Promova a segurança. Reduza os custos.



A nova Cobertura Absorvente Ajustada Sahara foi idealizada para ajudar os departamentos de emergência a cobrir as mesas das urgências e das ambulâncias. O design ajustado garante uma aplicação fácil e rápida, ao passo que a face posterior antiderrapante mantém a cobertura no sítio mesmo durante o transporte do paciente.

Principais vantagens e características


- Garante o conforto do paciente graças à sua camada exterior suave e acolchoada
- Tecnologia de polímero que retira rapidamente a humidade, mantendo a integridade da pele
- Face posterior impermeável e antiderrapante
- Permanece no sítio graças ao elástico a toda a volta
- Reduz ainda o risco de contaminação cruzada, porque é de utilização única
- Minimiza o risco de reações alérgicas porque é livre de látex

Camada exterior

- Macia, não-tecido; ajuda a melhorar o conforto do paciente

Camada intermédia

- Polímero super-absorvente que absorve e retém rapidamente a humidade
- Padrão acolchoado que puxa rapidamente a humidade da superfície

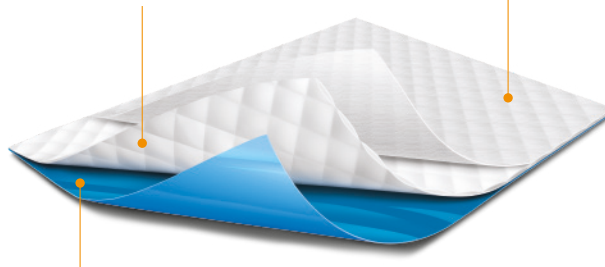

Camada inferior

- Face posterior em polietileno (PE) impermeável que proporciona proteção de barreira e ajuda a evitar que os fluidos comprometam os resguardos da mesa de operações ao longo do tempo

Informações de encomenda

Referência	Descrição	Quantidade
DYNDE4090FTD	Sahara Ajustada 228 x 101 cm	20/caixa

Para mais informações sobre este produto, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website: www.medline.eu/pt

A Cobertura Absorvente Ajustada Sahara é um dispositivo médico classe I Não Estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML1070_PT 07/2021.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

