

# SensiCare® PI Green mit Aloe Vera

Sterile, puderfreie OP-Handschuhe aus Polyisopren



- Einzigartige, synthetische Isolex® Polyisopren-Rezeptur
  - Chemische Struktur entspricht der von natürlichem Latex, jedoch ohne die Proteine
  - Bietet den Mitarbeitern in der Gesundheitsversorgung eine Alternative zu Latex, bei gleicher Leistung in Bequemlichkeit, Passgenauigkeit und Gefühl
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Hervorragende Tastempfindlichkeit
- **Feuchtigkeitsspendende Aloetouch®-Technology**
  - Die weltweit erste Pflege-Technologie für OP-Handschuhe - feuchtigkeitsspendende Eigenschaften für die Haut klinisch nachgewiesen
  - Innenseite mit 100 % reinem, gefriergetrocknetem Aloe Vera-Gel
  - Hilft beim Anlegen und spendet den Händen Feuchtigkeit
- Dunkelgrüne Färbung ermöglicht das schnelle Erkennen von Perforationen im äußeren Handschuh

## Spezifikationen

- Qualität gemäß EN 455: AQL 0,65
- Synthetische Polymerbeschichtung
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Keine Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern
- Stulpdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen
- Dicke an der Fingerspitze: 0,21 mm
- Handschuhlänge (entspricht EN 455-2, Größe 7,5): 295 mm
- Farbe: dunkelgrün
- Griffbarkeit: untexturiert

## Bestellinformationen


Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG9255	5 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9260	6	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9265	6 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9270	7	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9275	7 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9280	8	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9285	8 ½	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
MSG9290	9	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

## Empfohlen für die Anwendungsbereiche

- Ideal für den Einsatz von Doppelhandschuhen bei Eingriffen in der Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und bei Hochrisiko-Eingriffen

## Qualitätsrichtlinien

- Konform gemäß EN ISO 13485
- Medizinprodukt der Klasse IIa; konform gemäß der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 93/42/EWG
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III; konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

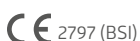

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

0086



**Mehr erfahren.** Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

Dieser Handschuh ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML570\_DE 12/2023