



Distribuert av

**MEDI PLAST**

**DESIGNADE, TESTADE OCH GODKÄNDA  
AV OPERATIONSPERSONALEN.**

**Operationsrockar**  
Prestanda, Variation och Kvalitet

# MEDLINES OPERATIONSROCKAR

## Prestanda, Variation och Kvalitet

### Ett rikt utbud

För att tillfredsställa alla önskemål på operationssalen och kunna erbjuda personalen den operationsrock de föredrar, erbjuder vi fem olika material, där varje alternativ är en egen modell med eller utan olika förstärkningar.


### Pålitligt skydd

Medlines rockmaterial erbjuder ett utmärkt skydd. Alla rockar är latexfria och uppfyller eller överträffar kraven i EN 13795-standard. Materialet i produkterna Essential och Advanced är specifikt behandlade för att vara alkoholavvisande som ger användarna det skydd de behöver och den komfort de förtjänar. Den unika Ultimate-rocken erbjuder ett ogenomsläppligt fullängdsskydd med exceptionell andningsförmåga.

### Hög prestanda med hög komfort

Våra operationsrockar har egenskaper som gör dem bekväma och enkla för operationspersonalen att använda. Material som andas håller bäraren torr och förblir bekvämt, även under långvariga ingrepp. Rockarna har ärmor med limmad söm som ger ökad hållbarhet och komfort.

Ärmsömmarnas genomsnittliga draghållfasthet (N)

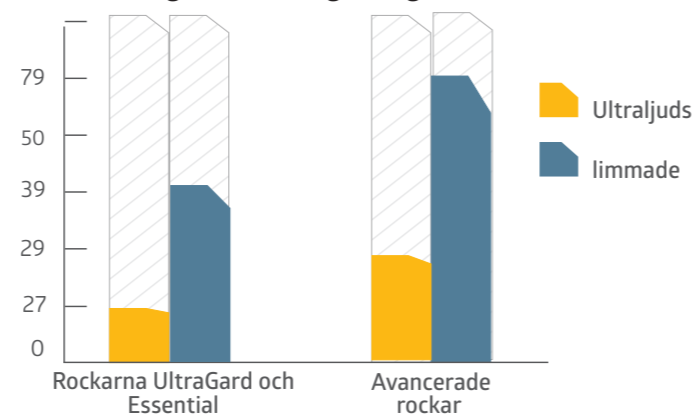


### Lätta att använda

Alla Medlines operationsrockar har en intuitiv färgkodning. För att underlätta valet av rock i operationssalen är produktetiketterna och överföringsbrickorna lilafärgade för Standard Performance och blå för High Performance. Rockarnas halsringning finns i tre olika färger, för att det ska gå snabbt att urskilja rockmodellen: standard, materialförstärkt eller plastförstärkt.

Lila halsringning:  
Standardrockar

Vit halsringning:  
Förstärkta rockar

Blå halsringning:  
Plastförstärkta rockar

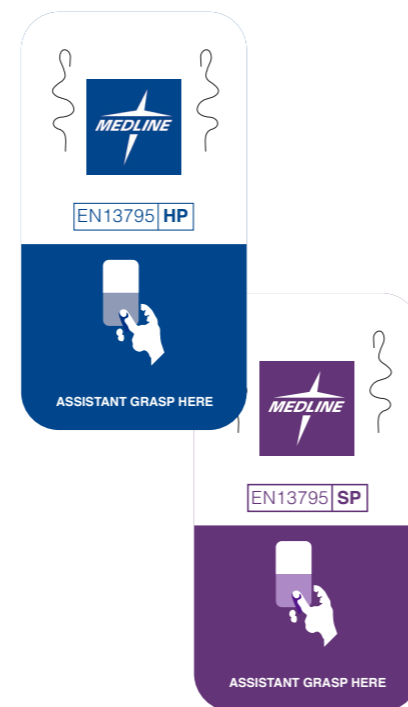

EN 13795 är den europeiska harmoniserade standard som anger kraven för drapering för engångsbruk och flergångsbruk (dvs. operationsrockar och operationsdukar) som används som medicintekniska produkter för patienter, personal och utrustning och som är avsedd att förhindra överföring av smittämnen mellan patienter och klinisk personal under kirurgiska ingrepp.  
\*\*AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (föreningen för främjande av medicinska instrument). AAMI PB70 är den amerikanska referensstandard som klassificerar skyddskläder och drapering utifrån vätskebarriärprestanda och som specificerar tillhörande krav på märkning och standardiserade testmetoder

# OPS™ UltraGard

## Effektiv, prisvärd rock

- Lätt material, SMMMS (35 gsm), naturligt vätskeavstötande skydd
- Bekväm och med god andningsförmåga
- Rocken finns i standardutförande och med plastförstärkt skydd

Artikel	Artikelbeskrivning	Antal/fp
E3505CEA	Operationsrock, S/M, 115 cm	36
E3506CEA/E3506DCE*	Operationsrock, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Operationsrock, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Operationsrock, XL, 140 cm	32
E3516CEA/E3516DCE*	Operationsrock, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Operationsrock, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Operationsrock, plastförstärkt, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Operationsrock, plastförstärkt, L, 120 cm	32
E3540CEA	Operationsrock, plastförstärkt, XL, 140 cm	28
E3513CE	Operationsrock, plastförstärkt, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Operationsrock, plastförstärkt, 2XLL, 160 cm	20

\* Dessa rockar finns även att tillgå i dispenserboxar.



UltraGard-rockarna finns också i förpackningar utan yttre omslag och handdukar, i standardutförande och i plastförstärkt version. Denna nyhet bidrar till ökad effektivitet tack vare kortare förberedelsestid och ger också lägre kostnad.

Artikel	Artikelbeskrivning	Antal/fp
E3606CE	Operationsrock, L, 120 cm, direct, ST	40
E3645CE	Operationsrock, XL, 130 cm, direct, ST	40
E3616CE	Operationsrock, XLL, 150 cm, direct, ST	36
E3640CE	Operationsrock, plastförstärkt, XL, 140 cm, direct, ST	32
E3613CE	Operationsrock, plastförstärkt, XLL, 150 cm, direct, ST	28
E3681CE	Operationsrock, plastförstärkt, 2XLL, 160 cm, direct, ST	24



# OPS™ Essential

Förstärkt skydd

- Lätt material, SMMMS (35 gsm), med extra behandling för avvisning av alkohollösning
- Bekväm – med exceptionell mjukhet och andningsbarhet
- Rocken finns i standardutförande och i plastförstärkt version

Artikel	Artikelbeskrivning	Antal/fp
S3505CEC	Operationsrock, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Operationsrock, L, 120 cm	36
S3545CEC	Operationsrock, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Operationsrock, XL, 140 cm	32
S3507CEC	Operationsrock, XL, 140 cm, fingerögla	32
S3516CEC	Operationsrock, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Operationsrock, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Operationsrock, materialförstärkt, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Operationsrock, materialförstärkt, L, 120 cm	28
S3509CEC	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Operationsrock, materialförstärkt, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC/S3500P*	Operationsrock, plastförstärkt, S/M, 115 cm	32
S3510CEC/S3510P*	Operationsrock, plastförstärkt, L, 120 cm	32
S3540CEC/S3540P*	Operationsrock, plastförstärkt, XL, 140 cm	28
S3513CEB/S3513P*	Operationsrock, plastförstärkt, XLL, 150 cm	24
S3581CEB/S3581P*	Operationsrock, plastförstärkt, 2XLL, 170 cm	20



\*\* Uppfyller kraven i EN14605 och EN14126 om personlig skyddsutrustning, kategori III.

- Essentialrockarna finns också i förpackningar med ett lager i standardutförande och i materialförstärkt version.
- De plastförstärkta Essential-rockarna överstiger inte bara lägsta prestanda enligt EN 13795 i enlighet med direktivet för medicin-tekniska produkter, utan också normerna för personlig skyddsutrustning, EN 14605 och EN 14126

Artikel	Artikelbeskrivning	Stk./eske
S3606CE	Operationsrock, L, 120 cm, direct	40
S3645CE	Operationsrock, XL, 130 cm, direct	40
S3616CE	Operationsrock, XLL, 150 cm, direct	36
S3685CE	Operationsrock, 2XLL, 170 cm, direct	32
S3609CE	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 130 cm, direct	30
S3612CE	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm, direct	28
S3611CE	Operationsrock, materialförstärkt, 2XLL, 170 cm, direct	24



# OPS™ Advanced

Ingen kompromiss mellan skydd och bekvämlighet

- Andas – för snabbt bort kroppsvärme för att hålla användaren sval och bekväm med högre basvikt SMMMS (41 gsm) och bekväm "mjuk" yta som anpassar sig bättre runt kroppen
- Högt barriärprestanda
- Alternativet med raglanskärning ger rymlighet och ökad rörlighet
- Rocken finns i standardutförande och i plastförstärkt version

Artikel	Artikelbeskrivning	Antal/fp
OP9505CE	Operationsrock, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Operationsrock, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Operationsrock, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Operationsrock, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Operationsrock, XLL, 150 cm, raglanärm	24
OP9575CE	Operationsrock, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Operationsrock, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Operationsrock, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Operationsrock, materialförstärkt, L, 130 cm	24/40*
OP9809CE	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 130 cm, munskydd och fingerögla	28
OP9509CEA/OP9509DCE*	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 140 cm	28/36*
OP9512CE/OP9512DCE*	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm, raglanärm	20
OP9812CE	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm, munskydd och fingerögla	24
OP9583CE/OP9583DCE*	Operationsrock, materialförstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Operationsrock, plastförstärkt, S/M, 120 cm	28
OP9510CE/OP9510DCE*	Operationsrock, plastförstärkt, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE/OP9540DCE*	Operationsrock, plastförstärkt, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE/OP9513DCE*	Operationsrock, plastförstärkt, XLL, 150 cm	20/36*
OP9581CE/OP9581DCE*	Operationsrock, plastförstärkt, 2XLL, 170 cm	20/32*



\* Dessa rockar finns även att tillgå i dispenserboxar.

# OPS™ Ultimate

Den intelligenta rocken med membran som andas

- EN13795\* Hela rocken har hög prestanda och är helt ogenomsläpplig med avseende på blodburna patogener (AAMI\*\* PB70-, ASTM F1671-testad) eftersom rocken är tillverkad av 60 gsm trilaminatmaterial
- Andas och är sval – reagerar på ökad kroppstemperatur genom att öka vattenavdunstningen
- Rekommenderas för alla ingrepp där helskydd och ventilerande egenskaper behövs, som t.ex. långvariga kardiologiska och ortopediska ingrepp liksom vid transplantationer

Artikel	Artikelbeskrivning	Antal/fp
LW89045CEB	Operationsrock, ventilerande, ogenomtränglig, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Operationsrock, ventilerande, ogenomtränglig, XLL, 150 cm, raglanermer	20
LW39079CEB	Operationsrock, ventilerande, ogenomtränglig, 2XLL, 150 cm, raglanermer	20



Vi kan även föreslå operationsrockar av speciella material som är testade med avseende på cytostatika

Artikel	Artikelbeskrivning	Antal/fp
DYNJPE2301P	Ogenomtränglig rock för användning i operationssal, prevention plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Ogenomtränglig rock för användning i operationssal, prevention plus, XL, 142 cm	24

EN 13795 är den europeiska harmoniserade standard som anger kraven för drapering för engångsbruk och flergångsbruk (dvs. operationsrockar och operationsdukar) som används som medicintekniska produkter för patienter, personal och utrustning och som är avsedd att förhindra överföring av smittämnen mellan patienter och klinisk personal under kirurgiska ingrepp.  
\*\*AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (föreningen för främjande av medicinska instrument). AAMI PB70 är den amerikanska referensstandard som klassificerar skyddskläder och drapering utifrån vätskebarriärprestanda, och specificerar tillhörande krav på märkning och standardiserade testmetoder.

# Eclipse®

En mjuk och bekväm rock

- Enastående komfort och material som andas
- Spunlace (68 gsm), ser ut som textil
- Lämpligt skydd

Artikel	Artikelbeskrivning	Antal/fp
9505CEA	Operationsrock, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Operationsrock, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Operationsrock, L, 120 cm, raglanärm	26
9507CEA/9507DCE*	Operationsrock, XL, 130 cm	24/40*
9707CE	Operationsrock, XL, 130 cm, fingerögla	24
9516CEA/9516DCE*	Operationsrock, XLL, 150 cm	24/36*
9716CE	Operationsrock, XLL, 150 cm, fingerögla	24
9575CEA/9575DCE*	Operationsrock, XXL, 130 cm	24/36*
9585CE/9585DCE*	Operationsrock, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Operationsrock, materialförstärkt, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 130 cm	7
9709CE	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 130 cm, fingerögla	22
9809CE	Operationsrock, materialförstärkt, XL, 130 cm, munskydd och fingerögla	22
9571CEA/9571DCE*	Operationsrock, materialförstärkt, XXL, 130 cm	20/28*
9512CEA/9512DCE	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm	11
9712CE	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm, fingerögla	22
9812CEA	Operationsrock, materialförstärkt, XLL, 150 cm, munskydd och fingerögla	20
9581CEA/9581DCE*	Operationsrock, materialförstärkt, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Operationsrock, plastförstärkt, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Operationsrock, plastförstärkt, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Operationsrock, plastförstärkt, XL, 130 cm	24
9513CEA	Operationsrock, plastförstärkt, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Operationsrock, plastförstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*

\* Denna artikel finns även att tillgå förpackad i dispenserbox.



# Guide till val av operationsrock

Välj rätt rock med rätt prestanda för respektive ingrepp utifrån typ av ingrepp och dess längd, mängden vätska och behov av komfort

Sortiment	Eclipse			UltraGard™		Essential			Advanced			Ultimate	
	Standard/Materialförstärkt/Plastförstärkt	S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
DRG Kirurgiska Ingrepp	Oftalmologi	✓			✓		✓			✓			
	Trakeostomi	✓			✓		✓			✓			
	Öronkirurgi	✓			✓		✓			✓			
	Cochleaimplantat	✓			✓		✓			✓			
	Mun	✓			✓		✓			✓			
	Tonsillektomi	✓			✓		✓			✓			
	Näskirurgi	✓			✓		✓			✓			
	Åderbräck	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Proktologi	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Obstetrik		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Maxillo	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Endo Abdominal	✓			✓		✓			✓			
	Endokrina	✓			✓		✓			✓			
	Pacemakers	✓			✓		✓			✓			
	Generell Ortopedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bröstringrepp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Brännskade och Plastik		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiografi	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Gynekologi	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Allmän bukkirurgi		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Urogenitala		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Höft		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Njure, binjurar och urinblåsa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Artroskopi		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Thorax		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Kardiovaskulär		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Kraniell		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Spinal		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Vill du veta mer om våra produkter, besök gärna [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com) eller prata med din lokala säljrepresentant.

Distribuerat av

**MEDI PLAST**

**Mediplast AB**  
Box 9504  
200 39 Malmö

T 020-78 80 35  
[mediplast.info@mediplast.com](mailto:mediplast.info@mediplast.com)  
[www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

Dessa produkter är medicintekniska produkter klass I, sterila. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter som kan förekomma i denna broschyr.  
©2018 Medline Industries, Inc. Medline ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc.  
ML281-SE Mediplast 09/2018.

EC REP Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, France

CE  
0086