

OP-Mäntel

Leistung, Auswahl und Qualität



**Entwickelt und
designed von
Anwendern für
Anwender.**

Medline OP-Mäntel

Leistung, Auswahl und Qualität

Eine umfassende Auswahl

Um allen Anforderungen im OP gerecht zu werden, bietet Medline fünf verschiedene Basismaterialien für OP-Mäntel an. Jedes Material mit eigenem Design, unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlicher Verstärkung, sodass für jeden Anwender ein geeigneter OP-Mantel gefunden werden kann.

Zuverlässiger Schutz

Die Materialien für die OP-Mäntel von Medline bieten einen hohen Schutz. Jeder Mantel ist latexfrei und erfüllt oder übertrifft die Mindestanforderungen der Norm EN 13795*. Das Essential- und Advanced-Material widersteht einem hohen hydrostatischen Druck und verfügt über eine zusätzliche alkoholabweisende Beschichtung, welche dem Anwender den erforderlichen Schutz und den Komfort bietet, den er benötigt. Der einzigartige Ultimate OP-Mantel ist besonders atmungsaktiv und bietet darüber hinaus einen Rundumschutz gegen Flüssigkeits- und Keimdurchtritt.

Hohe Leistung mit hohem Komfort

Unsere OP-Mäntel bieten Ihnen auch während längerer Tragezeiten einen außergewöhnlichen Schutz. Alle Medline OP-Mäntel sind im Brust- und Ärmelbereich großzügig geschnitten, um die nötige Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Im Bezug auf Größe, Länge und Design lassen unsere OP-Mäntel keine Wünsche offen. Das atmungsaktive Material ist auch bei längeren Eingriffen angenehm zu tragen. Die Ärmel unserer OP-Mäntel sind geklebt und sorgen somit für noch mehr Komfort und Festigkeit.


Einfache Anwendung

Alle Medline OP-Mäntel verfügen über eine intuitive Farbkodierung. Das Produktetikett und die Transferkarte in violetter Farbe zeigen einen OP-Mantel mit Standardleistung und in blauer Farbe einen OP-Mantel mit hoher Leistung an. Dies hilft Ihnen im OP die Mäntel besser zu unterscheiden. Weiterhin bieten wir drei verschiedene Kragenfarben an, um die Art des Mantels leicht und schnell zu erkennen: Standard, materialverstärkt und PE-verstärkt.



Violett:
Standard OP-Mäntel

Weiß:
Materialverstärkte
OP-Mäntel

Blau:
PE-verstärkte
OP-Mäntel

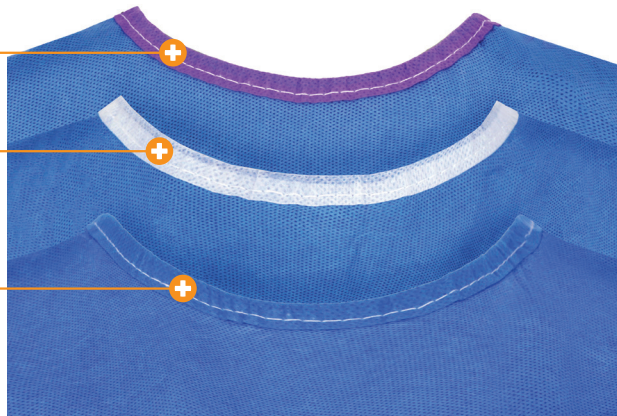

Durchschnittliche Nahtfestigkeit an den Ärmeln (N)

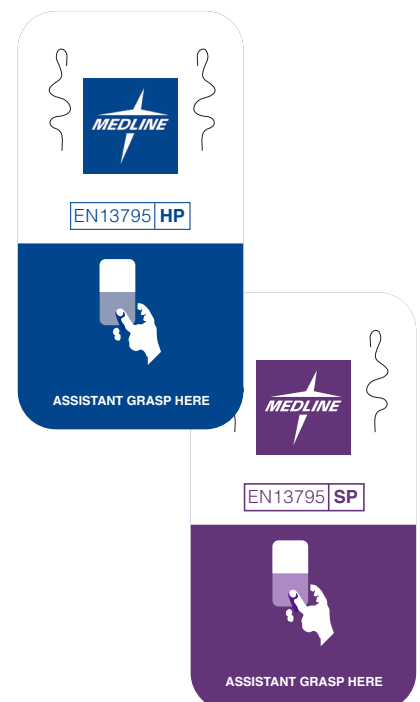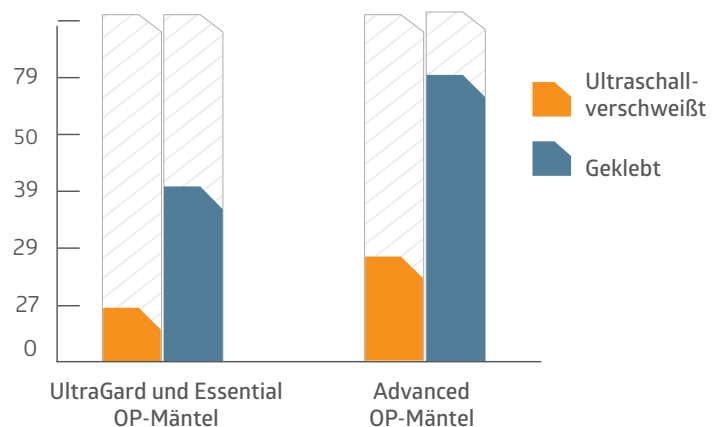

*Die EN 13795 soll einen einheitlichen Qualitätsstandard gewährleisten- sowohl bei Mehrweg als auch bei Einwegabdeckungen, OP-Mänteln und Reiraumkleidung zur Verwendung als Medizinprodukte für Patienten, Klinikpersonal und Geräte. Sie dient außerdem zur Verhinderung der Keimverbreitung während chirurgischer Eingriffe.

OPS™ UltraGard

Effektiver OP-Mantel, guter Preis

- Leichtes SMMMS-Material (35 g/m²) mit natürlichem, flüssigkeitsabweisendem Schutz
- Hoher Komfort und hohe Atmungsaktivität
- Der Mantel ist als Standard und mit PE-Verstärkung erhältlich

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
E3505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
E3506CEA/E3506DCE*	OP-Mantel, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	OP-Mantel, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
E3516CEA/E3516DCE*	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	OP-Mantel, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
E3540CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
E3513CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
E3581CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 160 cm	20

*Diese Kittel sind auch in Spenderboxen erhältlich.



UltraGard OP-Mäntel gibt es auch in einer Verpackung (Peel&Go) ohne Einschlagtuch und Handtücher. Diese Neuerung hilft Ihnen, die Effizienz zu verbessern, indem Sie die Rüstzeiten und den Abfall reduzieren und Ihre Ausgaben für OP-Mäntel reduzieren.

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
E3606CE	OP-Mantel, L, 120 cm, Peel&Go	40
E3645CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, Peel&Go	40
E3616CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, Peel&Go	36
E3640CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, Peel&Go	32
E3613CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, Peel&Go	28
E3681CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 160 cm, Peel&Go	24



OPS™ Essential

Erweiterter Schutz

- Leichtes SMMMS Material (35 g/m²) das durch ein spezielles Verfahren alkoholbeständig ist
- Komfortabel - bietet außergewöhnliche Drapierbarkeit und Atmungsaktivität
- PE-verstärkte OP-Mäntel aus Essential Material überschreiten nicht nur die Mindestanforderung der EN 13795 gemäß der Medizinprodukterichtlinie, sondern erfüllen auch die Normen für persönliche Schutzausrüstung (EN 14605 und EN 14126)

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
S3505CEC	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	OP-Mantel, L, 120 cm	36
S3545CEC	OP-Mantel, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
S3507CEC	OP-Mantel, XL, 140 cm, mit Daumenschlaufe	32
S3516CEC	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	28
S3509CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	28
S3512CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC/S3500P*	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
S3510CEC/S3510P*	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
S3540CEC/S3540P*	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
S3513CEB/S3513P*	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
S3581CEB/S3581P*	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20
S3740CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, Daumenschlaufe	28
S3713CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, Daumenschlaufe	24
S3840CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, Gesichtsmaske und Daumenschlaufe	28
S3813CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, Gesichtsmaske und Daumenschlaufe	24



*Entspricht EN 14605 und EN 14126, Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III.

Essential OP-Mäntel gibt es auch in einer Einschichtverpackung (Peel&Go) ohne Einschlagtuch.

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
S3606CE	OP-Mantel, L, 120 cm, Peel&Go	40
S3645CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, Peel&Go	40
S3616CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, Peel&Go	36
S3685CE	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm, Peel&Go	32
S3609CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, Peel&Go	30
S3612CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, Peel&Go	28
S3611CE	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm, Peel&Go	24



OPS™ Advanced

Kein Kompromiss zwischen Komfort und Schutz

- Atmungsaktiv - leitet Wärme schnell ab, um das Schwitzen beim Anwender zu reduzieren und erhöht somit den Tragekomfort
- Weiches SMMMS-Material mit höherem Basisgewicht (41 g/m²) für verbesserten Komfort
- Optionaler Raglanschnitt sorgt für mehr Platz und Bewegungsfreiheit
- Hohe Schutzleistung

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
OP9505CE	OP-Mantel, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	OP-Mantel, L, 130 cm	32
OP9507CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, Raglanschnitt	24
OP9575CE	OP-Mantel, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	OP-Mantel, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 130 cm	24/40*
OP9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske & mit Daumenschlaufe	28
OP9509CEA/OP9509DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 140 cm	28/36*
OP9512CE/OP9512DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, Raglanschnitt	20
OP9812CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske & mit Daumenschlaufe	24
OP9583CE/OP9583DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 120 cm	28
OP9510CE/OP9510DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE/OP9540DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE/OP9513DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	20/36*
OP9581CE/OP9581DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20/32*



*Diese Mäntel sind auch in Spenderboxen erhältlich.

OPS™ Ultimate

Der intelligente OP-Mantel mit atmungsaktiver Membrantechnologie

- Hohe Leistung des gesamten Mantels und vollständig undurchlässig für Pathogene im Blut (AAMI*PB70, ASTM F1671 getestet, EN13795)
- Der Mantel ist aus dreilagigem Material mit einem Basisgewicht von 60 g/m² hergestellt
- Atmungsaktiv und kühlend: reagiert mit erhöhter Wasserdampfdurchlässigkeit auf ansteigende Körpertemperatur
- Empfohlen für alle Eingriffe, bei denen ein atmungsaktiver Rundumschutz benötigt wird, (z.B. lange kardiochirurgische-, orthopädische Eingriffe, Transplantationen etc.)

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
LW89045CEB	Atmungsaktiver, undurchlässiger OP-Mantel, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Atmungsaktiver, undurchlässiger OP-Mantel, XXL, 150 cm, Raglanschnitt	20
LW39079CEB	Atmungsaktiver, undurchlässiger OP-Mantel, 2XLL, 150 cm, Raglanschnitt	20



Wir bieten auch OP-Mäntel an, die für die Verwendung im Umgang mit zytotoxischen Substanzen geeignet sind.

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
DYNJPE2301P	Undurchlässiger OP-Mantel, Prevention Plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Undurchlässiger OP-Mantel, Prevention Plus, XL, 142 cm	24

Die Prevention Plus OP-Mäntel entsprechen der EN 14605 sowie der PSA-Richtlinie (EU) 2016/425

*AAMI: Association of the Advancement of Medical Instrumentation. Der AAMI PB70 ist das in Amerika gültige Klassifizierungssystem, das Schutzkleidung und OP Abdeckungen, die in medizinischen Einrichtungen verwendet werden, bezogen auf Ihre Flüssigkeitsbarriere in verschiedene Sicherheitsstufen, einteilt. Sie legt außerdem die entsprechende Etikettierung und die Testmethoden fest.

Ein weicher und komfortabler OP-Mantel

- Hoher Komfort und hohe Atmungsaktivität
- Spunlace (68 g/m²) mit textilähnlichem Gefühl
- Angemessener Schutz

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
9505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	OP-Mantel, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	OP-Mantel, L, 120 cm, Raglanschnitt	26
9507CEA/9507DCE*	OP-Mantel, XL, 130 cm	24/40*
9707CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufe	24
9516CEA/9516DCE*	OP-Mantel, XLL, 150 cm	24/36*
9716CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufe	24
9575CEA/9575DCE*	OP-Mantel, XXL, 130 cm	24/36*
9585CE/9585DCE*	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	7
9709CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufe	22
9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske und mit Daumenschlaufe	22
9571CEA/9571DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XXL, 130 cm	20/28*
9512CEA/9512DCE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	11
9712CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufe	22
9812CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske und mit Daumenschlaufe	20
9581CEA/9581DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 130 cm	24
9513CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*



*Dieser Artikel ist auch in einer Spenderbox erhältlich.

OP-Mantel Auswahlhilfe

Wählen Sie den optimalen OP-Mantel, mit den entsprechenden Leistungen für Ihren Einsatzzweck. Entscheiden Sie je nach Art und Länge des Verfahrens, der Flüssigkeitsmenge und dem gewünschten Komfort.

Material	Eclipse			UltraGard		Essential		Advanced			Ultimate		
	Standard/Material/PE-verstärkt	S	M	P	S	P	S	M	P	S	M	P	S
Chirurgische Verfahren	Augenchirurgie	✓			✓		✓			✓			
	Tracheostomie	✓			✓		✓			✓			
	Ohr-OP	✓			✓		✓			✓			
	Gehör-Implantate	✓			✓		✓			✓			
	Kieferchirurgie	✓			✓		✓			✓			
	Tonsillektomie	✓			✓		✓			✓			
	Nasen-OP	✓			✓		✓			✓			
	Gefäßchirurgie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Proktologie	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	Geburtshilfe		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Mund/Kiefer/Gesichtschirurgie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Kleine Bauchchirurgie	✓			✓		✓			✓			
	Endokrine-OP	✓			✓		✓			✓			
	Herzschrittmacher	✓			✓		✓			✓			
	Orthopädie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Brust-OP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verbrennungs- und Plastische Chirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiografie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Gynäkologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Viszeralchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Urologie		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hüft-Ersatz		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Nieren- und Blasenoperationen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Knie-Ersatz		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Thoraxchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Herz- und Gefäßchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Neurochirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Wirbelsäulenchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu.



Medline International Germany GmbH
 Medline-Straße 1-3
 47533 Kleve
 Deutschland
 Tel.: +49 2821 7510-0
 Fax: +49 2821 7510-7802

de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
 1204 Genf
 Schweiz
 Tel.: +41 848 244 433
 Fax: +41 848 244 100

de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
 c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
 Parkring 2
 1010 Wien
 Österreich
 Tel: +43 800 201 878
 Fax: +43 800 201 879

de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Diese Produkte sind Medizinprodukte der Klasse I steril für den professionellen Einsatz durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung.



Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. ML281-DE 08/2020