

# Camici chirurgici

Performance, qualità e varietà



**Progettati,  
testati e affidabili  
secondo i  
professionisti  
della sala  
operatoria**



# Camici Chirurgici Medline

Performance, qualità e varietà


## Un'ampia scelta

Per soddisfare qualsiasi esigenza nella sala operatoria, offriamo cinque diversi camici chirurgici, ognuno di tipologia e rinforzo diversi.


## Protezione affidabile

Il tessuto non tessuto dei camici Medline offre un alto livello di protezione. Ogni camice è latex-free e soddisfa o supera i requisiti minimi di performance secondo lo standard EN 13794-1.\*I materiali Essential e Advanced hanno una buona caratteristica idrostatica, e il trattamento idrorepellente dona al paziente la protezione di cui ha bisogno. Il camice Ultimate offre una protezione impervia completa con una eccezionale traspirabilità.

\*EN 13795-1 è uno standard Europeo, che specifica i requisiti per coperture monouso e riutilizzabili - camici chirurgici e teli usati come dispositivi medici per i pazienti, per il personale clinico e per lo strumentario, destinate a prevenire la trasmissione di agenti infettivi durante procedure chirurgiche invasive.

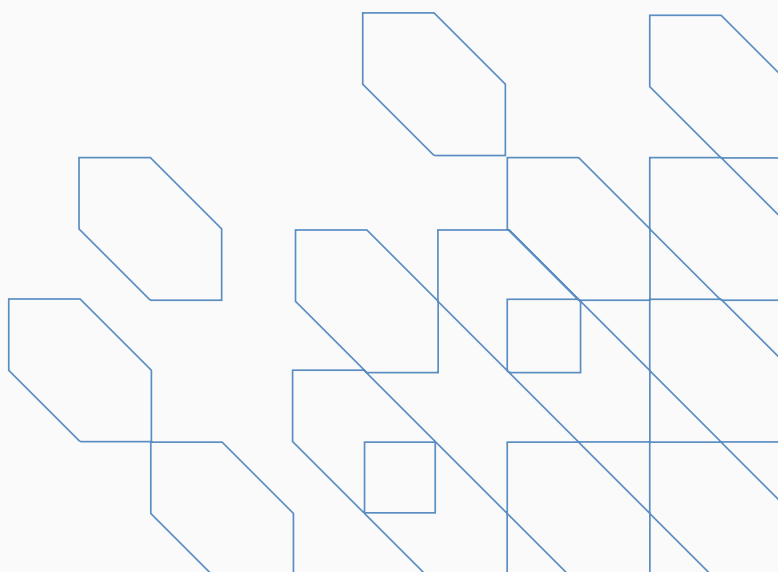

### Resistenza media alla trazione della cucitura della manica (N)

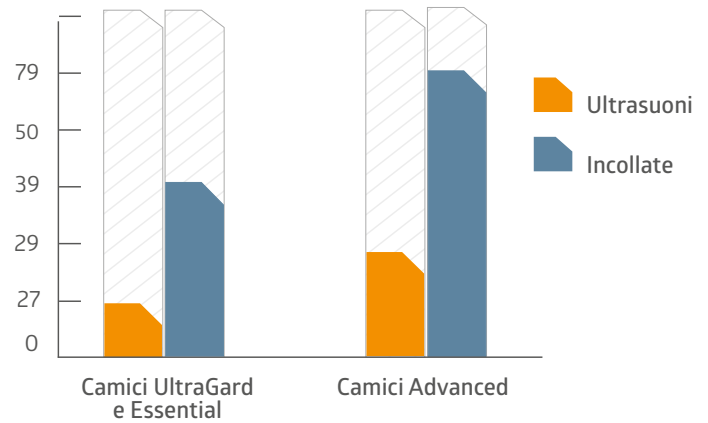

### Alte performance e alto comfort

Tutti i nostri camici chirurgici offrono al personale di sala operatoria un eccellente comfort e facilità di utilizzo. L'alta tecnologia del tessuto non tessuto e la sua traspirabilità donano comfort all'utilizzatore, lasciandolo asciutto anche dopo lunghe procedure. I camici sono dotati di maniche con cuciture incollate, che contribuisce a una maggior resistenza e comfort.



### Semplici da usare

Tutti i camici chirurgici Medline sono caratterizzati da un codice colore intuitivo per una facile selezione del camice corretto in sala operatoria. L'etichetta del prodotto e il cartoncino viola indicano il modello standard performance e il blu sta ad indicare high performance. Inoltre, forniamo i camici con tre colori del colletto diversi per identificare la tipologia del camice - standard, rinforzo in TNT o rinforzo in Polietilene.

Colletto viola  
Camice Standard

Colletto bianco  
Camici rinforzati  
in TNT

Colletto blu  
Camici rinforzati  
in PE

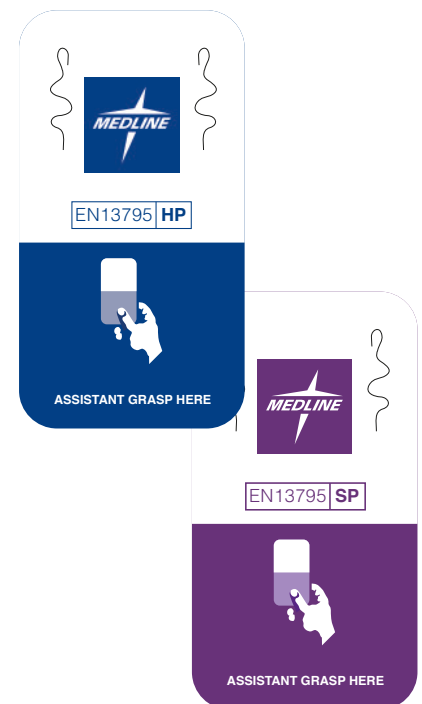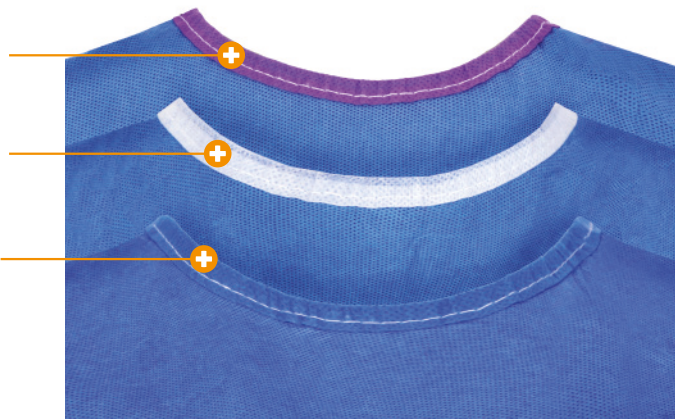

### Priorità alla Sicurezza

I range standard dei camici chirurgici Medline offrono un avvolgimento con foglio in SMS, preferito per le sue basse proprietà di linting ed effetto a bassa memoria, riducendo così il rischio di contaminazione.



# OPS™ UltraGard

Camice efficiente, prezzo accessibile

- Materiale leggero SMMMS (35 g/m<sup>2</sup>) con protezione idrorepellente
- Traspirante e confortevole
- Camice disponibile sia in versione standard che con protezione in PE

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
E3505CEA	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Camice chirurgico, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Camice chirurgico, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Camice chirurgico, XL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Camice chirurgico, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Camici chirurgici, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Camici chirurgici, rinforzo in PE, L, 120 cm	32
E3540CEA	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 140 cm	28
E3513CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 2XLL, 160 cm	20

\*Tali camici sono disponibili anche in dispenser box.





# OPS™ Essential

## Protezione avanzata

- Materiale leggero SMMMS (35 g/m<sup>2</sup>) con extra trattamento per un'ulteriore idrorepellenza
- Confortevole; offre eccezionale traspirabilità e drappeggiabilità
- I camici Essential con rinforzo in PE sono conformi agli standard EN 13795-1, EN 14605 e EN 14126

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
S3505CEC	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Camice chirurgico, L, 120 cm	36
S3545CEC	Camice chirurgico, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Camice chirurgico, XL, 150 cm	32
S3585CEC	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, L, 120 cm	28
S3509CEC	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Camici chirurgici, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Camici chirurgici, rinforzo in PE, L, 120 cm	32
S3540CEC	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 3XLL, 170 cm	20



I camici in OPS™ Essential sono disponibili anche con anello dito e/o mascherina.

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
S3507CEC	Camice chirurgico, XL, 140 cm, anelli dito	32
S3740CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 140 cm, anello dito	28
S3713CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm, anello dito	24
S3840CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 140 cm mascherina e anello dito	28
S3813CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm mascherina e anello dito	24
S3881CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm mascherina e anello dito	20

# OPS™ Advanced

Nessun compromesso tra comfort e protezione

- Traspirante; trasferimento rapido del calore per mantenere l'utilizzatore fresco e confortevole
- Grammatura maggiore, SMMMS soffice (41 g/m<sup>2</sup>) per una maggiore protezione e comfort
- Alta barriera protettiva
- Il taglio raglan opzionale migliora la vestibilità e facilita i movimenti

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
OP9505CE	Camice chirurgico, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Camice chirurgico, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Camice chirurgico, XL, 150 cm	32
OP39516CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, maniche raglan	24
OP9575CE	Camice chirurgico, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Camice chirurgico, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, L, 130 cm	24/40*
OP9509CEA	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm maniche raglan	20
OP9583CE/OP9583DCE*	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20



\*Tali camici sono disponibili anche in dispenser box.

**I camici in OPS™ Essential sono disponibili anche con anello dito e/o mascherina.**

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
OP9809CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XL, 130 cm mascherina e anello dito	28
OP9812CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm mascherina e anello dito	24

## Un camice soffice e confortevole

- Comfort e traspirabilità eccezionali
- Spunlace (68 g/m<sup>2</sup>) simile al tessuto.
- Protezione affidabile

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
9505CEA	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Camice chirurgico, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Camice chirurgico, L, 120 cm, maniche raglan	26
9507CEA/9507DCE*	Camice chirurgico, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Camice chirurgico, XL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Camice chirurgico, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XL, 130 cm	7
9571CEA	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Camici chirurgici, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Camici chirurgici, rinforzo in PE, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 130 cm	24
9513CEA	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20/28*

\*Questo codice è disponibile anche in dispenser box.



## I camici in Eclipse® sono disponibili anche con anello dito e/o mascherina.

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
9707CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, anelli dito	24
9716CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, anelli dito	24
9709CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 130 cm, anello dito	22
9809CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XL, 130 cm mascherina e anello dito	22
9712CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm anello dito	22
9812CEA	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm mascherina e anello dito	20

# OPS™ Ultimate

## Il camice intelligente con membrana traspirante

- La 'high performance' riguarda l'intero camice (EN 13795-1).
- Realizzato in materiale triaccoppiato 60 g/m<sup>2</sup>
- Traspirante e fresco
- Raccomandato per quelle procedure in cui è necessaria una protezione traspirante, come le lunghe procedure cardiologiche, ortopediche e interventi di trapianto

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
LW89045CEB	Camice chirurgico, traspirante, impervio, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Camice chirurgico, traspirante, impervio, XLL, 150 cm, maniche raglan	20
LW39079CEB	Camice chirurgico, traspirante, impervio, 2 XLL, 150 cm, maniche raglan	20



## Camice Urologico

Ottima copertura ideale per procedure di urologia

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
DYNJPE2304	Camice chirurgico, impervio, taglia, con piega, XL	30
DYNJPE2305	Camice chirurgico, impervio, taglia, con piega, XLL	30





# Doppia protezione

## Protezione avanzata da agenti virali e chemioterapici

Protezione clinica avanzata per la vostra tranquillità. Offriamo due range di camici chirurgici testati ulteriormente contro agenti chemioterapici e infettivi. Tale soluzione viene classificata come dispositivo doppio marcato: Dispositivo Medico di classe I (DM) e Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria (DPI).



### OPS™ Essential

Il camice doppio marcato Essential è conforme alla EN 14605 e EN 14126

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
S3500P	Camici chirurgici, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	32
S3510P	Camici chirurgici, rinforzo in PE, L, 120 cm	32
S3540P	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 140 cm	28
S3513P	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
S3581P	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20

Dispositivo di protezione individuale di III categoria; conforme alla EN 14605 e EN 14126

### Prevention™ Plus

Come utilizzatore finale, hai una maggiore protezione contro i liquidi e farmaci citotossici (chemioterapici). Ciò è reso più facile grazie ad un design innovativo, un materiale triaccoppiato impervio e traspirante - ideale per proteggere i clinici quando si eseguono trattamenti di HIPEC (chemioterapia intraperitoneale ipertermica).

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
DYNJPE2301P	Camice chirurgico, impervio, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Camice chirurgico, impervio, XL, 142 cm	24

I camici Prevention Plus sono conformi alla EN 14605 e al Regolamento dei DPI (EU) 2016/425.



# Soluzione 'Peel-and-Go'

Oltre a semplificare il confezionamento per il personale ed eliminare costi non essenziali come sovraincarti e tovagliette, il confezionamento 'peel-and-go' consente di produrre meno rifiuti in ospedale. Grazie ad una singola busta, sterile e peel-pouch, la soluzione 'pee-and-go' è efficiente, economica ed ecologica adatta alle necessità della vostra struttura.

**OPS™ i camici Ultragard con confezionamento a singolo strato sono disponibili nei range standard e rinforzo in PE.**

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
E3606CE	Camice chirurgico, L, 120 cm, ST	40
E3645CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, ST	40
E3616CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, ST	36
E3640CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XL, 140 cm, ST	32
E3613CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, XLL, 150 cm, ST	28
E3681CE	Camici chirurgici, rinforzo in PE, 2XLL, 160 cm, ST	24



**OPS™ i camici Essential con confezionamento a singolo strato sono disponibili nei range standard e rinforzo in TNT.**

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione
S3606CE	Camice chirurgico, L, 120 cm	40
S3645CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm	40
S3616CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm,	36
S3685CE	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	32
S3609CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XL, 130 cm	30
S3612CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	28
S3611CE	Camici chirurgici, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm	24



# Guida sulla selezione del Camice Chirurgico

Scegli il camice con le performance adatte per ogni intervento, sulla base del tipo e durata della procedura, quantità di liquidi e comfort.

Range		Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
Standard/rinf. in TNT/ rinf. in PE		S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Procedure chirurgiche DRG	Oftalmologia	✓			✓		✓			✓			
	Tracheostomia	✓			✓		✓			✓			
	Chirurgia dell'orecchio	✓			✓		✓			✓			
	Impianto coclea	✓			✓		✓			✓			
	Bocca	✓			✓		✓			✓			
	Tonsillectomia	✓			✓		✓			✓			
	Chirurgia del naso	✓			✓		✓			✓			
	Vene varicose	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Proctologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Ostetricia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Maxillofacciale	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Endoaddominale	✓			✓		✓			✓			
	Endocrino	✓			✓		✓			✓			
	Pacemaker	✓			✓		✓			✓			
	Generale Ortopedica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgia al seno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ustioni, plastica e innesto		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiografia/angioplastica	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Ginecologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Chirurgia generale addominale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Urogenitale		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgia Ortopedica, anca		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Reni, ghiandole surrenali e vescica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Chirurgia Ortopedica, ginocchio		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Toracica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia vascolare		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Cranio		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Spinale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

**Per maggiori informazioni** sui nostri prodotti, contattare  
il vostro rappresentante commerciale di zona o visitate il  
nostro sito web: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433  
[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Questi prodotti sono dispositivi medici di classe I sterili destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.  
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate sull'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281\_IT 10/2021

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia

 2797 (BSI)