



***GESTION DES FLUIDES
ET DES LIQUIDES.***

Tubulure d'aspiration
Universelle, stérile et non-stérile

UNE TUBULURE ÉTUDIÉE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

- Une structure: souple, elle est capable de suivre la configuration imposée par l'utilisateur.
- Un format: disponible en plusieurs diamètres et longueurs; en version stérile ou non stérile.
- Une connexion: universelle pour une connectique aisée à l'ensemble des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'une aspiration chirurgicale ou médicale.

TUBULURE D'ASPIRATION STÉRILE⁽¹⁾

Les tubulures ORNEX sont élaborées avec une surface extérieure striée afin d'augmenter la résistance aux fortes dépressions et d'éviter à la tubulure de glisser sur la table d'opération.

Les connecteurs femelles bleus sont en PVC souple afin de faciliter leurs compatibilités avec les canules de type yankauer. L'intérieur de celui-ci est conique et cranté afin d'épouser parfaitement la partie mâle de l'accessoire pour une connexion sécurisée. Chaque produit est présenté en sachet double emballage dans lequel se trouve un connecteur, afin de transformer la connectique femelle en connectique mâle selon la configuration requise.



ORNEX STERILE

Avec connecteurs femelles et connecteur mâle intégré


Référence	Diamètre interne	Longueur	Conditionnement
ORNEX56A	5 mm	1.80 m	50/carton
ORNEX510		3 m	30/carton
ORNEX66A	6 mm	1.80 m	45/carton
ORNEX610		3 m	25/carton
ORNEX76A	7 mm	1.80 m	40/carton
ORNEX710		3 m	20/carton
ORNEX712		3.6 m	20/carton



ORNEX STERILE AVEC CONTRÔLE DU VIDE

Avec connecteurs femelles et connecteur de vide intégré

Référence	Type	Diamètre interne	Longueur	Conditionnement
ORNEX56VC	F/F+MVC	5 mm	1.80 m	50/carton
ORNEX510VC	F/F+MVC		3 m	50/ carton
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1.80 m	50/carton
ORNEX610VC	F/MVC		3 m	50/carton

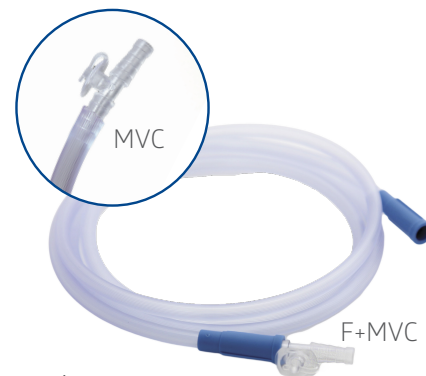


» F : connecteur femelle compatible avec machines d'aspiration et connecteurs mâles pour instruments

» M : connecteur mâle compatible avec connecteur F et est généralement utilisé pour connecter un adaptateur pour les cathéters d'aspiration. Peut également être utilisé pour connecter plusieurs tubulures ensemble pour obtenir une longueur de tubulure plus importante.

TUBULURE D'ASPIRATION NON STÉRILE⁽²⁾

ORNEX AVEC STOP-VIDE INTÉGRÉ



Référence	Diamètre interne	Longueur	Stop-vide	Conditionnement
ORNEX66VCA	6 mm	1.80 m	Adulte	30/carton
ORNEX66VCP	6 mm	1.80 m	Pédiatrique	30/carton
ORNEX610VCA	6 mm	3 m	Adulte	30/carton
OR853VCA	Stop-vide seul		Adulte	200/carton
OR854VCP	Stop-vide seul		Pédiatrique	200/carton

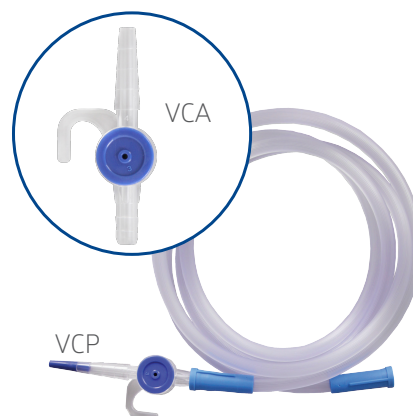

ORNEX EN ROULEAU

Tubulure en rouleau de 30 mètres avec un double connecteur tous les 1,80 mètre. Ce double connecteur peut être coupé en son milieu selon la longueur souhaitée. Chaque rouleau est présenté en boîte distributrice, dans laquelle se trouve 16 connecteurs mâles, afin de transformer le double connecteur femelle (une fois coupé) en connectique mâle selon la configuration requise. Les tubulures ORNEX sont élaborées avec une surface extérieure striée afin d'augmenter la résistance aux fortes dépressions et d'éviter à la tubulure de glisser.


Référence	Diamètre interne	Longueur	Conditionnement
ORNEX5100	5 mm	Rouleau de 30 M, soit 16 tubulures de 1.80M avec connecteurs	1/carton
ORNEX6100	6 mm		1/carton
ORNEX7100	7 mm		1/carton

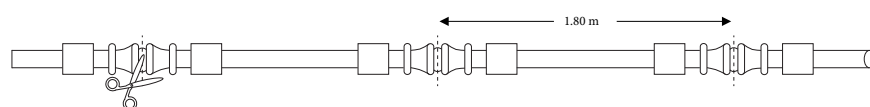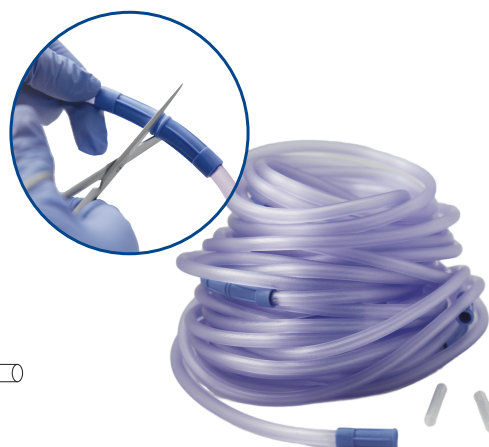

TUBULURE D'ASPIRATION NON STÉRILE À RENFLEMENTS⁽³⁾

Tubulure en rouleau de 30 mètres avec renflement tous les 0,90 mètre. Ce renflement peut être coupé en son milieu selon la longueur souhaitée et rogné afin d'obtenir la meilleure connexion avec l'accessoire. Chaque rouleau est présenté en boîte distributrice.

Référence	Diamètre interne	Longueur	Conditionnement
NBT5100	5 mm	30 m roll = 0.90 m x 33 suction tubes	1/carton
NBT7100	7 mm		1/carton

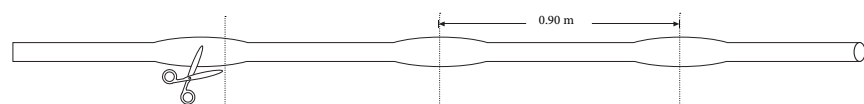

CONNECTEURS POUR TUBULURES D'ASPIRATION⁽²⁾

Les connecteurs non stériles Medline sont:

- légers et résistants aux chocs
- transparents pour la vision des fluides et des liquides
- crantés pour une connexion sécurisée



OR356

Les connecteurs sont conditionnés en boîtes distributrices.

Référence	Description	Conditionnement
OR350A	Connecteur droit rigide / Raccord droit cranté (symétrique) Ce connecteur est compatible à la connexion de tubulures de diamètre interne allant de 5 à 11 mm. Il permet de connecter ensemble deux tubulures du même diamètre ou peut être utilisé comme un connecteur-réducteur.	500/carton
OR351	Connecteur type SIMS / Raccord Réducteur cranté Ce connecteur est compatible à la connexion de tubulures de diamètre interne allant de 3 à 6 mm. Il permet de connecter ensemble deux tubulures du même diamètre ou peut être utilisé comme un connecteur-réducteur. Ce connecteur est rognable.	500/carton
OR352	Connecteur en "T" cranté (symétrique) Ce connecteur est compatible à la connexion en T de trois tubulures de diamètre interne allant de 5 à 11 mm. Les tubulures peuvent avoir ou non un diamètre interne identique.	150/carton
OR356	Connecteur en "Y" cranté (symétrique) Ce connecteur est compatible à la connexion en Y de trois tubulures de diamètre allant de 6 à 15 mm. Les tubulures peuvent avoir ou non un diamètre interne identique.	150/carton



OR350A



OR351




OR352

⁽¹⁾ Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I, stérile.

⁽²⁾ Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I, non stérile.

⁽³⁾ Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I, non stérile

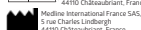

Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages.



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com