

Solutions urologiques

Vous êtes là pour vos patients. Nous sommes là pour vous.



Votre parcours
vers **des solutions**
d'urologie complètes



Des produits de la plus haute qualité

Nous vous proposons une gamme complète de produits cliniquement approuvés, notamment :

- Des sets de sondage urinaire conçus par des infirmiers qui reflètent à la fois les exigences cliniques et les pratiques fondées par des données probantes
- Diverses sondes intermittentes et sondes de Foley pour répondre aux besoins de vos patients
- Des solutions de drainage urinaire pour les hospitalisations ou les affections chroniques

Prévention des infections urinaires sur sonde

Afin de contribuer à préserver la santé des patients, nous nous attachons à prévenir autant que possible les infections urinaires sur sonde (CAUTI). L'Institut Robert Koch (RKI) recommande différents dispositifs pour prévenir ces infections. Il s'agit notamment :

- De protocoles stricts de sondage urinaire afin de réduire les utilisations inutiles
- De la standardisation des produits
- Du maintien de la stérilité des sondes
- Du retrait des sondes en temps voulu.¹

Table des matières

Sets de sondage urinaire	3
Sondes urinaires	7
Poches de drainage urinaire	16
Poches de jambe	26
Pédiatrie	28
Seringues d'irrigation	30
Produits gastro-entérologiques	31

**Mieux vaut
prévenir que
guérir**

Solutions de prévention des infections urinaires sur sonde

Les infections urinaires sur sonde sont l'une des infections nosocomiales les plus courantes. Des protocoles pour les infections urinaires sur sonde existent, mais avec tant de priorités différentes, le respect des bonnes pratiques est souvent inégal. Ces infections sont le plus souvent dues par des bactéries qui pénètrent dans la vessie lors de l'insertion d'une sonde, ou à une perturbation du système de drainage clos.

Le taux d'incidence journalier des patients développant une infection urinaire sur sonde se situe entre 3 et 10 %. Après 30 jours de sonde à demeure, la majorité des patients développent une bactériurie, c'est-à-dire la présence de bactéries dans les urines. En général, 80 % des infections urinaires nosocomiales sont associées aux sondes urinaires.¹

L'utilisation de sets de sondage stériles (EO), associée à de bonnes pratiques cohérentes, peut réduire le taux d'infection chez les patients lors de la pose ou du remplacement des sondes urinaires. Avec ces kits, Medline vise à s'inscrire dans une solution de réduction des infections urinaires sur sonde adaptée aux besoins spécifiques de votre établissement.

Sets de sondage urinaire

Composants S-010000 :

- 1 plateau de recueil des urines, en plastique
- 6 écouvillons de gaze, en boule
- 2 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince
- 1 champ fendu, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 champ de table, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, taille moyenne, non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-020000-N :

- 1 plateau de recueil des urines, en plastique
- 6 écouvillons de gaze, en boule
- 2 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 2 pinces
- 1 champ fendu, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en nitrile, grande taille, non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-030000 :

- 1 haricot, en plastique
- 1 bol à écouvillons, en plastique
- 5 écouvillons de gaze, en boule
- 2 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince
- 1 champ fendu, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, taille moyenne non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-030000-N :

- 1 haricot, en plastique
- 1 bol à écouvillons, en plastique
- 5 écouvillons de gaze, en boule
- 2 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince
- 1 champ fendu, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, taille moyenne, non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-040000 :

- 1 plateau de recueil des urines, en plastique
- 4 écouvillons de gaze, en boule
- 2 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 2 pinces
- 1 champ fendu, 50 x 50 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, taille moyenne, non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-050000 :

- 1 haricot, en plastique
- 1 bol à écouvillons, en plastique
- 6 écouvillons de gaze, en boule
- 1 compresse de gaze, 10 x 10 cm
- 2 pinces
- 1 champ fendu, 50 x 50 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, taille moyenne, non poudrés dans du papier
- 1 champ de table, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-060000 :

- 1 plateau de recueil des urines, en plastique
- 5 écouvillons de gaze, en boule
- 5 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince
- 1 champ fendu, 50 x 50 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, grande taille, non poudrés dans du papier
- 1 gant d'examen en nitrile, taille moyenne, non poudré, manchette repliée
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-060000-N :

- 1 plateau de recueil des urines, en plastique
- 5 écouvillons de gaze, en boule
- 5 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince
- 1 champ fendu, 50 x 50 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en nitrile, grande taille, non poudrés dans du papier
- 1 gant d'examen en nitrile, taille moyenne, non poudré, manchette repliée
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-070000 :

- 1 haricot, en plastique
- 1 bol à écouvillons, en plastique
- 4 écouvillons de gaze, en boule
- 4 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince
- 1 champ fendu, 50 x 50 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, taille moyenne, non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable



Composants S-080000 :

- 1 plateau de recueil des urines, en plastique
- 6 écouvillons de gaze, en boule
- 2 compresses de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 2 pinces
- 1 champ fendu, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en latex, taille moyenne, non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 seringue Glyco-SID®, 10 ml



Composants S-090000 :

- 1 plateau de recueil des urines, en plastique
- 6 écouvillons de gaze, en boule
- 1 pince
- 1 champ fendu, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 paire de gants d'examen en vinyle, grande taille, non poudrés dans du papier
- 1 carré de transfert, 60 x 60 cm, imperméable
- 1 seringue Glyco-SID®, 10 ml



Composants UROKIT001 :

- 1 plateau, en plastique
- 1 champ fenêtré, 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 5 compresses de gaze 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Kocher
- 1 champ, 75 x 90 cm, imperméable
- 1 seringue préremplie d'eau de 20 ml
- 1 gel lubrifiant 5 g



Medline CareSet

Composants KER70700 :

- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 champ fenêtré, 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 1 seringue, 20 ml
- 1 ampoule d'eau distillée, 20 ml
- 1 gel lubrifiant, 5 g
- 1 pince Kocher en plastique
- 5 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 blister rigide moyen



Composants KER70022B-02 :

- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 champ fenêtré, 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 2 seringues préremplies d'eau distillée, 10 ml
- 1 seringue préremplie de gel lubrifiant, 5 g
- 1 pince Kocher en plastique
- 5 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 blister rigide taille moyenne



Nos CareSet existants répondent-ils à vos besoins spécifiques ?

Contactez-nous pour obtenir un set personnalisé, comprenant les composants dont vous avez besoin pour le sondage de vos patients.

**Vous êtes
là pour vos
patients. Nous
sommes là
pour vous.**

UROSID®


**Qualité
Fiabilité
Sécurité**

Système de drainage urinaire clos Pré-connecté

L'association d'une sonde urinaire préconnectée à un système de drainage urinaire clos garantit une technique sans contact, réduit les manipulations et contribue à la standardisation des pratiques. La sonde est préalablement connectée et scellée à la poche de drainage urinaire UROSID® 2000 S, permettant ainsi de minimiser le risque de contamination et d'infection (CAUTI).

La durée de pose du système clos pré-connecté peut aller jusqu'à 14 jours, tandis que la sonde de Foley en silicone peut rester en place jusqu'à 30 jours.

Avantages et caractéristiques

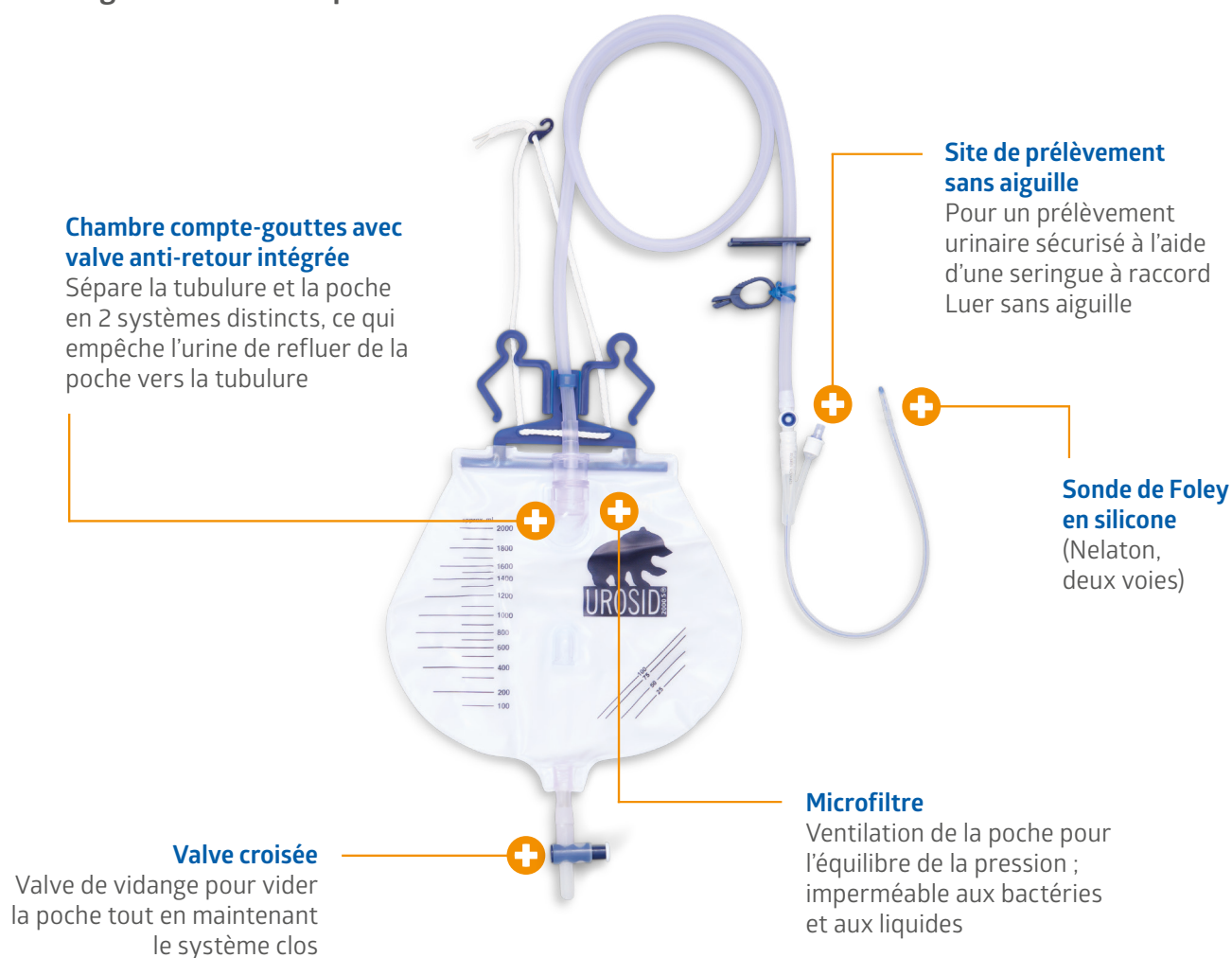

REF 690212-N-SFxx

Références	Sonde de Foley en silicone				Poche de drainage urinaire clos			
	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Volume de la poche (ml)	Longueur de tubulure (cm)	Valve croisée	Conditionnement (unités/carton)
690212-N-SF12	12	40	10	Blanc	2 000	120	Vertical	20
690212-N-SF14	14	40	10	Vert	2 000	120	Vertical	20
690212-N-SF16	16	40	10	Orange	2 000	120	Vertical	20
690212-N-SF18	18	40	10	Rouge	2 000	120	Vertical	20
690212-N-SF20	20	40	10	Jaune	2 000	120	Vertical	20
690212-N-SF22	22	40	10	Violet	2 000	120	Vertical	20

Sondes urinaires

Solutions de prévention des infections urinaires sur sonde

Le sondage urinaire permet de drainer la vessie et de recueillir l'urine à l'aide de sondes intermittentes ou à demeure.

Silicone ou Latex ? Le choix vous appartient.

- Les sondes de Foley sont disponibles en 100 % silicone ou en latex de caoutchouc naturel. Le choix du type le mieux adapté dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'existence ou non d'une allergie à certains matériaux et de la durée prévue d'utilisation. Les avantages et les inconvénients des différents matériaux doivent être pris en considération.

100 % silicone

- Durée d'utilisation maximale jusqu'à 30 jours
- Biocompatibilité élevée – moins d'allergies connues
- Moins d'incrustation pendant l'utilisation
- Radio-opaque pour faciliter la visualisation lors des imageries
- Matériau lisse pour un confort maximal

Latex de caoutchouc naturel (siliconé)

- Durée d'utilisation maximale jusqu'à 14 jours
- De nombreux patients sont allergiques au latex
- Incrustation plus rapide par rapport aux sondes 100 % silicone
- Coût unitaire inférieur à celui des sondes en silicone
- Non radio-opaque
- Matériau lisse pour un confort maximal



Sondes de Foley en silicone UROSID®

La sonde de Foley en silicone UROSID® est une sonde urinaire transurétrale à deux ou trois voies, fabriquée à 100 % en silicone de qualité médicale. Chacune d'elles est équipée d'un embout Nelaton droit et atraumatique ou d'un embout Tiemann légèrement béquillé et atraumatique. Elles comportent une bande de contraste radiologique continue en sulfate de baryum pour la radio-opacité. Les sondes de Foley à embout Nelaton peuvent être utilisées pour le sondage des femmes et des hommes, tandis que les sondes à embout Tiemann sont principalement utilisées pour le sondage des patients de sexe masculin dont l'urètre est rétréci, en cours de cicatrisation ou difficile à franchir.

Ces sondes conviennent à la fois à la vidange passive et au remplissage/drainage rétrograde de la vessie. Chaque taille est identifiée par un code couleur et peut être utilisée avec toutes les poches à urine Medline. En outre, la valve du canal de remplissage est munie d'un raccord de seringue Luer-Lock. Les ballonnets des sondes ont des volumes de remplissage différents, compris entre 5 et 30 ml.

Sonde de Foley en silicone UROSID®

Type : Nelaton, deux voies

REF : 6421xxA



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
642112A	12	40	5 – 15	Blanc	10
642114A	14	40	5 – 15	Vert	10
642116A	16	40	5 – 15	Orange	10
642118A	18	40	5 – 15	Rouge	10
642120A	20	40	5 – 15	Jaune	10
642122A	22	40	5 – 15	Violet	10
642124A	24	40	5 – 15	Bleu	10

REF : 6430xxA



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
643016A	16	40	30	Orange	10
643018A	18	40	30	Rouge	10
643020A	20	40	30	Jaune	10
643022A	22	40	30	Violet	10
643024A	24	40	30	Bleu	10

REF : 6520xx

La sonde de Foley en silicone UROSID® est équipée d'un ballonnet intégré, offrant plus de confort à vos patients.



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
652012	12	40	5-10	Blanc	10
652014	14	40	5-10	Vert	10
652016	16	40	5-10	Orange	10
652018	18	40	5-10	Rouge	10
652020	20	40	5-10	Jaune	10
652022	22	40	5-10	Violet	10
652024	24	40	5-10	Bleu	10

REF : 6420xxA-P

Ce produit comprend une seringue Glyco-SID® préremplie avec une solution d'eau et de glycérine (10 %) de 10 ml comme bloqueur pour le remplissage du ballonnet. Graduation de la seringue : 0,2 ml



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
642012A-P	12	40	10	Blanc	5
642014A-P	14	40	10	Vert	5
642016A-P	16	40	10	Orange	5
642018A-P	18	40	10	Rouge	5
642020A-P	20	40	10	Jaune	5
642022A-P	22	40	10	Violet	5
642024A-P	24	40	10	Bleu	5

Sonde de Foley en silicone UROSID®**Type : Nelaton, trois voies****REF : 6440xxA**

La sonde de Foley à trois voies dispose d'un canal d'irrigation/injection supplémentaire pour l'administration de solutions médicamenteuses ou le rinçage de la vessie.



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
644016A	16	40	30	Orange	10
644018A	18	40	30	Rouge	10
644020A	20	40	30	Jaune	10
644022A	22	40	30	Violet	10
644024A	24	40	30	Bleu	10

Sonde de Foley en silicone UROSID®**Type : Tiemann, deux voies****REF : 6530xxA**

La sonde de Foley en silicone UROSID® a été spécialement conçue pour les patients de sexe masculin.



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
653012A	12	40	10	Blanc	10
653014A	14	40	10	Vert	10
653016A	16	40	10	Orange	10
653018A	18	40	10	Rouge	10
653020A	20	40	10	Jaune	10

Sonde de Foley UROSID® Embout Dufour

La sonde de Foley en silicone UROSID® est une sonde 3 voies composée à 100 % de silicone. Elle est conçue avec un embout Dufour, particulièrement adapté aux patients masculins nécessitant une irrigation continue de la vessie ou la gestion de l'hématurie.


La sonde de Foley à trois voies avec embout Dufour, dispose d'un canal d'irrigation/injection supplémentaire pour l'administration de solutions médicamenteuses ou le rinçage de la vessie.

Embout Dufour

- L'embout courbé permet une mise en place facile sans guide d'insertion

Pratique

- Dispose d'une ligne radio-opaque le long de la sonde et d'un embout radio-opaque, assurant une bonne visualisation du dispositif lors d'un potentiel examen radiologique
- Durée de pose maximale jusqu'à 30 jours

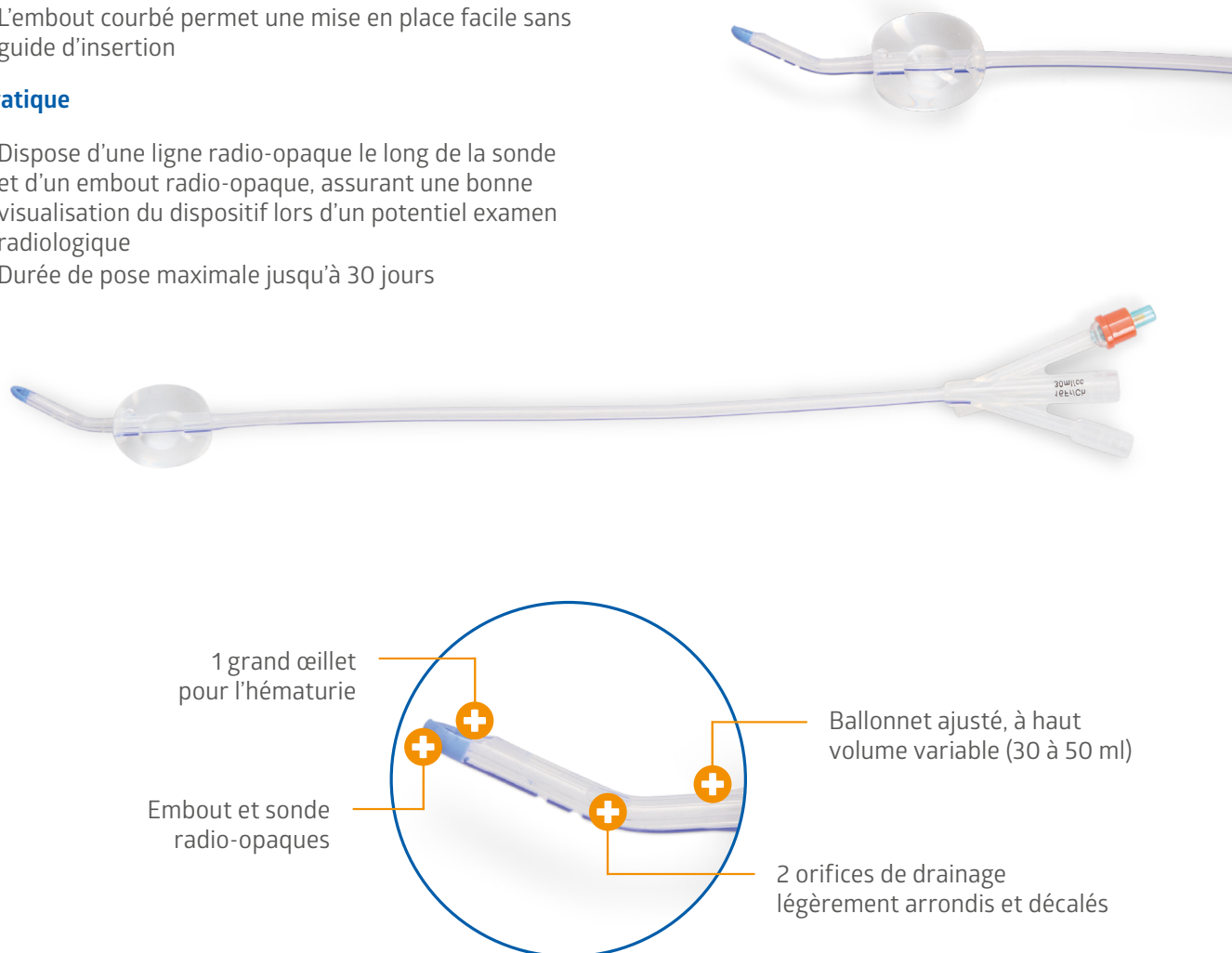

REF 6580xx

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
658016	16	40	30	Orange	10
658018	18	40	30	Rouge	10
658020	20	40	30 – 50	Jaune	10
658022	22	40	30 – 50	Violet	10
658024	24	40	50	Bleu	10

UROSID® Sensor 400

L'UROSID® Sensor 400 est une sonde de Foley transurétrale en silicone avec capteur de température intégré.

Précision


- Mesures continues entre 25 et 45° C avec une précision de $\pm 0,1^{\circ}$ C

Pratique

- Gain de temps pour le personnel infirmier qui surveille la température lorsque le sondage de Foley constitue déjà une indication.

Compatibilité

- Utilisable dans la plupart des unités d'hypothermie et avec les moniteurs patients de GE®, HP® Philips™, Siemens® et autres.
- Nous vous fournirons les câbles adaptateurs adaptés
- La sonde UROSID® Sensor 400 est compatible avec l'IRM sous conditions

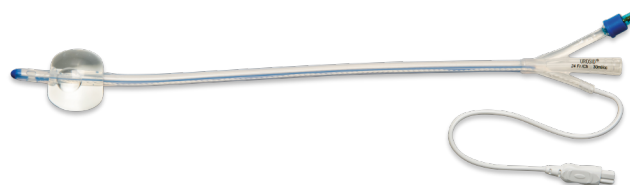

REF : 6460xxA

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
646008A	8	31	5	Bleu	5
646010A	10	31	5	Noir	5
646012A	12	40	10	Blanc	5
646014A	14	40	10	Vert	5
646016A	16	40	10	Orange	5
646018A	18	40	10	Rouge	5
646020A	20	40	30	Jaune	5
646022A	22	40	30	Violet	5
646024A	24	40	30	Bleu	5

Câbles adaptateurs

Les câbles adaptateurs sont utilisés pour raccorder l'UROSID® Sensor 400 aux moniteurs patients. Le câble adaptateur adapté est choisi en fonction du type de moniteur patient utilisé.

Référence	Nom	Longueur (cm)	Unités
646060A	Prise téléphonique, droite, 6,35 mm	500	1
646070A	Connecteur rond, droit, HP/Philips	500	1
646080A	Connecteur rond, droit, Siemens	500	1



Toutes les sondes de Foley en silicone UROSID® sont :

- Sans latex de caoutchouc naturel
- Sans DEHP ni PHT
- Stérile (EO).

Sondes de Foley en latex UROSID®

La sonde de Foley en latex UROSID® est une sonde urinaire transurétrale à deux ou trois voies en latex de caoutchouc naturel siliconé. Elle est dotée d'un embout Nelaton droit et atraumatique ou d'un embout Tiemann légèrement béquillée et atraumatique. Les sondes de Foley à embout Nelaton peuvent être utilisées pour le sondage des femmes et des hommes, tandis que les sondes à embout Tiemann sont principalement utilisées pour le sondage des patients de sexe masculin dont l'urètre est rétréci, en cours de cicatrisation ou difficile à franchir.

Ces sondes conviennent à la fois à la vidange passive et au remplissage/drainage rétrograde de la vessie. Chaque taille est identifiée par un code couleur et peut être utilisée avec toutes les poches à urine Medline. En outre, la valve du canal de remplissage est munie d'un raccord de seringue Luer-Lock. Les ballonnets des sondes ont des volumes de remplissage différents, compris entre 5 et 30 ml.

Sonde de Foley en latex UROSID®

Type : Nelaton, deux voies

REF : 6620xxA



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Valve	Couleur	Unités
662012A	12	40	5 - 10	PVC	Blanc	10
662014A	14	40	5 - 10	PVC	Vert	10
662016A	16	40	5 - 10	PVC	Orange	10
662018A	18	40	5 - 10	PVC	Rouge	10
662020A	20	40	5 - 10	PVC	Jaune	10
662022A	22	40	5 - 10	PVC	Violet	10
662024A	24	40	5 - 10	PVC	Bleu	10
662026A	26	40	5 - 10	PVC	Noir	10



REF : 6622xxA

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Valve	Couleur	Unités
662212A	12	40	5 - 10	Caoutchouc	Blanc	10
662214A	14	40	5 - 10	Caoutchouc	Vert	10
662216A	16	40	5 - 10	Caoutchouc	Orange	10
662218A	18	40	5 - 10	Caoutchouc	Rouge	10
662220A	20	40	5 - 10	Caoutchouc	Jaune	10
662222A	22	40	5 - 10	Caoutchouc	Violet	10
662224A	24	40	5 - 10	Caoutchouc	Bleu	10
662226A	26	40	5 - 10	Caoutchouc	Noir	10



La valve en caoutchouc est compatible avec l'IRM sous conditions.

Sonde de Foley en latex UROSID®

Type : Nelaton, deux voies

REF : 6630xxA



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
663012A	12	40	30	Blanc	10
663014A	14	40	30	Vert	10
663016A	16	40	30	Orange	10
663018A	18	40	30	Rouge	10
663020A	20	40	30	Jaune	10
663022A	22	40	30	Violet	10
663024A	24	40	30	Bleu	10
663026A	26	40	30	Noir	10

Sonde de Foley en latex UROSID®

Type : Tiemann, deux voies

REF : 6650xxA

La sonde de Foley UROSID® en latex avec embout de Tiemann a été spécialement conçue pour les patients de sexe masculin.



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
665012A	12	40	5 - 10	Blanc	10
665014A	14	40	5 - 10	Vert	10
665016A	16	40	5 - 10	Orange	10
665018A	18	40	5 - 10	Rouge	10
665020A	20	40	5 - 10	Jaune	10

REF : 6660xxA

La sonde de Foley en latex UROSID® avec embout de Tiemann a été spécialement conçue pour les patients de sexe masculin.



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
666012A	12	40	30	Blanc	10
666014A	14	40	30	Vert	10
666016A	16	40	30	Orange	10
666018A	18	40	30	Rouge	10
666020A	20	40	30	Jaune	10



Toutes les sondes de Foley en latex UROSID® sont :
· Stérile (EO).

Sonde de Foley en latex UROSID®

Type : Nelaton, trois voies

REF : 6680xxA

La sonde de Foley à trois voies dispose d'un canal d'irrigation/injection supplémentaire pour l'administration de solutions médicamenteuses ou le rinçage de la vessie.



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
668016A	16	40	30	Orange	10
668018A	18	40	30	Rouge	10
668020A	20	40	30	Jaune	10
668022A	22	40	30	Violet	10
668024A	24	40	30	Bleu	10
668026A	26	40	30	Noir	10

UROSID® Supra

Certains patients ne peuvent pas être sondés par l'urètre en raison de complications telles que le rétrécissement de l'urètre. Dans ce cas, un drainage de la vessie par voie percutanée doit être réalisée.

La sonde UROSID® Supra en silicone offre une solution adaptée à la vidange extra-anatomique de la vessie et peut être utilisée avec toutes les poches à urine Medline. Il s'agit d'une sonde vésicale sus-pubienne deux voies en silicone de qualité médicale, avec une extrémité ouverte et une ligne radio-opaque continue au sulfate de baryum, visible à la radiographie. En outre, la valve du canal de remplissage est munie d'un raccord de seringue Luer-Lock et d'un code couleur. Il existe également des sondes de petite taille (6 – 10 CH) dotées d'un guide (stylet) pour faciliter l'insertion.



REF : 6450xxA

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
645006A	6	40	1,5	Vert clair	10
645008A	8	40	3	Bleu	10
645010A	10	40	3 - 5	Noir	10
645012A	12	40	5 - 10	Blanc	10
645014A	14	40	5 - 10	Vert	10
645016A	16	40	5 - 10	Orange	10
645018A	18	40	5 - 10	Rouge	10
645020A	20	40	5 - 10	Jaune	10
645022A	22	40	5 - 10	Violet	10
645024A	24	40	5 - 10	Bleu	10
645026A	26	40	5 - 10	Noir	10



Toutes les sondes UROSID® Supra sont :

- Sans latex de caoutchouc naturel
- Sans DEHP ni PHT
- Stérile (EO).

Accessoires pour sondes de Foley UROSID®

Solution de gonflage du ballonnet

Aqua-SID® et Glyco-SID®

Ces seringues préremplies facilitent le gonflage des ballonnets des sondes de Foley UROSID® (silicone ou latex) lors du sondage.

Référence	Nom	Fonctionnalité	Unités
623001	Aqua-SID®	10 ml d'eau purifiée	10
623002	Glyco-SID®	Mélange de 10 ml d'eau purifiée et de 10 % de glycérine	10



Fosset

REF : 647010-x

Un fosset est un bouchon utilisé pour fermer l'entonnoir de vidange des sondes de Foley pendant une courte période (par exemple, lors d'un changement de poche de drainage ou de l'examen du patient).

Référence	Stérilité	Unités
647010-ST	Stérile (EO)	50
647010-NS	Non stérile	100



Fixation pour sonde de Foley

REF : FCS200ZT

Dispositif de fixation de sonde pour attacher la sonde de Foley à la jambe du patient et s'assurer qu'elle ne bougera pas.

Référence	Stérilité	Unités
FCS200ZT	Stérile (EO)	50



Nous vous
fournissons tout
ce dont vous
avez besoin
pour sonder vos
patients.

Sondes intermittentes

Le sondage intermittent est considéré comme une méthode sûre et efficace pour l'évacuation de l'urine, en offrant une autonomie aux patients et en s'intégrant dans leur quotidien. Ces sondes peuvent également être utilisées pour un prélèvement unique d'échantillons d'urine directement dans la vessie, ce qui permet d'obtenir un résultat pur.

Medline propose des sondes intermittentes avec un embout Nelaton ou Tiemann afin de garantir une solution adaptée pour les patients de sexe masculins et féminins.

Sonde intermittente

Type : Nelaton

REF : 680xxx*

Ces sondes à usage unique en PVC sont munies d'une extrémité arrondie (Nelaton) et sont fermées du côté distal. Chacune comporte deux œillets de Murphy placés l'un en face de l'autre. En raison de leur longueur réduite, elles sont particulièrement adaptées aux femmes (6803xx).

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Couleur	Unités
680208	8	40	Bleu	100
680210	10	40	Noir	100
680212	12	40	Blanc	100
680214	14	40	Vert	100
680216	16	40	Orange	100
680218	18	40	Rouge	100
680310	10	18	Noir	100
680312	12	18	Blanc	100
680314	14	18	Vert	100
680316	16	18	Orange	100



- Embout lisse pour une insertion facile et confortable
- Les œillets décalés permettent un débit maximal
- Extrémité en entonnoir pour faciliter la manipulation
- Code couleur pour indiquer la taille en charrière (CH)
- Toutes les tailles sont emballées de manière stériles (EO)
- Fabriqué en Allemagne

Sonde intermittente

Type : Tiemann

REF : 6702xx*

Ces sondes à usage unique en PVC sont munies d'une extrémité béquillé (Tiemann) et sont fermées du côté distal. Chacune comporte deux œillets de Murphy placés l'un en face de l'autre. Les sondes à embout Tiemann sont particulièrement adaptées aux patients de sexe masculin.

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Couleur	Unités
670212	12	40	Blanc	100
670214	14	40	Vert	100
670216	16	40	Orange	100
670218	18	40	Rouge	100



*Non disponible en AT, CH, HU, IT et UK

Poches de drainage urinaire



Système en circuit clos

Dans les systèmes de drainage urinaire en circuit clos, le flux de l'urine est interrompu par une chambre compte-gouttes située entre la tubulure et la poche à urine. Par conséquent, la sonde urinaire, avec la tubulure, forme un deuxième système distinct de la poche à urine. L'utilisation d'un système de drainage urinaire en circuit clos est recommandée pour la vidange des urines sur plusieurs jours et peut réduire efficacement le risque d'infection sur sonde par rapport aux poches à urine classiques.

L'Institut Robert Koch (RKI) recommande de maintenir un système de dérivation urinaire stérile et clos en permanence pour prévenir et contrôler les infections urinaires sur sonde. Le RKI a même déclaré qu'il était possible d'éviter 70 % de toutes les infections urinaires sur sonde en appliquant certaines mesures :¹

- Réduire les sondages inutiles
- Réduire au minimum la durée d'utilisation
- Former le personnel
- Mettre en œuvre l'hygiène des mains et la technique aseptique
- Mettre en place une surveillance quotidienne
- Utiliser un système de drainage urinaire clos.

Du plus simple au plus professionnel

Medline propose une vaste gamme de poches de recueil des urines pour répondre à tous vos besoins. De la simple poche à sécrétions sans robinet d'arrêt aux systèmes de mesure de la diurèse horaire pour une mesure précise du débit urinaire.



UROSID® 2000 S



- Chambre compte-gouttes avec valve anti-retour intégrée
- Valve croisée
- Microfiltre à revêtement hydrophobe
- Ventilation de la poche imperméable aux bactéries et aux liquides
- Site de prélèvement d'échantillon d'urine sans aiguille ou avec aiguille
- Stérile (EO)
- Sans latex de caoutchouc naturel



Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Valve croisée	Site de prélèvement d'urine	Unités
690090-N	2 000	90	Horizontal	Sans aiguille	25
690092-N	2 000	90	Vertical	Sans aiguille	25
690210-N	2 000	120	Horizontal	Sans aiguille	25
690212-N	2 000	120	Vertical	Sans aiguille	25
690090	2 000	90	Horizontal	Avec aiguille	25
690092	2 000	90	Vertical	Avec aiguille	25
690210	2 000	120	Horizontal	Avec aiguille	25
690212	2 000	120	Vertical	Avec aiguille	25

Valve croisée horizontale



Valve croisée verticale



Site de prélèvement d'urines sans aiguille



Site de prélèvement d'urines avec aiguille



Poche UROSID® TUR-bag

Après une résection transurétrale de la prostate (TURP), la poche spéciale UROSID® TUR-bag est indiquée pour l'irrigation de la vessie en post-opératoire. Cette procédure indique un rinçage continu de la vessie pendant les premières 24 heures. Cependant, en raison de la grande quantité de solution de rinçage et d'urine, la poche UROSID® TUR-bag est plus grande que les autres systèmes de drainage en circuit clos. Nous proposons une poche de 4 litres et une de 5 litres.



- Chambre compte-gouttes avec valve anti-retour intégrée
- Valve croisée
- Microfiltre à revêtement hydrophobe
- Ventilation de la poche imperméable aux bactéries et aux liquides
- Site de prélèvement d'échantillon d'urine sans aiguille ou avec aiguille
- Stérile (EO)
- Sans latex de caoutchouc naturel



Référence	Nom	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Site de prélèvement d'urine	Unités
690240	Poche UROSID® TUR-bag 4000	4 000	120	Sans aiguille	20
690250	Poche UROSID® TUR-bag 5000	5 000	120	Avec aiguille	20

REF : 6440xxA Sonde de Foley en silicone UROSID®
(page 10)



REF : 6680xxA Sonde de Foley en latex UROSID®
(page 14)



Remarque :

Pour fixer la solution de rinçage et la poche UROSID® TUR-bag, il faut toujours utiliser une sonde de Foley à trois voies.

Systèmes de mesure de la diurèse horaire

La production d'urine constitue une partie essentielle de l'équilibre hydrique/élimination. En soins intensifs, il est important de surveiller les paramètres vitaux (la respiration, la circulation et l'élimination) sur une période de 24 heures, afin de prévenir une défaillance viscérale (au niveau des reins ou de la vésicule biliaire par exemple). Le système de mesure de la diurèse horaire UROSID® est équipé de chambres graduées supplémentaires pour faciliter la surveillance et le prélèvement précis des urines, même dans les cas où il y a très peu d'urine.

Notre gamme comprend deux versions différentes de systèmes de mesure de la diurèse horaire : les systèmes à bascule et les systèmes en cascade (à poche de rechange).

Pourquoi en avez-vous besoin ?

Pour gérer le contrôle des fluides de votre patient (par exemple après une intervention chirurgicale)


Quand l'utilisez-vous ?

En soins intensifs


Systèmes à bascule

Le système de mesure de la diurèse horaire UROSID® est disponible en trois versions différentes pour répondre à vos besoins spécifiques. Les systèmes de mesure de la diurèse horaire de Medline sont disponibles avec des versions à une, deux ou trois chambres. Néanmoins, tous les systèmes offrent des mesures précises, à partir d'une graduation de 5 ml.


Système de mesure de la diurèse horaire à 1 chambre

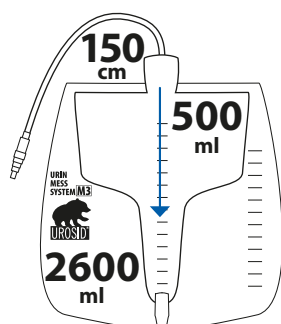

Système de mesure de la diurèse horaire à 2 chambres

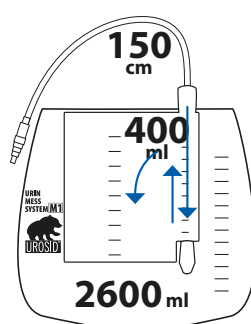

Système de mesure de la diurèse horaire à 3 chambres

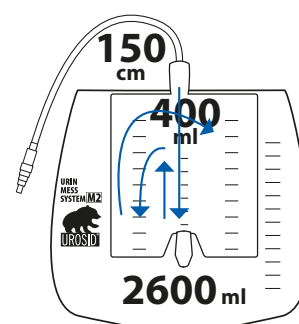

Comment ça marche ?

Après avoir mesuré l'urine recueillie dans la chambre, inclinez la chambre vers le haut pour vider son contenu dans la poche d'urine raccordée.



- Chambre compte-gouttes avec valve anti-retour intégrée
- Valve croisée
- Microfiltre à revêtement hydrophobe
- Ventilation de la poche imperméable aux bactéries et aux liquides
- Site de prélèvement d'échantillon d'urine sans aiguille ou avec aiguille
- Stérile (EO)
- Sans latex de caoutchouc naturel

Système de mesure de la diurèse horaire UROSID® M3 (Chambre simple)

REF : 6903x3-x

Référence	Volume de la poche (ml)	Volume du système de mesure de la diurèse horaire (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Unités
690313	2 600	500	150	Avec aiguille	10
690313-L	2 600	500	150	Avec aiguille ; chambre compte-gouttes	10
690313-N	2 600	500	150	Sans aiguille	10
690313-N-IP	2,600	500	150	Sans aiguille, sans cordon en coton	10
690323	2 600	500	120	Avec aiguille	10



Système de mesure de la diurèse horaire UROSID® M1 (Chambre double)

REF : 6903x1

Référence	Volume de la poche (ml)	Volume du système de mesure de la diurèse horaire (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Unités
690311	2 600	400	150	Avec aiguille	10
690321	2 600	400	120	Avec aiguille	10



Système de mesure de la diurèse horaire UROSID® M2 (Chambre triple)

REF : 6903x2

Référence	Volume de la poche (ml)	Volume du système de mesure de la diurèse horaire (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Unités
690312	2 600	400	150	Avec aiguille	10
690322	2 600	400	120	Avec aiguille	10




Systèmes en cascade (à poche de rechange)

Le système de mesure de la diurèse horaire UROSID® en cascade (à poche de rechange) est disponible en deux versions différentes pour répondre à vos besoins spécifiques. Medline propose une version du système de mesure de la diurèse horaire avec une valve de vidange, qui permet aux médecins de vider la poche de rechange une fois celle-ci pleine. Pour la version sans valve de vidange, il est nécessaire de remplacer la poche une fois qu'elle est pleine.

Comment ça marche ?

Après avoir mesuré l'urine recueillie dans la chambre, ouvrez le robinet situé sur le dessus de la chambre. Cela permettra à l'urine de s'écouler dans la poche de collecte placée en dessous.

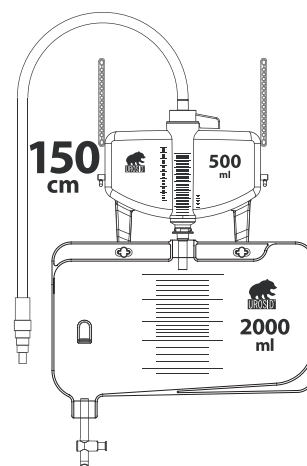

Système de mesure de la diurèse horaire UROSID® M5

REF : 69050x-N

Référence	Volume de la poche (ml)	Volume du système de mesure de la diurèse horaire (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Unités
690500-N	2 000	500	150	Avec valve croisée	10
690500-N-IP	2 000	500	150	Avec valve croisée, sans cordon en coton	10
690501-N	2 000	500	150	Sans valve croisée	10



Poche de rechange pour système de mesure de la diurèse horaire UROSID® M5

REF : 69050x-BAG

Référence	Volume de la poche (ml)	Fonctionnalité	Unités
690500-BAG	2 000	Avec valve croisée	50
690501-BAG	2 000	Sans valve croisée	50



Manomètre de IAP

Le manomètre de pression intra-abdominale (PIA) UROSID® joue un rôle crucial dans la prévention du syndrome du compartiment abdominal (SCA). Il s'agit d'un dispositif facile à utiliser, conçu pour faciliter la surveillance de la pression intra-abdominale (PIA) et qui assure une connexion sécurisée entre la sonde de Foley et le système de mesure de la diurèse horaire UROSID® de votre choix.

L'hypertension intra-abdominale (HIA) se caractérise par une pression intra-abdominale (PIA) soutenue supérieure à 12 mmHg. Le SCA survient lorsque la pression à l'intérieur de la cavité abdominale dépasse 20 mmHg. Cet état est lié à une défaillance multiviscérale et constitue un risque sérieux pour les patients dans les unités de soins intensifs.²

Pour réduire le risque de SCA, il est essentiel de mesurer la pression intra-abdominale lorsque le risque d'HIA est identifié.² Le manomètre UROSID® IAP est conçu pour fournir des mesures indirectes et peu invasives de la pression intra-abdominale, à l'aide d'une sonde de Foley.

Référence	Échelle (mmHg)	Unités
690000-IAP	0 – 40	20



Poches à urine

Les poches à urine facilitent le recueil de l'urine drainée par les sondes urinaires chez les patients souffrant de rétention urinaire ou de miction involontaire, ainsi que chez les personnes alitées, paralysées ou porteuses de handicap. Le valve anti-retour réduit le nombre d'infections qui atteignent la vessie via la sonde de Foley. Et contrairement à un système de vidange urinaire en circuit fermé, les poches à urine ne contiennent pas de chambre compte-gouttes.

UROSID® 20

Les poches UROSID® 20 sont une gamme de poche à urine stérile.



Caractéristiques de la gamme de poche à urine :

- Valve anti-retour
- Valve croisée
- Microfiltre à revêtement hydrophobe
- Site de prélèvement d'échantillon d'urine sur le connecteur étagé universel
- Pince pour flexible et drap de lit
- Disponible avec ou sans support
- Sans latex de caoutchouc naturel
- Stérile (EO)



Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Unités
690190	2 000	90	Sans support	50
690120	2 000	120	Sans support	50
690120-H	2 000	120	Avec support	50

Poche à urine



Caractéristiques de la poche à urine :

- Valve anti-retour
- Valve croisée
- Connecteur étagé universel
- Sans latex de caoutchouc naturel



Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Site de prélèvement d'urine	Stérilité	Unités
690220	2 000	90	Aucun	Stérile (EO)	50
690230	2 000	90	Aucun	Non stérile	200
691220-N	2 000	120	Sans aiguille	Stérile (EO)	50

Poche de sécrétion

Cette poche permet de recueillir les fluides corporels, tels que l'urine, évacués par les sondes vésicales. Elle doit être changée une fois pleine, car il n'est pas possible de la vider. En outre, la poche à sécrétions peut être fixée à la poche de jambe UROSID® pendant la nuit.



Caractéristiques de la poche à sécrétion :

- Valve anti-retour
- Raccord étagé universel
- Sans latex de caoutchouc naturel



Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Stérilité	Unités
690415	1 500	90	Avec valve anti-retour	Non stérile	200
690420	2 000	90	Avec valve anti-retour	Non stérile	200
690515	1 500	90	Sans valve anti-retour	Non stérile	200
690520	2 000	90	Sans valve anti-retour	Non stérile	200
690615	1 500	90	Avec valve anti-retour	Stérile (EO)	100
690620	2 000	90	Avec valve anti-retour	Stérile (EO)	100

Accessoires

Support pour poche à urine (non stérile)



REF : 690010
En plastique



REF : 690020
En métal enduit plastifié



REF : 690030
En plastique

Référence	Unités
6900x0	10

Pince pour drap de lit (non stérile)

Permet de fixer le tube de la poche à urine au drap de lit.

Référence	Unités
681050	50



Urinal et support

L'urinal est idéal pour recueillir l'urine des patients de sexe masculin alités. L'urinal est gradué et a une capacité de 1 000 ml. Chacun est compatible avec le support pour urinal dédié.

Référence	Unités
69005xA	25



REF : 690050A



REF : 690055A

UROSID® 24h

L'accord parfait entre un système de drainage urinaire clos et une poche de jambe

L'UROSID® 24h est un système de drainage urinaire clos destiné à recueillir l'urine évacuée par les sondes urinaires chez les patients souffrant de rétention urinaire ou de mictions involontaires. UROSID® 24h est une poche de lit/jambe qui permet aux patients mobiles porteurs de sondes urinaires de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ce produit peut être fixé au lit du patient et peut également être porté sous les vêtements lorsqu'il est fixé à la cuisse ou au mollet.



- Chambre compte-gouttes
- Avec valve anti-retour
- Microfiltre à revêtement hydrophobe
- Raccord étagé universel avec site de prélèvement d'urine
- Valve croisée
- Fixation à la jambe ou au lit (par une sangle ou un support)
- Surface intérieure tissée (revêtement en polaire)
- Stérile (EO)
- Sans latex de caoutchouc naturel
- Sans PHT ni DEHP



Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Unités
693730	1 000	30	20
693760	1 000	60	20
693790	1 000	90	20

Sangle pour UROSID® 24h



Référence	Longueur (cm)	Unités
693702	58	10

Poche à sécrétion

REF : 6904xx, 6905xx ou 6906xx (page 24)



Remarque :
Vous pouvez attacher une poche à sécrétion à une poche UROSID® 24h la nuit.




Poches de jambe


Poches de jambe UROSID®

Les poches de jambe d'une capacité allant jusqu'à 1 000 ml permettent aux patients mobiles porteurs de sondes urinaires de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Elles se fixent à la cuisse ou au mollet et se portent sous les vêtements. Une poche de jambe à triple chambre possède trois chambres séparées, ce qui lui permet de s'adapter parfaitement à la jambe.

Poche de jambe à chambre simple

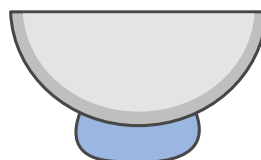

Poche de jambe à chambre triple

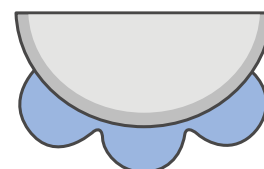

Poche de jambe à une chambre UROSID®

La poche de jambe à une chambre est une solution destinée à recueillir l'urine évacuée par les sondes vésicales et comporte un connecteur étagé, une valve anti-retour et une valve croisée.

Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Stérilité	Unités
690710	750	10	Non stérile	10



La poche de jambe à une chambre est idéale pour recueillir l'urine évacuée par les sondes vésicales. Elle est équipée d'un connecteur étagé, d'une valve anti-retour et d'une valve croisée. La surface intérieure tissée améliore le confort de l'utilisateur, tandis que le connecteur étagé supplémentaire permet de raccourcir la tubulure pour l'adapter aux besoins spécifiques du patient.

Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Stérilité	Unités
691770	750	50	Stérile (EO)	10



Poches de jambe UROSID®

Poche à jambe à trois chambres UROSID®

La poche de jambe à trois chambres est une solution destinée à recueillir l'urine évacuée par les sondes vésicales. Chacune est équipée d'un connecteur étagé, d'une valve anti-retour et d'une valve croisée ou d'une valve à clapet. En outre, la surface intérieure tissée offre un confort accru à l'utilisateur, un connecteur étagé supplémentaire permet de raccourcir la tubulure en fonction de l'individu. Une pièce de fixation pour une utilisation comme poche de nuit est également incluse.



Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Stérilité	Unités
690735	500	50	Valve croisée	Stérile (EO)	10
690740	500	65	Valve croisée	Stérile (EO)	10
690745	750	65	Valve croisée	Stérile (EO)	10
690760	500	50	Valve à clapet	Stérile (EO)	10
691755	750	50	Valve croisée	Stérile (EO)	10
691760	750	50	Valve à clapet	Stérile (EO)	10
692735	500	50	Valve croisée	Non stérile	10
692755	750	50	Valve croisée	Non stérile	10

Valve croisée



Valve à clapet



Sangle pour poches de jambe UROSID®

Cette sangle est idéale pour attacher les poches UROSID® à la jambe. Elle est agréable à porter, et les modèles confort et standard sont dotés d'une bande de silicone à l'intérieur pour une meilleure adhérence. La fermeture est munie d'un Velcro.



Référence	Nom	Taille	Longueur x largeur (cm)	Fonctionnalité	Unités
856001	Confort	S (petit)	40 x 5	Emballage individuel	10
856002	Confort	M (moyen)	50 x 5	Emballage individuel	10
856003	Confort	L (grand)	60 x 5	Emballage individuel	10
856006	Universel	Universel	63 x 2,5	Emballage par paires	10
856008	Standard	Universel	53 x 2,5	Emballage par paires	10

Produits pédiatriques

Produits pédiatriques pour nos plus petits patients

Les produits urologiques destinés aux enfants sont aussi importants à proposer que ceux destinés aux adultes. Les plus jeunes patients ont des besoins spécifiques auxquels nous pouvons répondre grâce à notre gamme de produits pédiatriques. La prévention des infections urinaires sur sonde est tout aussi importante chez les enfants que chez les adultes. Par conséquent, nos sets de sondages urinaire peuvent également être utilisés chez les enfants. Tous les produits pédiatriques sont stériles (EO).



- Réduire les sondages inutiles
- Réduire au minimum la durée de pose de la sonde
- Former le personnel
- Mettre en œuvre l'hygiène des mains et la technique aseptique
- Mettre en place une surveillance quotidienne
- Utiliser un système de drainage urinaire clos.




Trouver l'ours Molly dans notre gamme d'urologie pédiatrique !

Sondes à demeure

Les sondes à demeure de taille pédiatrique sont toujours munies d'un stylet (mandrin) pré-inséré pour une insertion facile et sûre de la sonde.

Sonde de Foley UROSID®

Disponible en silicone ou en latex siliconé

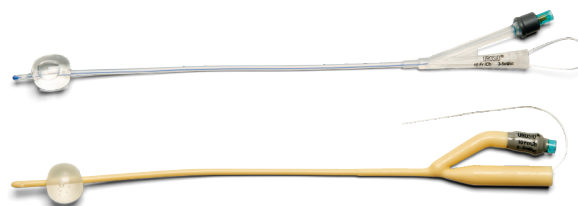

Référence	Matière	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
641006A	Silicone	6	31	1,5	Vert clair	10
641008A	Silicone	8	31	3 - 5	Bleu	10
641010A	Silicone	10	31	3 - 5	Noir	10
661006A	Latex siliconé	6	27	3	Vert clair	10
661008A	Latex siliconé	8	27	3 - 5	Bleu	10
661010A	Latex siliconé	10	27	3 - 5	Noir	10

UROSID® Sensor 400

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
646008A	8	31	5	Bleu	5
646010A	10	31	5	Noir	5



UROSID® Supra



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Volume du ballonnet (ml)	Couleur	Unités
645006A	6	40	1,5	Vert clair	10
645008A	8	40	3	Bleu	10
645010A	10	40	3 - 5	Noir	10

Système de drainage d'urine en circuit clos

UROSID® 1000

Il s'agit d'une variante de l'UROSID® 2000 S destinée aux patients pédiatriques.



- Chambre compte-gouttes avec valve anti-retour intégrée
- Valve croisée
- Microfiltre à revêtement hydrophobe
- Ventilation de la poche imperméable aux bactéries et aux liquides
- Site de prélèvement d'échantillon d'urine sans aiguille ou avec aiguille
- Stérile (EO)
- Sans latex de caoutchouc naturel



Référence	Volume (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Valve croisée	Unités
690270-N	1 000	90	Vertical	20

Systèmes de mesure de la diurèse horaire

Système de mesure de la diurèse horaire à chambre simple UROSID® M200

REF : 690343-x

Il s'agit de la version pédiatrique de la poche UROSID® M3. Elle est dotée d'une poche et d'un système de mesure de la diurèse horaire plus petits, plus adapté pour les jeunes patients.



Référence	Volume du sac (ml)	Volume du système de mesure de la diurèse horaire (ml)	Longueur de la tubulure (cm)	Fonctionnalité	Unités
690343	2 000	200	120	Avec aiguille	10
690343-N	2 000	200	120	Sans aiguille	10

Seringues d'irrigation

Seringues d'irrigation à piston

Il s'agit d'une seringue d'irrigation stérile (EO), graduée et jetable avec un embout de sonde droit et un adaptateur Luer-Lock. Elle peut être utilisée avec des sondes vésicales et des sondes gastriques (par exemple pour l'irrigation de la vessie).

Référence	Volume (ml)	Unités
620060	50 – 60	50
620100	100	25



Seringues d'irrigation à poire

Idéale pour une utilisation en milieu clinique et chirurgical, cette seringue d'irrigation jetable à poire est dotée d'une préhension facile pour une excellente utilisation d'une seule main. Conçue pour tenir sur son extrémité, elle permet d'éviter les fuites et de maintenir un environnement propre.

Référence	Volume (ml)	Stérilité	Unités
DYNDE20127	60	Non stérile	50
DYNDE20125	60	Stérile (EO)	25



Produits gastro-entérologiques

Sondes Rectales*

Il s'agit de sondes intestinales droites avec deux œillets pour l'administration de lavements et l'évacuation des gaz intestinaux.

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Couleur	Unités
680418	18	40	Rouge	100
680422	22	40	Violet	100
680425	25	40	Bleu	100
680428	28	40	Vert	100
680430	30	40	Gris	100



Kit de lavement

Le kit de lavement de Medline contient tout ce qui est nécessaire pour un lavement.



Chaque kit comprend :

- 1 poche avec tubulure, pince et embout pré-lubrifié, 1,5 l
- 1 paquet de savon liquide, 9 ml
- 1 alèse, résistante aux liquides, 42 x 45 cm



Référence	Volume (ml)	Longueur du tube (cm)	Stérilité	Unités
DYNDE70100A	1 500	137	Non stérile	48

*Non disponible en AT, CH, HU, IT et UK

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Medline ou visiter notre site web www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
Immeuble Australia
19 rue Stephenson
78180 Montigny-le Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34

www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Sources :

1. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/CAUTI_2015.pdf?__blob=publicationFile
2. Newman, R.K. (2023) Abdominal compartment Syndrome. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430932/>.

Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2026 Medline. ML1338_FR 09/2026