

Soluções Urológicas

Os seus pacientes são o centro das suas preocupações. Estamos aqui para o apoiar.



O seu caminho
rumo a **soluções**
de urologia
abrangentes



Produtos da mais alta qualidade

Oferecemos uma gama abrangente de produtos clinicamente comprovados, incluindo:

- Bandejas de cateteres vesicais criadas por enfermeiros e que alinham o comportamento clínico com práticas baseadas em evidências
- Vários cateteres intermitentes e de Foley para satisfazer as necessidades dos seus pacientes
- Soluções de drenagem urológica para uso durante o internamento hospitalar ou para condições crónicas


Prevenção de ITU-CV

Para ajudar a manter a saúde dos pacientes, estamos dedicados a prevenir infeções do trato urinário associadas a cateteres vesicais (ITU-CV) tanto quanto possível. O Instituto Robert Koch (RKI) recomenda diferentes ferramentas para prevenir ITU-CV. A saber:

- Protocolos de cateterismo rigorosos para ajudar a reduzir o uso desnecessário
- Estandarização de produtos
- Manutenção da esterilidade do cateter
- Remoção atempada do cateter.¹

Índice

Prevenção de ITU-CV	3
Cateteres vesicais	7
Sistemas de drenagem de urina	16
Sacos para a perna	26
Pediatria	28
Seringas de irrigação	30
Produtos gastroenterológicos	31

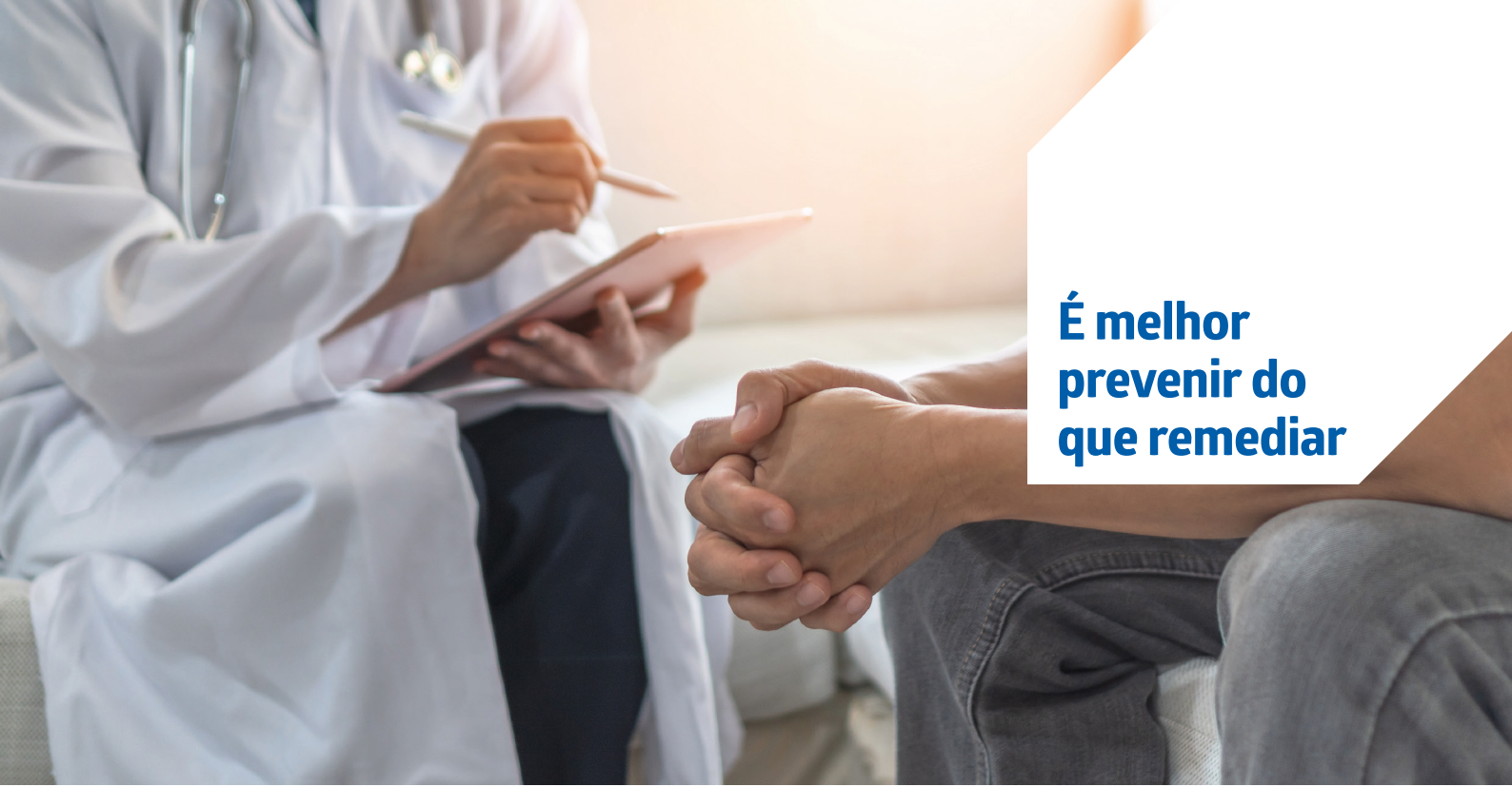

**É melhor
prevenir do
que remediar**

Soluções para ajudar a prevenir ITU-CV

As ITU-CV são uma das infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) mais comuns. Os protocolos ITU-CV existem, de facto, mas com tantas prioridades concorrentes, a conformidade com as melhores práticas é, frequentemente, inconsistente. Essas infeções são provavelmente causadas por bactérias que entram na bexiga durante a inserção do cateter ou devido a uma interrupção no sistema de drenagem fechado.

A taxa de incidência diária de pacientes que desenvolvem uma ITU-CV situa-se entre os 3 e os 10%. Após um tempo de permanência de 30 dias, a maioria dos pacientes terá bacteriúria ou bactérias na urina. Em geral, 80% das infeções nosocomiais do trato urinário estão associadas ao cateter.¹

O uso de kits de troca de cateteres estéreis (EO), em conjugação com as melhores práticas consistentes, pode reduzir a taxa de infeção entre os pacientes ao colocar ou trocar cateteres vesicais. Com estes kits, a Medline pretende fazer parte de uma solução de redução de ITU-CV personalizada para as necessidades específicas das suas instalações.

Kits de Troca de Cateter

Componentes S-010000:

- 1 bandeja de recolha de urina, plástico
- 6 cotonetes de gaze, tamanho de uma ameixa
- 2 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinça
- 1 campo com abertura em fenda, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 campo de cobertura, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, látex, M, sem pó em papel
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável



Componentes S-020000-N:

- 1 bandeja de recolha de urina, plástico
- 6 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa
- 2 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 2 pinças
- 1 campo com abertura em fenda, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, nitrilo, tamanho L, sem pó em papel
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável



Componentes S-030000:

- 1 tabuleiro reniforme plástico
- 1 tigela para compressas, plástico
- 5 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa
- 2 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinça
- 1 campo com abertura em fenda, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, látex, tamanho M, sem pó em papel
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável

**Componentes S-030000-N:**

- 1 tabuleiro reniforme plástico
- 1 tigela para compressas, plástico
- 5 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa
- 2 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinça
- 1 campo com abertura em fenda, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, nitrilo, tamanho L, sem pó em papel
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável

**Componentes S-040000:**

- 1 bandeja de recolha de urina, plástico
- 4 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa
- 2 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 2 pinças
- 1 campo com abertura em fenda, 50 x 50 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, látex, tamanho M, sem pó em papel
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável

**Componentes S-050000:**

- 1 tabuleiro reniforme plástico
- 1 tigela para compressas, plástico
- 6 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa
- 1 compressa de gaze, 10 x 10 cm
- 2 pinças
- 1 campo com abertura em fenda, 50 x 50 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, látex, tamanho M, sem pó em papel
- 1 campo de trabalho, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável

**Componentes S-060000:**

- 1 bandeja de recolha de urina, plástico
- 5 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa,
- 5 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinça
- 1 campo com abertura em fenda, 50 x 50 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, látex, L, sem pó em papel
- 1 luva de exame, látex, M, sem pó, punho dobrado
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável



Componentes S-060000-N:

- 1 bandeja de recolha de urina, plástico
- 5 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa
- 5 compressas de gaze 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinça
- 1 campo com abertura em fenda, 50 x 50 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, nitrilo, L, sem pó em papel
- 1 luva de exame, nitrilo, M, sem pó, punho dobrado
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável

**Componentes S-070000:**

- 1 tabuleiro reniforme plástico
- 1 tigela para compressas, plástico
- 4 compressas de gaze, tamanho de uma ameixa
- 4 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinça
- 1 campo com abertura em fenda, 50 x 50 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, látex, tamanho M, sem pó em papel
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável

**Componentes S-080000:**

- 1 bandeja de recolha de urina, plástico
- 6 compressas de gaze, tamanho de um ovo
- 2 compressas de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 2 pinças
- 1 campo com abertura em fenda, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, látex, tamanho M, sem pó em papel
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 Glyco-SID®, 10 ml

**Componentes S-090000:**

- 1 bandeja de recolha de urina, plástico
- 6 compressas de gaze, tamanho ameixa
- 1 pinça
- 1 campo com abertura em fenda, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 par de luvas de exame, vinil, tamanho grande, com pó livre, punho dobrado
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 Glyco-SID®, 10 ml

**Componentes do UROKIT001:**

- 1 bandeja, plástico
- 1 campo cirúrgico fenestrado, 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 5 compressas de gaze 7,5 x 7,5 cm
- 1 par de pinças Kocher
- 1 campo, 60 x 60 cm, impermeável
- 1 seringa pré-cheia com água 20 ml
- 1 gel lubrificante 5 g



CareSets da Medline

Componentes KER70700:

- 1 campo cirúrgico, 75 x 90 cm
- 1 campo cirúrgico fenestrado 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 1 seringa, 20 ml
- 1 ampola com água destilada, 20 ml
- 1 gel lubrificante, 5 g
- 1 pinça Kocher de plástico
- 5 compressas em não-tecido, 7,5 x 7,5 cm
- 1 embalagem blíster média e rígida



Componentes KER70022B-02:

- 1 campo cirúrgico, 75 x 90 cm
- 1 campo cirúrgico fenestrado 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 2 seringas pré-cheias com água destilada, 10 ml
- 1 seringa pré-cheia de gel lubrificante, 5 g
- 1 pinça Kocher de plástico
- 5 compressas em não-tecido, 7,5 x 7,5 cm
- 1 embalagem blíster rígida média



Os nossos CareSets atuais satisfazem os seus requisitos específicos?

Contacte-nos para obter um Conjunto personalizado, incluindo os componentes necessários para o procedimento de cateterização dos seus pacientes.

Os seus
pacientes são o
centro das suas
preocupações.
Estamos aqui
para o apoiar.

UROSID®


**Qualidade
Fiabilidade
Segurança**

Sistema de drenagem urinária fechado pré-conectado

O cateter urinário pré-conectado e o sistema de drenagem urinária fechado garantem uma técnica sem contacto, reduzem as etapas de manipulação e ajudam a uniformizar o procedimento. O cateter já vem acoplado à bolsa de drenagem urinária UROSID® 2000 S, o que ajuda a minimizar a contaminação.

O tempo de permanência do Sistema Pré-conectado é de até 14 dias, ao passo que o Cateter Foley de Silicone pode permanecer colocado até 30 dias.

Vantagens e funcionalidades

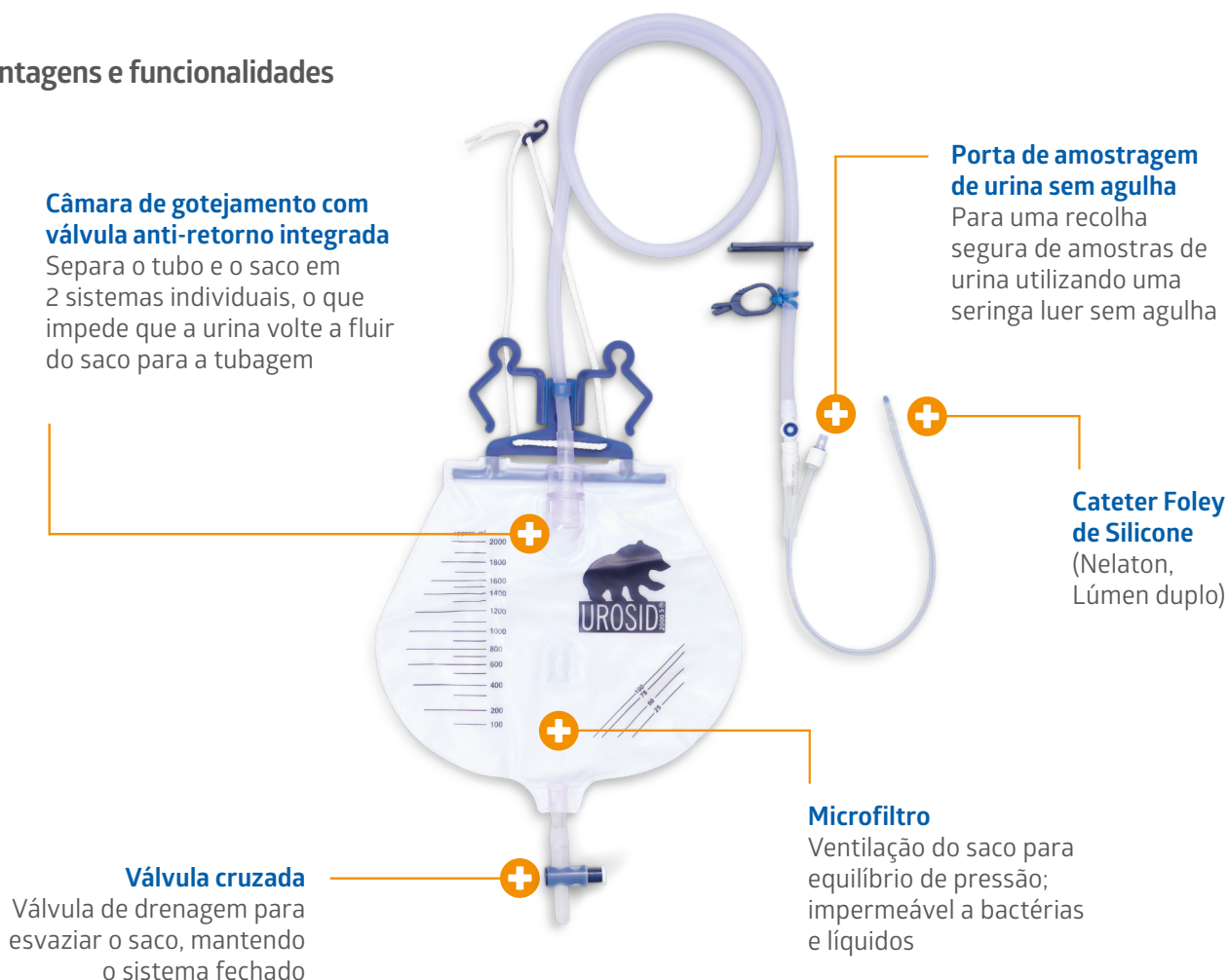

REF 690212-N-SFxx

Referências	Cateter Foley de Silicone				Sistema Fechado de Drenagem de Urina			
	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Volume do saco (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Válvula cruzada	Unidades (unid.)
690212-N-SF12	12	40	10	Branco	2000	120	Vertical	20
690212-N-SF14	14	40	10	Verde	2000	120	Vertical	20
690212-N-SF16	16	40	10	Laranja	2000	120	Vertical	20
690212-N-SF18	18	40	10	Vermelho	2000	120	Vertical	20
690212-N-SF20	20	40	10	Amarelo	2000	120	Vertical	20
690212-N-SF22	22	40	10	Roxa	2000	120	Vertical	20

Cateteres vesicais

Soluções para ajudar a prevenir ITU-CV

O cateterismo urinário facilita a drenagem da bexiga e a recolha de urina através de cateteres intermitentes ou permanentes.

Silicone ou látex? A escolha é sua.

- Os cateteres Foley estão disponíveis em 100% silicone ou em látex de borracha natural. Que tipo é o mais apropriado depende de vários fatores, incluindo se o seu paciente é ou não alérgico a materiais específicos, bem como a duração do tempo de permanência previsto. Os prós e contras dos diferentes materiais têm de ser tidos em consideração.

100% silicone

- Tempo de permanência de até 30 dias
- Elevada biocompatibilidade – menos alergias conhecidas
- Menos incrustações durante a permanência
- Radiopaco para fácil visualização durante os exames
- Material macio para o máximo conforto

Látex de borracha natural (siliconizado)

- Tempo de permanência de até 14 dias
- Muitos pacientes sofrem de alergias ao látex
- Incrustação mais rápida em comparação com cateteres 100% silicone
- Custo unitário mais baixo do que os cateteres de silicone
- Não é radiopaco
- Material macio para o máximo conforto



Cateteres Foley de Silicone UROSID®

O Cateter Foley de Silicone UROSID® é um cateter urinário transuretral de lúmen duplo ou triplo feito de 100% silicone de grau médico. Cada um vem com uma ponta Nelaton reta e atraumática ou uma ponta Tiemann ligeiramente curva e atraumática e possui uma tira de contraste de raios X de sulfato de bário contínua para radiopacidade. Os Cateteres Foley com ponta de Nelaton podem ser usados em cateterismo feminino e masculino, ao passo que os cateteres com uma ponta de Tiemann são usados principalmente para cateterizar pacientes do sexo masculino com uretra estreitada, cicatrizada ou difícil de passar.

Esses cateteres são adequados tanto para o esvaziamento passivo, como para o enchimento/drenagem retrógrada da bexiga. Cada um é codificado por cores e pode ser usado em conjunto com extensões, bem como todos os sacos de urina da Medline. Além disso, a válvula do canal de enchimento tem um acessório de seringa luer. Os balões do cateter têm diferentes volumes de enchimento entre 5 e 30 ml.

Cateter Foley UROSID® Silicone Básico

Tipo: Nelaton, lúmen duplo

REF 6421xxA



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
642112A	12	40	5 – 15	Branco	10
642114A	14	40	5 – 15	Verde	10
642116A	16	40	5 – 15	Laranja	10
642118A	18	40	5 – 15	Vermelho	10
642120A	20	40	5 – 15	Amarelo	10
642122A	22	40	5 – 15	Roxo	10
642124A	24	40	5 – 15	Azul	10

REF 6430xxA



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
643016A	16	40	30	Laranja	10
643018A	18	40	30	Vermelho	10
643020A	20	40	30	Amarelo	10
643022A	22	40	30	Roxo	10
643024A	24	40	30	Azul	10

REF 6520xx

O Cateter Foley de silicone UROSID® vem com um balão integrado, oferecendo mais conforto aos seus pacientes.



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
652012	12	40	5-10	Branco	10
652014	14	40	5-10	Verde	10
652016	16	40	5-10	Laranja	10
652018	18	40	5-10	Vermelho	10
652020	20	40	5-10	Amarelo	10
652022	22	40	5-10	Roxo	10
652024	24	40	5-10	Azul	10

REF 6420xxA-P

Este produto inclui uma seringa Glyco-SID® pré-cheia com uma solução de 10 ml de água-glicerina (10%) como meio bloqueador para encher o balão.

Graduação da seringa: 0,2 ml



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
642012A-P	12	40	10	Branco	5
642014A-P	14	40	10	Verde	5
642016A-P	16	40	10	Laranja	5
642018A-P	18	40	10	Vermelho	5
642020A-P	20	40	10	Amarelo	5
642022A-P	22	40	10	Roxo	5
642024A-P	24	40	10	Azul	5

Cateter Foley UROSID® Silicone Básico

Tipo: Nelaton, lúmen triplo

REF 6440xxA

O cateter Foley de três vias tem um canal de irrigação/injeção adicional para administrar soluções de fármacos ou irrigar a bexiga.



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
644016A	16	40	30	Laranja	10
644018A	18	40	30	Vermelho	10
644020A	20	40	30	Amarelo	10
644022A	22	40	30	Roxo	10
644024A	24	40	30	Azul	10

Cateter Foley UROSID® Silicone Básico

Tipo: Tiemann, duplo lúmen

REF 6530xxA

O Cateter Foley de Silicone UROSID® foi criado especialmente para pacientes do sexo masculino.



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
653012A	12	40	10	Branco	10
653014A	14	40	10	Verde	10
653016A	16	40	10	Laranja	10
653018A	18	40	10	Vermelho	10
653020A	20	40	10	Amarelo	10

UROSID® Ponta Dufour

O Cateter Foley de Silicone UROSID® tem lúmen triplo e é feito de 100% silicone. Foi concebido com uma ponta Dufour, especialmente indicada para pacientes masculinos que necessitem de irrigação contínua da bexiga ou de tratamento da hematúria.


Disponível como cateter Foley de três vias com ponta Dufour, tem ainda um canal de irrigação/injeção adicional para administrar soluções de fármacos ou irrigar a bexiga.

Ponta Dufour

- A ponta curva permite uma introdução fácil sem estilete

Prática

- Linha visível aos raios X ao longo do eixo e ponta visível aos raios X
- Tempo de permanência de até 30 dias

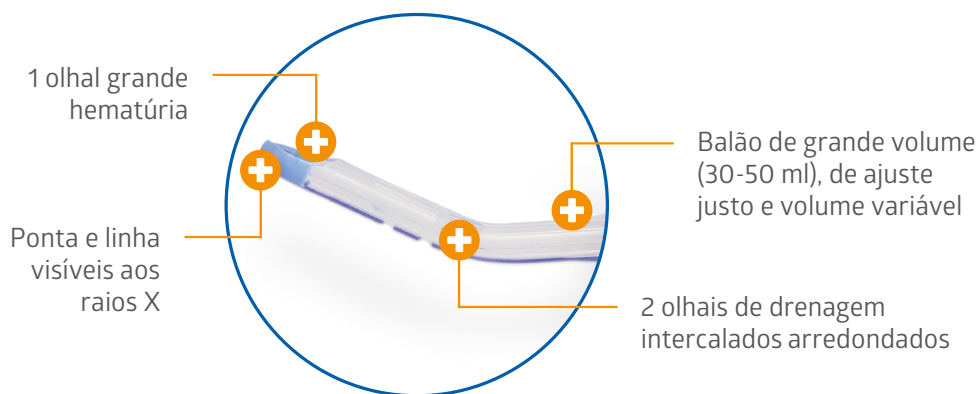

REF 6580xx

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
658016	16	40	30	Laranja	10
658018	18	40	30	Vermelho	10
658020	20	40	30 – 50	Amarelo	10
658022	22	40	30 – 50	Roxo	10
658024	24	40	50	Azul	10

UROSID® Sensor 400

O UROSID® Sensor 400 é um cateter Foley de silicone transuretral com um sensor de temperatura integrado.

Medições precisas


- E contínuas entre 25 e 45° C com uma precisão de $\pm 0,1^\circ \text{C}$

Conveniente

- Poupa tempo de enfermagem na monitorização da temperatura nos casos em que um cateterismo Foley já é indicado

Compatibilidade

- Aplicável para uso na maioria das unidades de hipotermia e com monitores de pacientes da GE®, HP®, Philips™, Siemens® entre outros
- Fornecemos os cabos adaptadores apropriados
- O UROSID® Sensor 400 é compatível com ressonância magnética

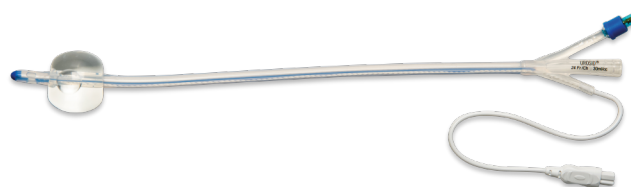

REF 6460xxA

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
646008A	8	31	5	Azul	5
646010A	10	31	5	Preto	5
646012A	12	40	10	Branco	5
646014A	14	40	10	Verde	5
646016A	16	40	10	Laranja	5
646018A	18	40	10	Vermelho	5
646020A	20	40	30	Amarelo	5
646022A	22	40	30	Roxo	5
646024A	24	40	30	Azul	5

Cabos adaptadores

Os cabos adaptadores são usados para ligar o UROSID® Sensor 400 aos monitores do paciente. O cabo adaptador apropriado é escolhido com base no tipo de monitor do paciente em uso.

Referência	Nome	Comprimento (cm)	Unidades (unid.)
646060A	Ficha telefone, a direito, 6,35 mm	500	1
646070A	Conetor redondo, reto, HP/Philips	500	1
646080A	Conector redondo, a direito, Siemens	500	1



Todos os Cateteres Foley de Silicone Básicos UROSID®:

- Sem látex de borracha natural
- Não contêm DEHP nem PHT
- Estéreis (OE).

Cateteres Foley de Látex UROSID®

O Cateter Foley de Látex UROSID® é um cateter urinário transuretral de lúmen duplo ou triplo feito de látex de borracha natural siliconizado. Cada um vem com uma ponta Nelaton reta e atraumática ou uma ponta Tiemann ligeiramente curva e atraumática. Os Cateteres Foley com ponta de Nelaton podem ser usados em cateterismo feminino e masculino, ao passo que os cateteres com uma ponta de Tiemann são usados principalmente para cateterizar pacientes do sexo masculino com uretra estreitada, cicatrizada ou difícil de passar.

Esses cateteres são adequados tanto para o esvaziamento passivo, como para o enchimento/drenagem retrógrada da bexiga. Cada um é codificado por cores e pode ser usado com extensões disponíveis comercialmente, bem como todos os sacos de urina da Medline. Além disso, a válvula do canal de enchimento tem um acessório de seringa luer. Os balões do cateter têm diferentes volumes de enchimento entre 5 e 30 ml.

Cateteres Foley de Látex UROSID®

Tipo: Nelaton, lúmen duplo

REF 6620xxA



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Válvula	Cor	Unidades (unid.)
662012A	12	40	5 – 10	PVC	Branco	10
662014A	14	40	5 – 10	PVC	Verde	10
662016A	16	40	5 – 10	PVC	Laranja	10
662018A	18	40	5 – 10	PVC	Vermelho	10
662020A	20	40	5 – 10	PVC	Amarelo	10
662022A	22	40	5 – 10	PVC	Roxo	10
662024A	24	40	5 – 10	PVC	Azul	10
662026A	26	40	5 – 10	PVC	Preto	10



REF 6622xxA

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Válvula	Cor	Unidades (unid.)
662212A	12	40	5 – 10	Borracha	Branco	10
662214A	14	40	5 – 10	Borracha	Verde	10
662216A	16	40	5 – 10	Borracha	Laranja	10
662218A	18	40	5 – 10	Borracha	Vermelho	10
662220A	20	40	5 – 10	Borracha	Amarelo	10
662222A	22	40	5 – 10	Borracha	Roxo	10
662224A	24	40	5 – 10	Borracha	Azul	10
662226A	26	40	5 – 10	Borracha	Preto	10



A válvula de borracha é compatível com ressonância magnética.

Cateteres Foley de Látex UROSID®

Tipo: Nelaton, lúmen duplo

REF 6630xxA



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
663012A	12	40	30	Branco	10
663014A	14	40	30	Verde	10
663016A	16	40	30	Laranja	10
663018A	18	40	30	Vermelho	10
663020A	20	40	30	Amarelo	10
663022A	22	40	30	Roxo	10
663024A	24	40	30	Azul	10
663026A	26	40	30	Preto	10

Cateteres Foley de Látex UROSID®

Tipo: Tiemann, duplo lúmen

REF 6650xxA

O Cateter Foley de Látex UROSID® com ponta Tiemann foi criado especialmente para pacientes do sexo masculino.



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
665012A	12	40	5 – 10	Branco	10
665014A	14	40	5 – 10	Verde	10
665016A	16	40	5 – 10	Laranja	10
665018A	18	40	5 – 10	Vermelho	10
665020A	20	40	5 – 10	Amarelo	10

REF 6660xxA

O Cateter Foley de Látex UROSID® com ponta Tiemann foi criado especialmente para pacientes do sexo masculino.



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
666012A	12	40	30	Branco	10
666014A	14	40	30	Verde	10
666016A	16	40	30	Laranja	10
666018A	18	40	30	Vermelho	10
666020A	20	40	30	Amarelo	10



Todos os Cateteres Foley de Látex UROSID® são:

- Estéreis (OE).

Cateteres Foley de Látex UROSID®

Tipo: Nelaton, lúmen triplo

REF 6680xxA

O cateter Foley de três vias tem um canal de irrigação/injeção adicional para administrar soluções de fármacos ou irrigar a bexiga.



Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
668016A	16	40	30	Laranja	10
668018A	18	40	30	Vermelho	10
668020A	20	40	30	Amarelo	10
668022A	22	40	30	Roxo	10
668024A	24	40	30	Azul	10
668026A	26	40	30	Preto	10

UROSID® Supra

Alguns pacientes não podem ser cateterizados através da uretra devido a complicações como a estenose uretral. Nesses casos, é necessária uma drenagem percutânea da bexiga.

O Cateter UROSID® Supra Silicone fornece uma solução adequada para o esvaziamento extra-anatômico da bexiga e pode ser usado com extensões comercialmente disponíveis e todos os sacos de urina da Medline. Cada um deles é um cateter de bexiga suprapúbico de duplo lúmen feito de silicone de grau médico, com uma ponta aberta e uma linha radiopaca contínua de raios X de sulfato de bário. Além disso, a válvula do canal de enchimento tem um acessório de seringa luer e é codificada por cores. Existem também tamanhos de cateter pequenos (6 – 10 CH) disponíveis com fio-guia (estilete) para facilitar a inserção.



REF 6450xxA

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
645006A	6	40	1,5	Verde claro	10
645008A	8	40	3	Azul	10
645010A	10	40	3 – 5	Preto	10
645012A	12	40	5 – 10	Branco	10
645014A	14	40	5 – 10	Verde	10
645016A	16	40	5 – 10	Laranja	10
645018A	18	40	5 – 10	Vermelho	10
645020A	20	40	5 – 10	Amarelo	10
645022A	22	40	5 – 10	Roxo	10
645024A	24	40	5 – 10	Azul	10
645026A	26	40	5 – 10	Preto	10



Todos os Cateteres UROSID® Supra:

- Sem látex de borracha natural
- Não contêm DEHP nem PHT
- Estéreis (OE).

Acessórios para Cateteres Foley UROSID®

Meio bloqueador

Aqua-SID® e Glyco-SID®

As seringas pré-cheias facilitam o enchimento dos balões dos Cateteres Foley UROSID® (silicone ou látex) durante o cateterismo.

Referência	Nome	Características	Unidades (unid.)
623001	Aqua-SID®	10 ml de água purificada	10
623002	Glyco-SID®	Mistura de 10 ml de água purificada e 10% de glicerina	10



Torneira

REF 647010-x

Uma torneira é uma válvula usada para fechar o funil de drenagem dos cateteres Foley por um curto período de tempo (por exemplo, durante uma mudança de sistema fechado ou exame do paciente).

Referência	Esterilidade	Unidades (unid.)
647010-ST	Estéril (OE)	50
647010-NS	Não estéril	100



Âncora para Cateter Foley

REF FCS200ZT

Dispositivo de fixação do cateter para fixar o cateter de Foley na perna do paciente, garantindo que não se desloque.

Referência	Esterilidade	Unidades (unid.)
FCS200ZT	Estéril (OE)	50



**Fornecemos-
lhe tudo o que
precisa para
cateterizar os
seus pacientes.**

Cateteres intermitentes

O cateterismo intermitente é considerado um método seguro e eficaz para drenar urina, oferecendo independência pessoal e implementação na vida quotidiana dos pacientes. Esses cateteres também podem ser usados para recolha única de amostras de urina diretamente da bexiga, oferecendo um resultado de espécimen puro.

A Medline oferece cateteres intermitentes com ponta Nelaton ou Tiemann, para garantir a solução apropriada para pacientes do sexo feminino e masculino.

Cateter intermitente

Tipo: Nelaton

REF 680xxx*

Estes cateteres descartáveis são feitos de PVC, têm uma ponta arredondada e são fechados distalmente. Cada um tem dois olhais de Murphy posicionados um frente ao outro. Devido ao seu comprimento mais curto, são especialmente adequados para uso em mulheres.

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Cor	Unidades (unid.)
680208	8	40	Azul	100
680210	10	40	Preto	100
680212	12	40	Branco	100
680214	14	40	Verde	100
680216	16	40	Laranja	100
680218	18	40	Vermelho	100
680310	10	18	Preto	100
680312	12	18	Branco	100
680314	14	18	Verde	100
680316	16	18	Laranja	100



- Ponta lisa para fácil inserção e conforto
- Olhais desencontrados que permitem fluxo máximo
- Extremidade em funil para facilidade de manuseio
- Código de cores para indicar o tamanho Charrière
- Todos os tamanhos são embalados estéreis (EO)
- Fabricado na Alemanha


Cateter intermitente

Tipo: Tiemann

REF 6702xx*

Estes cateteres descartáveis são fabricados em PVC, têm uma ponta curva e são fechados distalmente. Cada um tem dois olhais de Murphy posicionados um frente ao outro. Os cateteres Tiemann TIP são especialmente adequados para uso em pacientes do sexo masculino.

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Cor	Unidades (unid.)
670212	12	40	Branco	100
670214	14	40	Verde	100
670216	16	40	Laranja	100
670218	18	40	Vermelho	100

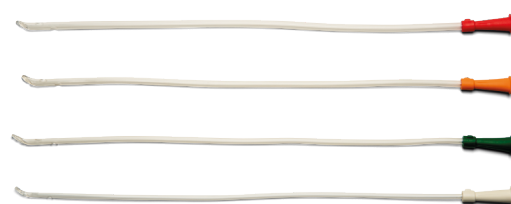

*Não disponível na Áustria, Suíça, Hungria, Itália e Reino Unido

Sistemas de drenagem de urina



Sistema fechado

Nos sistemas de drenagem de urina fechados, o fluxo de urina é interrompido através de uma câmara de gotejamento entre o tubo e o saco de urina. Consequentemente, o cateter urinário, juntamente com o tubo, forma um segundo sistema separado para além do saco de urina. O uso de um sistema fechado de drenagem de urina é recomendado para drenagem de urina de vários dias e pode reduzir efetivamente o risco de ITU-CV em comparação com os sacos de urina básicos.

O Instituto Robert Koch (RKI) recomenda a manutenção de um sistema de desvio urinário estéril e continuamente fechado para prevenir e controlar ITU-CV. O RKI chega mesmo a dizer que é possível que 70% de todas as ITU-CV possam ser evitadas aplicando certas medidas:¹

- Reduzir os cateterismos desnecessários
- Manter o tempo de permanência num mínimo
- Dar formação ao pessoal
- Implementar a higiene das mãos e técnicas assépticas
- Implementar vigilância diária
- Usar um sistema fechado de drenagem de urina.

Do básico ao profissional

A Medline oferece uma ampla gama de sacos de recolha de urina para suprir todas as suas necessidades. Desde um saco básico para secreções sem torneira a medidores de urina para uma medição precisa do fluxo urinário, temos tudo à sua disposição.



Sistema fechado de drenagem de urina


O design do Sistema de Drenagem de Urina UROSID® 2000 S pode ajudar a prevenir ou reduzir o risco de ITU-CV. É difícil manter um sistema fechado se o tempo de permanência do cateter de Foley for diferente do tempo de permanência do sistema de drenagem. Ao desligar o sistema de drenagem do cateter, o risco de ITU-CV aumenta. O sistema de drenagem de urina da Medline possui características específicas que ajudam a manter o paciente seguro durante o processo de troca.

Câmara de gotejamento com válvula anti-retorno integrada

Separa o tubo e o saco em 2 sistemas individuais, o que impede que a urina volte a fluir do saco para a tubagem

Microfiltro

Ventilação do saco para equilíbrio da pressão; impermeável a bactérias e líquidos

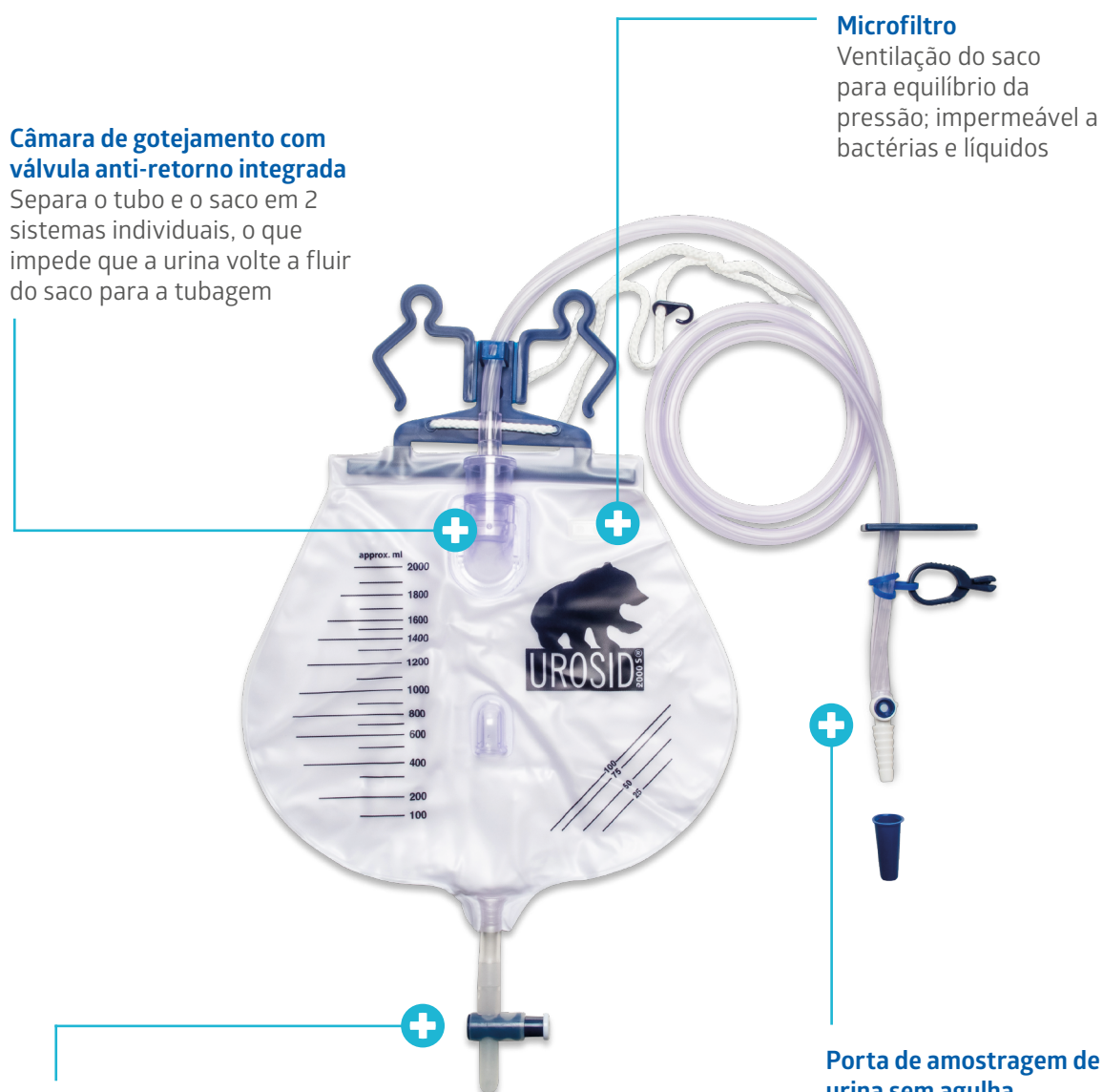

Válvula cruzada

Válvula de drenagem para esvaziar o saco, mantendo o sistema fechado

Porta de amostragem de urina sem agulha

Para uma recolha segura de amostras de urina utilizando uma seringa luer sem agulha

UROSID® 2000 S



- Câmara de gotejamento com válvula anti-retorno integrada
- Válvula cruzada
- Microfiltro com revestimento hidrofóbico
- Ventilação do saco estanque a líquidos e bactérias
- Porta de recolha de amostras de urina sem agulha ou recolha com agulha
- Estéril (EO)
- Sem látex de borracha natural



Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Válvula cruzada	Porta de amostragem de urina	Unidades (unid.)
690090-N	2000	90	Horizontal	Sem agulha	25
690092-N	2000	90	Vertical	Sem agulha	25
690210-N	2000	120	Horizontal	Sem agulha	25
690212-N	2000	120	Vertical	Sem agulha	25
690090	2000	90	Horizontal	Com agulha	25
690092	2000	90	Vertical	Com agulha	25
690210	2000	120	Horizontal	Com agulha	25
690212	2000	120	Vertical	Com agulha	25

Válvula transversal horizontal



Válvula transversal vertical



Porta de amostragem sem agulha



Porta de amostragem com agulha



Saco UROSID® TUR

Após uma ressecção transuretral da próstata (RTUP), o saco especial UROSID® TUR é indicado para irrigação pós-operatória da bexiga. Este procedimento indica uma lavagem contínua da bexiga durante as primeiras 24 horas. No entanto, devido à alta quantidade de solução de lavagem e urina, o saco UROSID® TUR é maior do que os restantes sistemas de drenagem fechados. Vem com um saco de 4 ou 5 litros.



- Câmara de gotejamento com válvula antirretorno integrada
- Válvula cruzada
- Microfiltro com revestimento hidrofóbico
- Ventilação do saco estanque a líquidos e bactérias
- Porta de recolha de amostras de urina sem agulha ou recolha com agulha
- Estéril (EO)
- Sem látex de borracha natural



Referência	Nome	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Porta de amostragem de urina	Unidades (unid.)
690240	Saco UROSID® TUR 4000	4.000	120	Sem agulha	20
690250	Saco UROSID® TUR 5000	5.000	120	Com agulha	20

REF 6440xxA Cateter Foley de silicone UROSID®
(página 10)



REF 6680xxA Cateter Foley de látex UROSID®
(página 14)



Nota:

Para juntar a solução de lavagem e o saco UROSID® TUR, precisa sempre de um cateter Foley de lúmen triplo.

Medidores de urina

A produção de urina constitui uma parte essencial do equilíbrio/eliminação de fluidos. Na medicina intensiva, é importante monitorizar os parâmetros vitais (respiração, circulação, eliminação) durante um período de 24 horas, para evitar a falência de órgãos (rins, vesícula biliar). O Sistema de Medição de Urina UROSID® está equipado com câmaras graduadas adicionais para facilitar a monitorização precisa e a amostragem de urina, mesmo nos casos em que há muito pouca urina.

A nossa gama tem duas versões diferentes de medidores de urina: sistemas basculantes e sistemas de sacos de troca.

Porque é que precisa disso?

Para gerir o controlo de fluidos do seu paciente (por exemplo, após a cirurgia)


Quando é que o deve usar?

Durante a aplicação de medicina de cuidados intensivos


Sistemas basculantes

O Sistema de Medição de Urina UROSID® está disponível em três variações diferentes para satisfazer as suas necessidades específicas. Os medidores de urina da Medline estão disponíveis com variações de câmara única, dupla ou tripla. No entanto, todos os sistemas oferecem medições precisas, começando com uma graduação de 5 ml.


Medidor de urina de câmara única

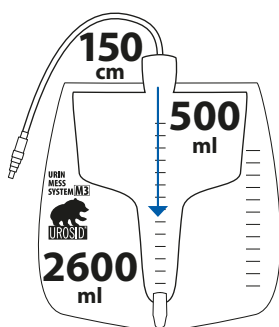

Medidor de urina de câmara dupla

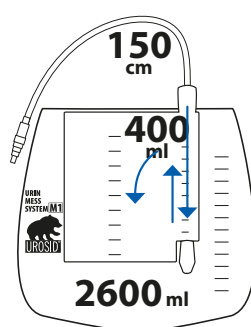

Medidor de urina de câmara tripla

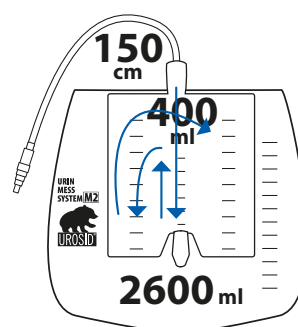

E como funciona?

Depois de medir a urina recolhida na câmara, incline a câmara para cima para esvaziar o conteúdo no saco de urina incluído



- Câmara de gotejamento com válvula anti-retorno integrada
- Válvula cruzada
- Microfiltro com revestimento hidrofóbico
- Ventilação do saco estanque a líquidos e bactérias
- Porta de recolha de amostras de urina sem agulha ou recolha com agulha
- Estéril (EO)
- Sem látex de borracha natural

Medidor de Urina de Câmara Única UROSID® M3

REF 6903x3-x

Referência	Volume do saco (ml)	Volume do medidor de urina (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Unidades (unid.)
690313	2.600	500	150	Com agulha	10
690313-L	2.600	500	150	Com agulha; câmara de gotejamento estendida	10
690313-N	2.600	500	150	Sem agulha	10
690313-N-IP	2.600	500	150	Sem agulha, sem cordão de algodão	10
690323	2.600	500	120	Com agulha	10



Medidor de Urina de Câmara Dupla UROSID® M1

REF 6903x1

Referência	Volume do saco (ml)	Volume do medidor de urina (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Unidades (unid.)
690311	2.600	400	150	Com agulha	10
690321	2.600	400	120	Com agulha	10



Medidor de urina de câmara tripla UROSID® M2

REF 6903x2

Referência	Volume do saco (ml)	Volume do medidor de urina (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Unidades (unid.)
690312	2.600	400	150	Com agulha	10
690322	2.600	400	120	Com agulha	10




Sistemas de Saco de Troca

O Sistema de Medição de Urina UROSID® com Saco de Troca está disponível em duas versões diferentes para satisfazer as suas necessidades específicas. A Medline oferece uma variante de medidores de urina com válvula de drenagem, o que dá aos médicos a opção de esvaziar o saco de troca através da válvula. No caso da variante alternativa sem válvula de drenagem, é necessário trocar o saco quando estiver cheio até à sua capacidade.

E como funciona?

Depois de medir a urina recolhida na câmara, abra a torneira na parte superior da câmara. Isto permitirá que a urina seja drenada para o saco de troca posicionado abaixo.

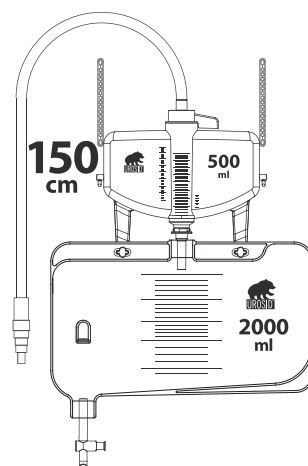

Medidor de Urina UROSID® M5 com Saco de Substituição

REF 69050x-N

Referência	Volume do saco (ml)	Volume do medidor de urina (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Unidades (unid.)
690500-N	2.000	500	150	Com válvula transversal	10
690500-N-IP	2.000	500	150	Com válvula transversal, sem cordão de algodão	10
690501-N	2.000	500	150	Sem válvula de drenagem	10



Saco de Substituição para Medidor de Urina UROSID® M5

REF 69050x-BAG

Referência	Volume do saco (ml)	Características	Unidades (unid.)
690500-BAG	2.000	Com válvula transversal	50
690501-BAG	2.000	Sem válvula de drenagem	50



Manómetro IAP

O manómetro de pressão intra-abdominal (PIA) UROSID® desempenha um papel crucial na prevenção da síndrome compartimental abdominal (SCA). É um dispositivo fácil de usar, concebido para facilitar a monitorização da pressão intra-abdominal (PIA) e proporciona uma ligação segura entre o cateter Foley e o medidor de urina UROSID da sua escolha.

A hipertensão intra-abdominal (HIA) é caracterizada por uma pressão intra-abdominal (PIA) sustentada superior a 12 mmHg. A SCA ocorre quando a pressão dentro da cavidade abdominal ultrapassa os 20 mmHg. Esta condição está associada à disfunção multiorgânica, representando uma grave ameaça para os pacientes na unidade de cuidados intensivos (UCI).²

Para mitigar o risco de SCA, é essencial medir a PIA quando o risco de HIA é identificado.² O manómetro UROSID IAP foi concebido para fornecer medições indiretas e minimamente invasivas da pressão intra-abdominal, utilizando um cateter de Foley.

Referência	Escala (mmHg)	Unidades (unid.)
690000-IAP	0 – 40	20



Sacos de urina

Os sacos vesicais facilitam a recolha da urina drenada dos cateteres vesicais em pacientes com retenção urinária ou micção involuntária, bem como naqueles que estão acamados, paralisados ou com alguma deficiência. A válvula anti-retorno (NRV) reduz o número de infeções que atingem a bexiga através do cateter Foley. E, ao contrário de um sistema fechado de drenagem de urina, os sacos de urina não contêm uma câmara de gotejamento.

UROSID® 20

O UROSID® 20 oferece um sistema de saco de urina estéril.



As características do sistema de saco de urina são as seguintes:

- Válvula anti-retorno (NRV)
- Válvula cruzada
- Microfiltro com revestimento hidrofóbico
- Ponto de extração da amostra de urina no conector de passo universal
- Tubo e clampe para lençol
- Disponível com ou sem suporte
- Sem látex de borracha natural
- Estéril (OE)



Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Unidades (unid.)
690190	2.000	90	Sem retentor	50
690120	2.000	120	Sem retentor	50
690120-H	2.000	120	Com retentor	50

Saco de urina



Características do saco de urina:

- Válvula antirretorno (NRV)
- Válvula cruzada
- Conector de passo universal
- Sem látex de borracha natural



Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Porta de amostragem de urina	Esterilidade	Unidades (unid.)
690220	2.000	90	n/a	Estéril (OE)	50
690230	2.000	90	n/a	Não estéril	200
691220-N	2.000	120	Sem agulha	Estéril (OE)	50

Saco para secreções

Este saco permite a recolha de fluidos corporais libertados, como a urina de cateteres vesicais. Requer troca após enchimento, pois não é possível esvaziá-lo. Além disso, o saco para secreções pode ser ligado ao saco de perna UROSID® durante a noite.



Características do saco para secreções:

- Válvula antirretorno (NRV)
- Conector de passo universal
- Sem látex de borracha natural



Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Esterilidade	Unidades (unid.)
690415	1.500	90	Com NRV	Não estéril	200
690420	2.000	90	Com NRV	Não estéril	200
690515	1.500	90	Sem NRV	Não estéril	200
690520	2.000	90	Sem NRV	Não estéril	200
690615	1.500	90	Com NRV	Estéril (OE)	100
690620	2.000	90	Com NRV	Estéril (OE)	100

Acessórios

Suportes para sacos de urina (não estéreis)



REF 690010
Feito de plástico



REF 690020
Feito de metal revestido de plástico



REF 690030
Feito de plástico

Referência	Unidades (unid.)
6900x0	10

Clampe do lençol de cama (não estéril)

Ajuda a prender o tubo do saco de urina ao lençol de cama



Referência	Unidades (unid.)
681050	50

Frasco de urina e suporte de frasco de urina

O frasco de urina é ideal para pacientes do sexo masculino acamados, para se recolher urina. O frasco de urina quadrado é graduado e tem uma capacidade de 1000 ml. Cada um é compatível com o suporte do frasco de urina.

Referência	Unidades (unid.)
69005xA	25



REF 690050A



REF 690055A

UROSID® 24h

A combinação perfeita entre o sistema fechado de drenagem urinária e o saco de perna

UROSID® 24h é um sistema fechado de drenagem urinária para recolher a urina descarregada dos cateteres vesicais em pacientes com retenção urinária ou micção involuntária. UROSID® 24h é uma combinação de saco de cama/perna que permite que os pacientes móveis com cateteres vesicais façam as suas vidas diárias. Este produto pode ser preso à cama do paciente e também pode ser usado debaixo da roupa preso à parte superior ou inferior da perna.



- Câmara de gotejamento
- Com válvula anti-retorno (NRV)
- Microfiltro com revestimento hidrofóbico
- Conector universal escalonado com ponto de amostragem de urina
- Válvula cruzada
- Fixação à perna ou cama através de uma tira de sujeição
- Superfície interna tecida
- Estéril (OE)
- Sem látex de borracha natural
- Sem PHT nem DEHP



Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Unidades (unid.)
693730	1.000	30	20
693760	1.000	60	20
693790	1.000	90	20

Tiras de Sujeição para UROSID® 24h



Referência	Comprimento (cm)	Unidades (unid.)
693702	58	10

REF 6904xx, 6905xx ou 6906xx saco para secreções (página 24)



Nota:
Pode ligar um saco para secreções ao UROSID® 24h durante a noite.




Sacos para a perna


Sacos de Perna UROSID®

Sacos para a perna com capacidade de até 1000 ml que permitem que os pacientes móveis com cateteres vesicais façam as suas vidas diárias. Podem ser presos à parte superior ou inferior da perna e usados debaixo da roupa. Um saco de perna de câmara tripla tem três câmaras separadas, permitindo que se encaixe perfeitamente na perna.

Saco de Perna com Câmara Única

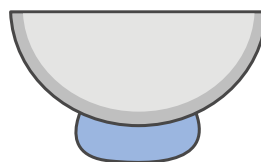

Saco de Perna com Câmara Tripla

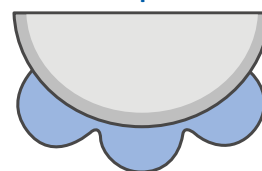

Saco de Perna com Câmara Única UROSID®

O Saco de Perna com Câmara Única oferece uma solução para recolher a urina descarregada de cateteres vesicais e possui um conector escalonado gradual, válvula antirretorno (NRV) e um dreno central.

Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Esterilidade	Unidades (unid.)
690710	750	10	Não estéril	10



O Saco de Perna com Câmara Única é ideal para recolher a urina descarregada de cateteres vesicais. Possui características como um conector escalonado gradual, válvula anti-retorno (NRV) e uma válvula cruzada. A superfície interna do tecido permite um maior conforto do utilizador, ao passo que o conector escalonado oferece a opção de encurtar o tubo para ajustá-lo às necessidades específicas dos pacientes.

Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Esterilidade	Unidades (unid.)
691770	750	50	Estéril (OE)	10



Sacos de Perna UROSID®

Saco de Perna de Câmara Tripla UROSID®

O Saco de Perna de Câmara Tripla fornece uma solução para recolher urina descarregada de cateteres vesicais. Cada um possui um conetor escalonado gradual, válvula anti-retorno (NRV) e válvula cruzada ou válvula de palheta. Além disso, a superfície tecida interna proporciona maior conforto ao utilizador e o conetor escalonado extra permite o encurtamento do tubo com base no indivíduo. É incluída também uma peça de fixação para uso como saco noturno.



Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Esterilidade	Unidades (unid.)
690735	500	50	Válvula cruzada	Estéril (OE)	10
690740	500	65	Válvula cruzada	Estéril (OE)	10
690745	750	65	Válvula cruzada	Estéril (OE)	10
690760	500	50	Válvula de palheta	Estéril (OE)	10
691755	750	50	Válvula cruzada	Estéril (OE)	10
691760	750	50	Válvula de palheta	Estéril (OE)	10
692735	500	50	Válvula cruzada	Não estéril	10
692755	750	50	Válvula cruzada	Não estéril	10

Válvula cruzada



Válvula de palheta



Tira para Sacos de Perna UROSID®

Esta tira de sujeição é ideal para prender os sacos de urina UROSID® à perna. É confortável de usar, e o conforto e os tipos padrão vêm com uma faixa de silicone no interior para uma melhor aderência. O fecho está equipado com Velcro.



Referência	Nome	Tamanho	Comprimento x largura (cm)	Características	Unidades (unid.)
856001	Comfort	S (pequeno)	40 x 5	Embalado à unidade	10
856002	Comfort	M (médio)	50 x 5	Embalado à unidade	10
856003	Comfort	L (grande)	60 x 5	Embalado à unidade	10
856006	Universal	Universal	63 x 2,5; 63 x 3,5	Embalado aos pares	10
856008	Standard	Universal	53 x 2,5	Embalado aos pares	10

Produtos pediátricos

Produtos pediátricos para os nossos pacientes mais pequenos

É tão importante oferecer produtos urológicos para crianças como para adultos. Os pacientes mais jovens têm necessidades específicas para as quais podemos fornecer soluções com a nossa linha de produtos pediátricos. A prevenção do ITU-CV é tão importante nas crianças como nos adultos e, consequentemente, os nossos kits de troca de cateter também podem ser usados em crianças. Todos os produtos pediátricos são estéreis (EO).



- Reduzir os cateterismos desnecessários
- Manter o tempo de permanência num mínimo
- Dar formação ao pessoal
- Implementar a higiene das mãos e técnicas assépticas
- Implementar vigilância diária
- Usar um sistema fechado de drenagem de urina.




Veja o ursinho Molly na nossa gama de urologia pediátrica!

Cateteres permanentes

Os cateteres permanentes de tamanho pediátrico vêm sempre com um estilete pré-inserido para um posicionamento fácil e seguro do cateter.

Cateter Foley UROSID®


Disponível em silicone ou em látex siliconizado

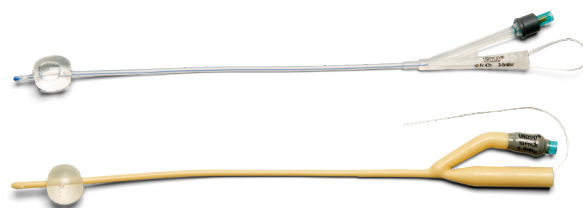

Referência	Material	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
641006A	Silicone	6	31	1,5	Verde claro	10
641008A	Silicone	8	31	3 – 5	Azul	10
641010A	Silicone	10	31	3 – 5	Preto	10
661006A	Látex siliconizado	6	27	3	Verde claro	10
661008A	Látex siliconizado	8	27	3 – 5	Azul	10
661010A	Látex siliconizado	10	27	3 – 5	Preto	10

UROSID® Sensor 400

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
646008A	8	31	5	Azul	5
646010A	10	31	5	Preto	5

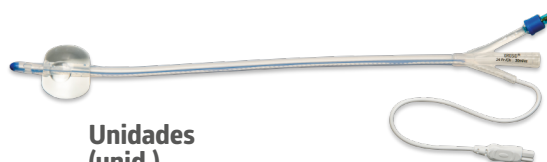

UROSID® Supra

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Volume do balão (ml)	Cor	Unidades (unid.)
645006A	6	40	1,5	Verde claro	10
645008A	8	40	3	Azul	10
645010A	10	40	3 – 5	Preto	10

Sistemas fechados de drenagem de urina

UROSID® 1000

É uma variante do UROSID® 2000 S para uso em pacientes pediátricos



- Câmara de gotejamento com válvula anti-retorno integrada
- Válvula cruzada
- Microfiltro com revestimento hidrofóbico
- Ventilação em saco estanque a líquidos e bactérias
- Porta de recolha de amostras de urina sem agulha ou recolha com agulha
- Estéril (EO)
- Sem látex de borracha natural



Referência	Volume (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Válvula cruzada	Unidades (unid.)
690270-N	1.000	90	Vertical	20

Medidores de urina

Medidor de urina de câmara única UROSID® M200**REF 690343-x**

Esta é a versão pediátrica do UROSID® M3. Possui um saco mais pequeno e um medidor de urina, perfeitos para uso em pacientes jovens.



Referência	Volume do saco (ml)	Volume medidor de urina (ml)	Comprimento da tubagem (cm)	Características	Unidades (unid.)
690343	2.000	200	120	Com agulha	10
690343-N	2.000	200	120	Sem agulha	10

Seringas de irrigação

Seringa de irrigação com pistão

Trata-se de uma seringa de irrigação estéril (EO), graduada e descartável com um canhão de cateter retilíneo e um adaptador luer. Pode ser usada com cateteres vesicais e sondas estomacais (por exemplo, para irrigação da bexiga).

Referência	Volume (ml)	Unidades (unid.)
620060	50 – 60	50
620100	100	25



Seringa de irrigação com bolbo

Ideal para uso em ambientes clínicos e cirúrgicos, esta seringa de irrigação com bolbo descartável tem um aperto fácil, prestando-se por isso ao uso com uma só mão. Concebida para repousar na sua extremidade, ajuda a evitar fugas e a manter um ambiente limpo.

Referência	Volume (ml)	Esterilidade	Unidades (unid.)
DYNDE20127	60	Não estéril	50
DYNDE20125	60	Estéril (OE)	25



Produtos gastro- enterológicos

Tubos retais*

São cateteres intestinais retos com dois ilhós para administração de clisteres e drenagem de gases intestinais.

Referência	Tamanho (CH)	Comprimento (cm)	Cor	Unidades (unid.)
680418	18	40	Vermelho	100
680422	22	40	Roxo	100
680425	25	40	Azul	100
680428	28	40	Verde	100
680430	30	40	Cinzeno	100



Kit Clister

O Kit Clister da Medline fornece tudo o que é necessário para um clister.



Este kit contém:

- 1 saco com tubo, clampe e ponta pré-lubrificada, 1,5 l
- 1 embalagem de sabão líquido, 9 ml
- 1 resguardo, resistente a fluidos, 42 x 45 cm



Referência	Volume (ml)	Comprimento do tubo (cm)	Esterilidade	Unidades (unid.)
DYNDE70100A	1.500	137	Não estéril	48

*Não disponível na Áustria, Suíça, Hungria, Itália e Reino Unido

Para mais informações, contacte o seu delegado de vendas Medline ou consulte o nosso website em www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt

Encomendas: pt-pedidos@medline.com

Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Fontes:

1. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/CAUTI_2015.pdf?__blob=publicationFile
2. Newman, R.K. (2023) Abdominal compartment Syndrome. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430932/>.

Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2026 Medline. ML1338_PT 09/2026