



Zubehör für die Vakuumaspiration
Küretten, Aspirationsschlauch & Gewebeauffangbehälter

SAUGKÜRETTEN

Medlines Einweg-Saugküretten bestehen aus einem durchsichtigen festen Kunststoff mit geprägter Größenangabe. Konstruiert für die sichere und effektive Vakuumaspiration, sind die Küretten mit den meisten üblichen Arten von Griffen verwendbar. Saugküretten sind mit offenen Spitzen sowohl in gebogener als auch gerader Form erhältlich.

Offene distale Spitzen



Durchsichtiger fester Kunststoff



Geprägte Größenangabe



Saugkürette - gerade Form⁽¹⁾

| Artikelnummer | Größe | Packfaktor |
|---------------|-------|------------|
| UCS07 | 7 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCS08 | 8 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCS09 | 9 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCS10 | 10 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCS11 | 11 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCS12 | 12 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCS14 | 14 mm | 20 Stk/Ktn |



Saugkürette - gebogene Form⁽¹⁾

| Artikelnummer | Größe | Packfaktor |
|---------------|-------|------------|
| UCC07 | 7 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCC08 | 8 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCC09 | 9 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCC10 | 10 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCC11 | 11 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCC12 | 12 mm | 20 Stk/Ktn |
| UCC14 | 14 mm | 20 Stk/Ktn |



ASPIRATIONSSCHLAUCH


Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser und Drehgriff⁽¹⁾

Der Drehgriff ist bereits an einem durchsichtigen sterilen Schlauch von 10 mm Innendurchmesser angeschlossen und mit den meisten Arten von Küretten verwendbar. Der Schlauch ist mit gängigen Vakuum-Quellen kompatibel. Um ein bequemes Arbeiten zu ermöglichen, dreht sich der aus durchsichtigem, festem Kunststoff gefertigte Griff volle 360 Grad. Mit Hilfe des mit dem Daumen leicht verschiebbaren Rings, werden Entlüftungsschlitze geöffnet bzw. verschlossen und so eine sichere und bequeme Vakuum-Kontrolle während des Saugvorgangs ermöglicht.

Der Medline Aspirationsschlauch mit 10 mm Durchmesser ist dick genug um ein Kollabieren unter hohem Vakuumdruck zu verhindern, aber dennoch flexibel und leicht zu handhaben. Der durchsichtige Schlauch ermöglicht eine leichte visuelle Kontrolle und bietet einen großen Innendurchmesser, der ein maximales Durchflussvolumen gewährleistet.

Erhältlich mit 10 mm Durchmesser mit männlichen und weiblichen Anschlüssen (Adapter).

| Artikelnummer | Beschreibung | Schlauchlänge | Packfaktor |
|---------------|--|---------------|------------|
| TUB106H | 10 mm ID Aspirationsschlauch mit Drehgriff | 2,0 m | 10 Stk/Ktn |
| TUB1010H | | 3,0 m | 10 Stk/Ktn |

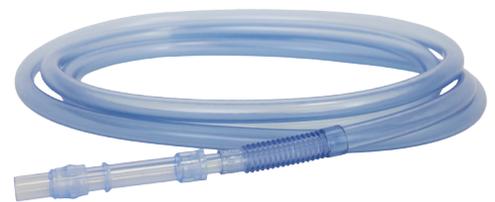

Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser⁽¹⁾

Dick genug, um ein Kollabieren unter hohem Druck zu verhindern, aber dennoch flexibel und leicht zu handhaben. Der Schlauch hat einen großen Durchmesser, um das Durch- bzw. Abflussvolumen zu maximieren. Transparenz für visuelle Kontrolle des Saugvorgangs.


| Artikelnummer | Beschreibung | Schlauchlänge | Packfaktor |
|---------------|-------------------|---------------|------------|
| TUB106 | 10 mm ID Schlauch | 2,0 m | 10 Stk/Ktn |
| TUB1010 | | 3,0 m | 10 Stk/Ktn |



Adapter für Zubehöranschluss⁽²⁾

Wird verwendet, um den Zubehöranschluss in einen Patientenanschluss umzuwandeln, passend für den 10 mm (ID) Schlauch mit großem Innendurchmesser.

| Artikelnummer | Beschreibung | Packfaktor |
|---------------|------------------------------|------------|
| 65652-120 | Adapter für Zubehöranschluss | 10 Stk/Ktn |

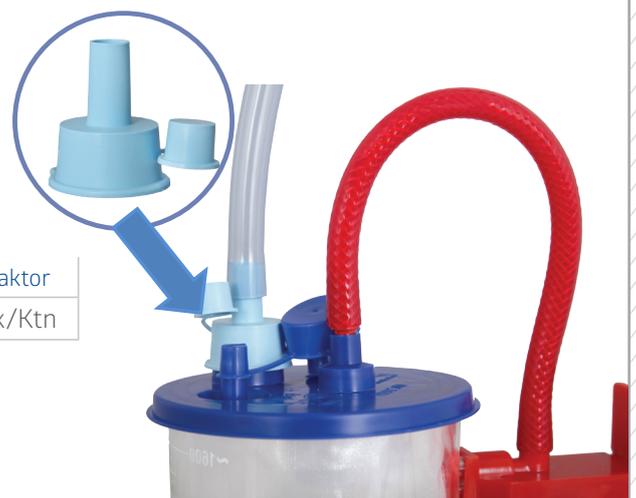

GEWEBEAUFFANGBEHÄLTER

Einweg-Gewebeauffangbeutel⁽³⁾

Der Einweg-Gewebeauffangbeutel wird verwendet, um Gewebe für die Analyse zu sammeln und aufzubewahren. Der Medline Gewebeauffangbeutel kann in den Zubehöranschluss des Absaugbehälters eingeführt und mit einem 7 bis 10 mm (ID) Absaugschlauch verbunden werden.

Wenn das Gewebe gesammelt ist, schließt man den Verschluss des Gewebeauffangbeutels und entfernt ihn vom Zubehöranschluss. Zur Entnahme des Gewebes, schneidet man den Beutel auf.



| Artikelnummer | Beschreibung | Farbe | Durchmesser | Größe | Packfaktor |
|---------------|--------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| OR122 | Gewebeauffangbehälter Standard | weiß | 7 mm | 23 cm | 100 Stk/Ktn |
| OR123 | Gewebeauffangbehälter Klein | weiß | 7 mm | 9 cm | 100 Stk/Ktn |
| OR124 | Gewebeauffangbehälter Groß | blau | 10 mm | 23 cm | 100 Stk/Ktn |

Einweg-Gewebeauffangschale⁽⁴⁾

Die Einweg-Gewebeauffangschale dient dem Sammeln und Transportieren von Gewebeproben. Das geschlossene System ermöglicht, dass der Kontakt mit abgesaugtem Gewebe vermieden wird.

Die Medline Gewebeauffangschale hat einen durchsichtigen, wiederverschließbaren, auslaufsicheren Deckel, wodurch der Inhalt des Behälters schnell visuell kontrolliert und hygienisches, auslaufsicheres Lagern oder Transportieren des Behälters gewährleistet wird.

Das System kann an den Patientenanschluss oder Tandemanschluss mittels Adapter am Absaugbehälter befestigt und an einen 10 mm (ID) Schlauch angeschlossen werden.



| Artikelnummer | Beschreibung | Packfaktor |
|---------------|----------------------------|-------------|
| CA6000 | Einweg-Gewebeauffangschale | 100 Stk/Ktn |

⁽¹⁾ Diese Produkte sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen auf der Verpackung.

EC REP Kingsmead Service Limited, 19 Mezzanine Floor 19-21 Crawford Street, London, W1H 1PJ, UK

CE 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH

⁽²⁾ Diese Produkte sind sterile die Medizinprodukte der Klasse IIa. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen auf der Verpackung

EC REP Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH The Hague The Netherlands

CE 0086 BSI

^{(3), (4)} Diese Produkte sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen auf der Verpackung.

EC REP Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France

⁽⁴⁾ Purple Surgical Holdings Limited, 2 Chestnut House, Farm Close, Shenley, Herts, WD7 9AD, England



ALWAYS
ON

Medline International Germany GmbH
Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2017 Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen von Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML532-DE03/SV 10/2017.