

# Baarmoeder Curettage

Curettes, slangen met brede diameter en opvangbakjes



**Uitgebreide  
gynaecologische  
oplossing**




# Baarmoeder currettes

Medline currettes voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van doorzichtig, stevig kunststof met een markering die de maat aangeeft. Ontworpen voor veilige en effectieve baarmoederaspiratie en passen op de meest gebruikte handgrepen. Currettes voor afzuiging zijn verkrijgbaar met open uiteindes, in zowel gebogen of rechte uitvoeringen.

Zachte open uiteindes

Transparant, stevig kunststof

Markering voor maat

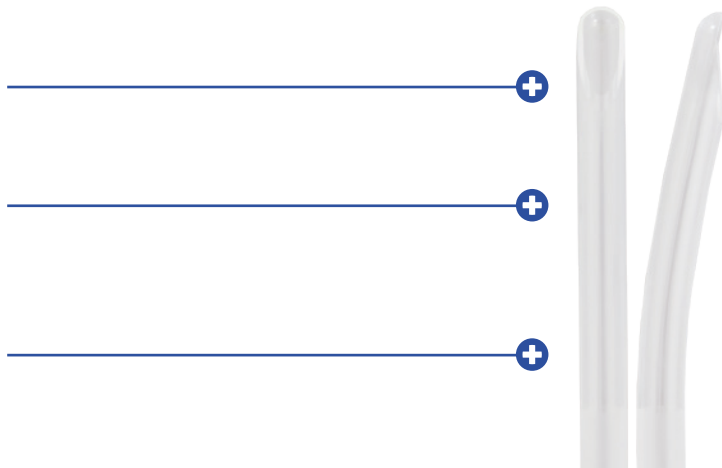

## Baarmoeder currettes - recht<sup>(1)</sup>

| Code  | Maat  | Verpakkingseenheid |
|-------|-------|--------------------|
| UCS07 | 7 mm  | 20 st/doos         |
| UCS08 | 8 mm  | 20 st/doos         |
| UCS09 | 9 mm  | 20 st/doos         |
| UCS10 | 10 mm | 20 st/doos         |
| UCS11 | 11 mm | 20 st/doos         |
| UCS12 | 12 mm | 20 st/doos         |
| UCS14 | 14 mm | 20 st/doos         |



## Baarmoeder currettes - gebogen<sup>(1)</sup>

| Code  | Maat  | Verpakkingseenheid |
|-------|-------|--------------------|
| UCC07 | 7 mm  | 20 st/doos         |
| UCC08 | 8 mm  | 20 st/doos         |
| UCC09 | 9 mm  | 20 st/doos         |
| UCC10 | 10 mm | 20 st/doos         |
| UCC11 | 11 mm | 20 st/doos         |
| UCC12 | 12 mm | 20 st/doos         |
| UCC14 | 14 mm | 20 st/doos         |



# Grote diameter slang

## Draaihandvat<sup>(1)</sup>

De draaibare handgreep is al aangesloten op transparante steriele slangen met een binnendiameter van 10 mm en past bij de meest gebruikte curettes, terwijl de slang past op of aan te passen is aan de meeste vacuümbronaansluitingen. Om te zorgen voor comfort en gemak voor chirurgen, kan de handgreep 360° draaien en is deze gemaakt van transparant, stevig kunststof. Een met de duim geïndexeerde ring glijdt gemakkelijk over de afzuigopeningen voor een comfortabele en positieve controle tijdens de procedure.

De Medline brede diameter slang met 10 mm binnendiameter is dik genoeg om te voorkomen dat hij dichtklapt bij curettage van de baarmoeder, maar is nog steeds flexibel en makkelijk te gebruiken. De transparante slang heeft een grote diameter voor maximale doorstroming en goede zichtbaarheid.

De slang is verkrijgbaar met een standaard 10 mm diameter met male en female aansluitingen (adapter).

| Code     | Omschrijving           | Slanglengte | Verpakkingseenheid |
|----------|------------------------|-------------|--------------------|
| TUB106H  | 10 mm binnendiameter   | 2 m         | 10 st/doos         |
| TUB1010H | slang met draaihandvat | 3 m         | 10 st/doos         |
| TUBH     | Draaihandvat           | -           | 20 st/doos         |



## Grote diameter slang 10 mm binnendiameter<sup>(1)</sup>

Deze buis is dik genoeg om niet in te zakken onder hoge vacuümdruk, maar toch flexibel en gemakkelijk te gebruiken. Het heeft een grote opening om de volumestroom of drainage te maximaliseren. De slang is transparant voor goede zichtbaarheid.

| Code    | Omschrijving   | Slanglengte | Verpakkingseenheid |
|---------|----------------|-------------|--------------------|
| TUB106  | 10 mm binnen-  | 2 m         | 10 st/doos         |
| TUB1010 | diameter slang | 3 m         | 10 st/doos         |



## Accessoire poort omvormer<sup>(2)</sup>

Dit artikel wordt gebruikt om de accessoirepoort van canisters in een patiëntpoort te veranderen. Het is compatibel met de 10 mm ID slangen met wijde opening en de tandemport op alle MED-SOFT, MED-RIGID en MED-SEMI RIGID afzuigbussen.

| Code      | Omschrijving              | Verpakkingseenheid |
|-----------|---------------------------|--------------------|
| ORADAPT10 | Accessoire poort omvormer | 50 st / doos       |



# Opvangbakjes

## Disposable Weefselopvangkous<sup>(2)</sup>

De wegwerpsok wordt gebruikt om specimens voor analyse te verzamelen en te bewaren. De Medline-monstersok kan in de accessoirepoort van de afzuigcanister worden ingebracht en worden aangesloten op de afzuigslang met een ID van 7 tot 10 mm.

Zodra de specimens zijn verzameld, sluit u de dop van de specimensok, verwijdert u de sok uit de accessoirepoort en knipt u de sok door om het specimen op te halen.



| Code  | Omschrijving            | Kleur | Diameter | Lengte | Verpakkingseenheid |
|-------|-------------------------|-------|----------|--------|--------------------|
| OR123 | Korte weefselopvangkous | Wit   | 7 mm     | 9 cm   | 100 st/doos        |
| OR124 | Grote weefselopvangkous | Blauw | 10 mm    | 23 cm  | 100 st/doos        |
| OR125 | Standaard monstersok    | Wit   | 7 mm     | 23 cm  | 100 st/doos        |
| OR169 | Grote specimen sok      | Geel  | 14 mm    | 23 cm  | 100 st/doos        |

## Disposable weefselopvangbakje<sup>(2)</sup>

De wegwerpmonsterbeker is een verzamelaar voor weefselmonsters die op veilige en doeltreffende wijze weefsel scheidt van vloeistof door gebruik te maken van een geïntegreerd filter en een "gesloten" systeem mogelijk maakt doordat het opgezogen weefsel niet meer gehanteerd hoeft te worden.

De Medline beker heeft een doorzichtig, hersluitbaar, lekvrij deksel waardoor gebruikers snel de inhoud van de beker visueel kunnen controleren. Het systeem kan via de patiëntenpoort of tandempoort met een adapter aan de afzuigcanister worden bevestigd en worden aangesloten op slangen van 10 mm ID.



| Code | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|------|--------------|--------------------|
| OR84 | Opvangbakje  | 20 st/doos         |

**Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)**



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

<sup>(1)</sup>Deze producten zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.



Luettich Leibesweit GmbH  
Hochstr. 1  
42699 Witten, Germany

CE 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH

<sup>(2)</sup>Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML532\_EN 04/2022