

Afzuigcanules en Yankauers

Een compleet assortiment van afzuigstelsysteem accessoires



**Betrouwbare
vloeistofcontrole**

Hulpmiddelen voor elke behoefte

Medline afzuiginstrumenten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen om bij uw voorkeuren en behoeften voor het afzuigen van vloeistoffen tijdens chirurgische ingrepen te passen. Ze bieden prestaties en flexibiliteit, voor optimale controle en visibiliteit, terwijl weefseltrauma wordt geminimaliseerd. Alle afzuiginstrumenten zijn latexvrij en individueel dubbel verpakt om steriliteit te garanderen. Afhankelijk van de behoefte biedt Medline flexibele en stevige afzuiginstrumenten.

Flexibele yankauer met female connector

Deze yankauers met female connector bieden een efficiënte afzuigoplossing. Dankzij de flexibiliteit kunnen ze op diepe en gevoelige plaatsen afzuigen, zonder weefsel te beschadigen.

Elke yankauer is gemaakt van PVC en is geschikt voor gebruik bij orale afzuiging, bij laryngoscopie geassisteerd met afzuiging en voor het reinigen van de luchtwegen.

Code	Omschrijving	Lengte	Diameter	Verpakking- seenheid
Y1800F	Flexibele yankauer met female connector	250 mm	18 CH	50
Y2200F	Flexibele yankauer met female connector	250 mm	22 CH	50

Harde klassieke yankauer

Volledig assortiment van veelvoorkomende disposable harde afzuigcanules voor het afzuigen van vloeistoffen met een verscheidenheid aan open uiteindes (fijn, normaal, groot) om aan uw eisen voor alle toepassingen te voldoen. Laterale openingen voor gecontroleerde atraumatische afzuiging met hoogwaardige afwerking en door hitte gevormde ronde distale uiteinden met afgeschuinde randen minimaliseren weefseltrauma, zelfs bij de meest kwetsbare weefsels.

Code	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuüm- controle	Verpakking- seenheid
Y1200	Fijn uiteinde, voor pediatrisch, dentaal en KNO gebruik	270 mm	12 CH	2	Nee	50
Y1201		270 mm	12 CH	2	Ja	50
Y1500		200 mm	15 CH	0	Nee	100
Y1501	Normaal uiteinde, voor pharyngeaal gebruik	200 mm	15 CH	0	Ja	100
Y1800		250 mm	18 CH	6	Nee	50
Y1801	Groot uiteinde, voor orthopedisch gebruik, grote deeltjes en grote volumes vloeistof	250 mm	18 CH	6	Ja	50
Y2200		270 mm	22 CH	6	Nee	50
Y2201		270 mm	22 CH	6	Ja	50
Y2800		270 mm	28 CH	4	Nee	50
Y2801		270 mm	28 CH	4	Ja	50

Harde yankauer met taps toelopende bol uiteinde en ergonomisch handvat

Code	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuüm- controle	Verpakking- seenheid
Y80	Taps toelopend bol uiteinde	262 mm	12 CH	0	Nee	50
Y82	Taps toelopend bol uiteinde	262 mm	12 CH	0	Ja	50

Harde yankauer met flexibel verbindingstuk

Deze yankauer met een flexibel verbindingstuk is gemaakt van transparant PVC en kan gebruikt worden voor algemene afzuigtoepassingen, dentale afzuiging of orthopedische ingrepen. Het flexibele, taps toelopende proximale uiteinde zorgt voor een universele slangverbinding.

Code	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuüm- controle	Verpakking- seenheid
P2000	Recht uiteinde	280 mm	20 CH	4	Nee	50
P20FT	Plat uiteinde	280 mm	20 CH	4	Nee	50

Harde yankauer met ergonomisch handvat

Onbreekbaar PVC kan gebruikt worden voor middelmatige orgaan/weefsel retractie of weefseldissectie. Het ergonomische, antislip handvat zorgt voor comfortabel gebruik bij langdurige ingrepen.

Code	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuüm- controle	Verpakking- seenheid
Y2400	Recht uiteinde	253 mm	24 CH	4	Nee	50
Y240B	Bol uiteinde	260 mm	24 CH	4	Nee	50

Harde yankauer met AAN/UIT schakelaar handvat

Met de schakelaar kan de gebruiker handmatig het vacuüm openen of sluiten om de afzuigkracht te controleren en het geluidsniveau te verlagen. Het anatomisch ontworpen handvat maakt het gebruik comfortabeler. De yankauer heeft een taps toelopend proximaal uiteinde voor stevige universele bevestiging aan een slang.

Code	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	AAN/UIT vacuümcontrole	Verpakking- seenheid
Y240FS	Recht uiteinde	297 mm	24 CH	4	Ja	50
Y240FB	Bol uiteinde	297 mm	24 CH	4	Ja	50

Poole afzuigcanule

Deze canule bestaat uit een tweedelige vaste constructie:

- De binnencanule heeft 4 gaten aan de zijkanten en een open distaal uiteinde om te zorgen voor een goede stroming.
- De flexibele buitenmantel heeft meerdere gaten aan de zijkant en een open distaal uiteinde, voor verspreide afzuiging zonder risico op weefselinvasie.

De Poole canule is een speciale afzuigcanule ontworpen om samengestroomd bloed, vocht en afval af te zuigen tijdens diepe abdominale ingrepen, inclusief keizersnedes.




Code	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuüm- controle	Verpakking- seenheid
Y20PS	Flexibel recht uiteinde	297 mm	20 CH	20 + 4	Nee	50



Yankauer sets

Deze steriele yankauer afzuighandgreep zit al gemonteerd aan een 1,8- of 3- meter afzuigslang met geribbelde female verbindingstukken.

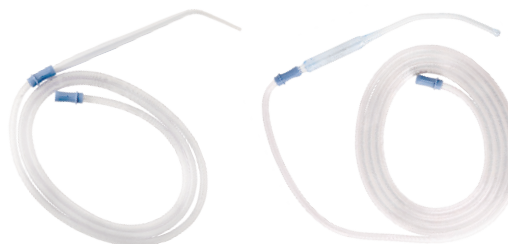


Code	Omschrijving	Yankauer				Zuigslang		Verpakking- seenheid
		Diameter	Lengte	Gaatjes tip zijkant	Vacuüm- controle	Binnen diameter	Lengte	
ORNEX66AY1200	Yankauer set met fijne tip	12 CH	270 mm	2	No	6 mm	1,8 m	30
ORNEX610Y1800	Yankauer set met normale tip	18 CH	250 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y2200	Yankauer set met grote tip	22 CH	270 mm	6	No	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y80	Yankauer set met fijn taps toelopende tip en ergonomisch handvat	12 CH	280 mm	0	No	6 mm	3 m	30

Orthopedische afzuigset

De orthopedische afzuigset met filter helpt om een duidelijk zichtbaar operatie gebied te behouden. Het speciale filter dat in de handgreep zit houdt automatisch vaste deeltjes tegen en kan binnen enkele seconden vervangen worden als deze vol zit. Dankzij de verhoogde filtercapaciteit is de afzuigset ideaal voor alle ingrepen waarbij grote hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen.



Code	Omschrijving	Verpakking- seenheid
YORTHO	Orthopedische afzuigset met 1 geribbelde handvat, 1 gebogen uiteinde (7 x 230 mm), handvat met 2 filters en 3 mogelijke uiteindes	10

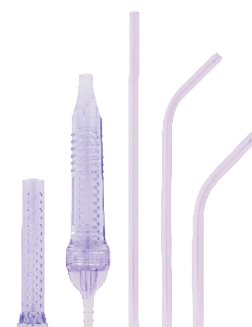

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland


Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Alle Yankauers en yankauer sets zijn steriele medische hulpmiddelen van klasse IIa die bedoeld zijn voor gebruik door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Referenties YxxxxF:  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany

 0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47677 Willich, Germany



0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten die in deze brochure kunnen voorkomen te corrigeren.

© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML468_NL 01/2023.