

Afzuigcanules en Yankauers

Een compleet assortiment van afzuigstelsel accessoires



**Betrouwbare
vloeistofcontrole**

Hulpmiddelen voor elke behoefte

Medline afzuiginstrumenten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen om bij uw voorkeuren en behoeften voor het afzuigen van vloeistoffen tijdens chirurgische ingrepen te passen. Ze bieden prestaties en flexibiliteit, voor optimale controle en visibiliteit, terwijl weefseltrauma wordt geminimaliseerd. Alle afzuiginstrumenten zijn latexvrij en individueel dubbel verpakt om steriliteit te garanderen.

Harde klassieke yankauer

Volledig assortiment van veelvoorkomende disposable harde afzuigcanules voor het afzuigen van vloeistoffen met een verscheidenheid aan open uiteindes (fijn, normaal, groot) om aan uw eisen voor alle toepassingen te voldoen. Laterale openingen voor gecontroleerde atraumatische afzuiging met hoogwaardige afwerking en door hitte gevormde ronde distale uiteinden met afgeschuinde randen minimaliseren weefseltrauma, zelfs bij de meest kwetsbare weefsels.

| Code | Omschrijving | Lengte | Diameter | Gaten | Vacuümcontrole | Verpakkingseenheid |
|-------|--|--------|----------|-------|----------------|--------------------|
| Y1200 | | 270 mm | 12 CH | 2 | Nee | 50 |
| Y1201 | Fijn uiteinde, voor pediatrisch, dentaal en KNO gebruik | 270 mm | 12 CH | 2 | Ja | 50 |
| Y1500 | | 200 mm | 15 CH | 0 | Nee | 100 |
| Y1501 | | 200 mm | 15 CH | 0 | Ja | 100 |
| Y1800 | Normaal uiteinde, voor pharyngeaal gebruik | 250 mm | 18 CH | 6 | Nee | 50 |
| Y1801 | | 250 mm | 18 CH | 6 | Ja | 50 |
| Y2200 | Groot uiteinde, voor orthopedisch gebruik, grote deeltjes en grote volumes vloeistof | 270 mm | 22 CH | 6 | Nee | 50 |
| Y2201 | | 270 mm | 22 CH | 6 | Ja | 50 |
| Y2800 | | 270 mm | 28 CH | 4 | Nee | 50 |
| Y2801 | | 270 mm | 28 CH | 4 | Ja | 50 |

Harde yankauer met taps toelopende bol uiteinde en ergonomisch handvat

| Code | Omschrijving | Lengte | Diameter | Gaten | Vacuümcontrole | Verpakkingseenheid |
|------|-----------------------------|--------|----------|-------|----------------|--------------------|
| Y80 | Taps toelopend bol uiteinde | 280 mm | 12 CH | 0 | Nee | 50 |
| Y82 | Taps toelopend bol uiteinde | 280 mm | 12 CH | 0 | Ja | 50 |

Harde yankauer met flexibel verbindingstuk

Deze yankauer met een flexibel verbindingstuk is gemaakt van transparant PVC en kan gebruikt worden voor algemene afzuigtoepassingen, dentale afzuiging of orthopedische ingrepen. Het flexibele, taps toelopende proximale uiteinde zorgt voor een universele slangverbinding.

| Code | Omschrijving | Lengte | Diameter | Gaten | Vacuümcontrole | Verpakkingseenheid |
|-------|----------------|--------|----------|-------|----------------|--------------------|
| P2000 | Recht uiteinde | 280 mm | 20 CH | 4 | Nee | 50 |
| P20FT | Plat uiteinde | 280 mm | 20 CH | 4 | Nee | 50 |

Vacuümcontrole

Harde yankauer met ergonomisch handvat

Onbreekbaar PVC kan gebruikt worden voor middelmatige orgaan/weefsel retractie of weefseldissectie. Het ergonomische, antislip handvat zorgt voor comfortabel gebruik bij langdurige ingrepen.

| Code | Omschrijving | Lengte | Diameter | Gaten | Vacuümcontrole | Verpakkingseenheid |
|-------|----------------|--------|----------|-------|----------------|--------------------|
| Y2400 | Recht uiteinde | 253 mm | 24 CH | 4 | Nee | 50 |
| Y240B | Bol uiteinde | 260 mm | 24 CH | 4 | Nee | 50 |

Harde yankauer met AAN/UIT schakelaar handvat

Met de schakelaar kan de gebruiker handmatig het vacuüm openen of sluiten om de afzuigkracht te controleren en het geluidsniveau te verlagen. Het anatomisch ontworpen handvat maakt het gebruik comfortabeler. De yankauer heeft een taps toelopend proximale uiteinde voor stevige universele bevestiging aan een slang.

| Code | Omschrijving | Lengte | Diameter | Gaten | AAN/UIT vacuümcontrole | Verpakkingseenheid |
|--------|----------------|--------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| Y240FS | Recht uiteinde | 297 mm | 24 CH | 4 | Ja | 50 |
| Y240FB | Bol uiteinde | 297 mm | 24 CH | 4 | Ja | 50 |

Poole afzuigcanule

Deze canule bestaat uit een tweedelige vaste constructie:

- De binnencanule heeft 4 gaten aan de zijkanten en een open distaal uiteinde om te zorgen voor een goede stroming.
- De flexibele buitenmantel heeft meerdere gaten aan de zijkant en een open distaal uiteinde, voor verspreide afzuiging zonder risico op wefselinvasie.


De Poole canule is een speciale afzuigcanule ontworpen om samengestroomd bloed, vocht en afval af te zuigen tijdens diepe abdominale ingrepen, inclusief keizersnedes.

| Code | Omschrijving | Lengte | Diameter | Gaten | Vacuümcontrole | Verpakkingseenheid |
|-------|-------------------------|--------|----------|--------|----------------|--------------------|
| Y20PS | Flexibel recht uiteinde | 297 mm | 20 CH | 20 + 4 | Nee | 50 |

Yankauer sets

Deze steriele yankauer afzuighandgreep zit al gemonteerd aan een 1.8- of 3- meter afzuigslang met geribbelde female verbindingsstukken.


| Code | Omschrijving | Yankauer | | | | Zuigslang | | Verpakkingseenheid |
|---------------|--|----------|--------|---------------------|----------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | Diameter | Lengte | Gaatjes tip zijkant | Vacuümcontrole | Binnen diameter | Lengte | |
| ORNEX66AY1200 | Yankauer set met fijne tip | 12 CH | 270 mm | 2 | No | 6 mm | 1,8 m | 30 |
| ORNEX610Y1800 | Yankauer set met normale tip | 18 CH | 250 mm | 6 | No | 6 mm | 3 m | 30 |
| ORNEX610Y2200 | Yankauer set met grote tip | 22 CH | 270 mm | 6 | No | 6 mm | 3 m | 30 |
| ORNEX610Y80 | Yankauer set met fijn taps toelopende tip en ergonomisch handvat | 12 CH | 280 mm | 0 | No | 6 mm | 3 m | 30 |

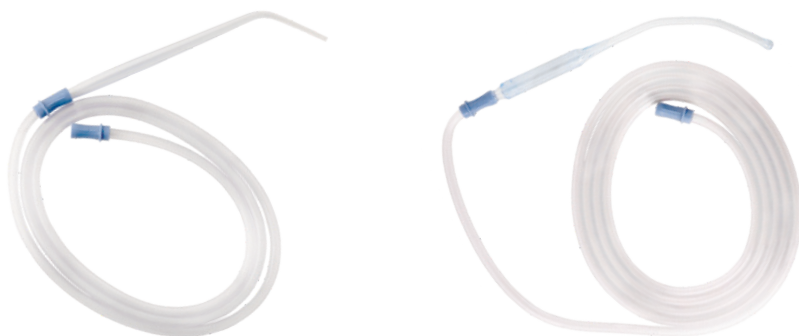

Orthopedische afzuigset

De orthopedische afzuigset met filter helpt om een duidelijk zichtbaar operatie gebied te behouden. Het speciale filter dat in de handgreep zit houdt automatisch vaste deeltjes tegen en kan binnen enkele seconden vervangen worden als deze vol zit. Dankzij de verhoogde filtercapaciteit is de afzuigset ideaal voor alle ingrepen waarbij grote hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen.

| Code | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|--------|--|--------------------|
| YORTHO | Orthopedische afzuigset met 1 geribbeld handvat, 1 gebogen uiteinde (7 x 230 mm), handvat met 2 filters en 3 mogelijke uiteindes | 10 |

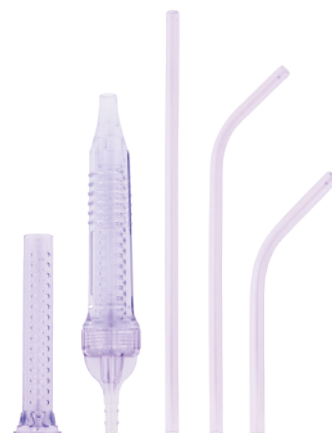

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België

Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39

nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  


Alle Yankauers en yankauer sets zijn steriele medische hulpmiddelen van klasse IIa die bedoeld zijn voor gebruik door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten die in deze brochure kunnen voorkomen te corrigeren.

© 2020 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML468_NL 10/2020.



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Germany

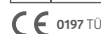

0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH