




Medline International Germany GmbH
Medline Strasse 1-3
47533 Kleve, Germany
Tel : +49 (0)2821-7510-0
Fax: +49 (0)2821-7510-7802
www.medline.com/de

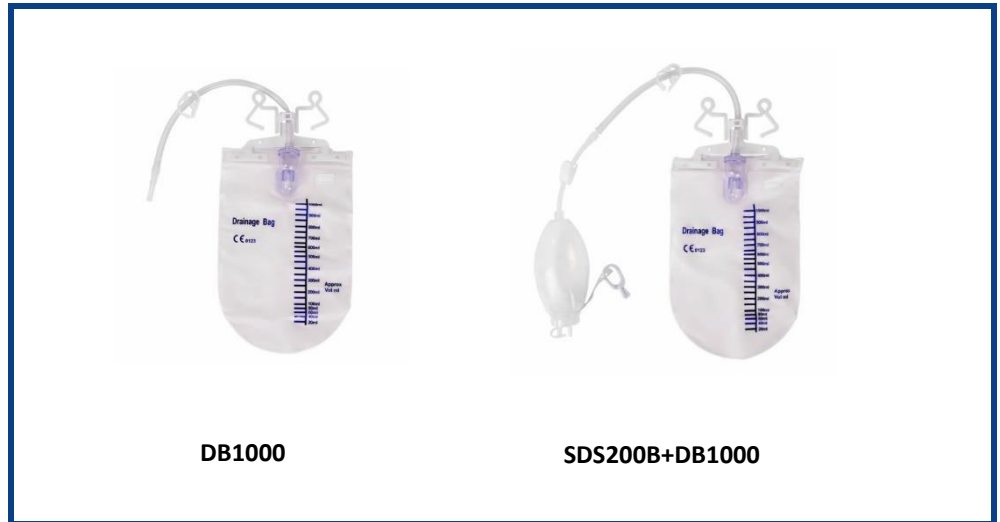

Technisches Datenblatt

Drainagebeutel

Artikelnummer(n)

DB1000: 1000 ml Drainagebeutel

SDS200B+DB1000: 1000 ml Drainage-Exsudatbeutel + 200 cc/ml Reservoir

Beschreibung

Der Drainage-Exsudatbeutel sammelt und erfasst Flüssigkeiten nach chirurgischen Eingriffen, um den Wundheilungsprozess zu verbessern und Infektionen zu vermeiden.

Drainagebeutel:

Kapazität: 1000 ml

Ungefähre Volumenskala

Luer-Lock-Anschluss

Schlauchklemme

Universalklemme zur Befestigung des Drainagebeutels am Bett.

Reservoir (nur für SDS200B+DB1000)

Einmalgebrauch, transparentes Silikon-Reservoir mit einem Patientenanschluss

Kapazität : 200 ml

Rücklaufventil

Durchschnittliche Depression 200 mbar/20 Kpa Maximale Depression je nach Nutzung.

Schlauchklemme

Luer-Lock-Anschluss

Basismaterialien

Drainagebeutel: PVC

Reservoir Silikon

DEHP frei- Latex frei

Packfaktor

DB1000: 15 Stück/Box

SDS200B+DB1000: 10 Stück/Box

Verpackung

Peel Pouch, doppelt und steril

PE- Beutel

Hersteller

Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd

EN ISO 13485

Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß 93/42/EWG für Medizinprodukte

- Drainagebeutel: MPG Klasse I steril
- **Reservoir** MPG Klasse IIa steril

Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.



0123



© 2020 Medline Industries Inc. oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.

TDS_ExudateBag_DE01