




GESTIÓN DE FLUIDOS



MED-SOFT

Sistema de aspiración cerrado con bolsas flexibles de un solo uso

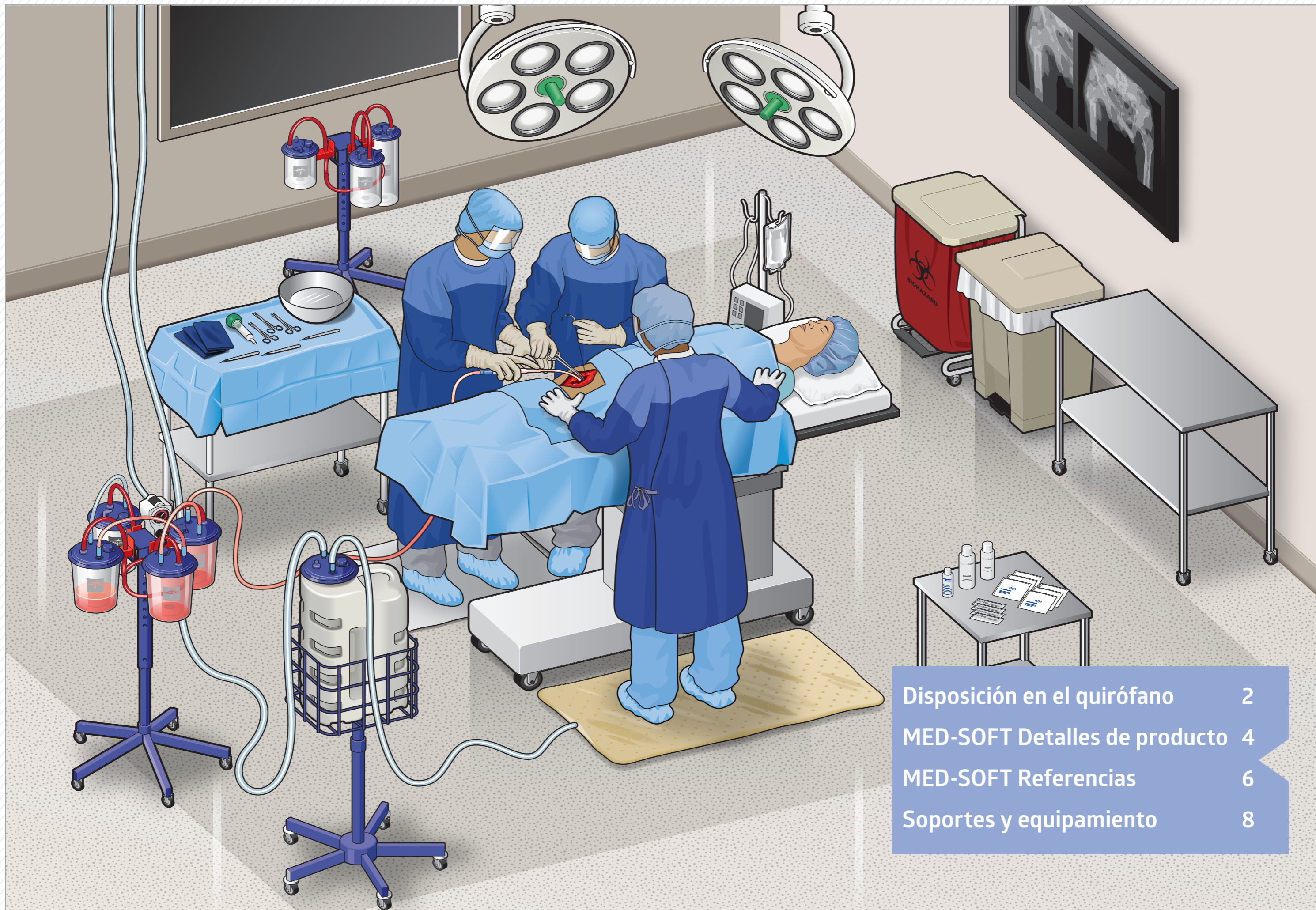


Disposición en el quirófano	2
MED-SOFT Detalles de producto	4
MED-SOFT Referencias	6
Soportes y equipamiento	8

MED-SOFT Canisters y bolsas de aspiración


Las bolsas de aspiración MED-SOFT son sistemas de succión cerrados para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración. Las marcas de graduación en los canisters reutilizables hacen fácil la anotación del volumen de líquido recogido. Además, la placa de sujeción ayuda a fijar el sistema de aspiración a la pared o a un carro móvil.

La tapa de las bolsas tiene cuatro puertos de diámetro diferente para conexiones a prueba de errores.

La solución MED-SOFT también está disponible en kits, incluyendo tubos de aspiración y un dispositivo de seguridad para el control manual del vacío. También pueden contener el agente solidificante MED-GEL.

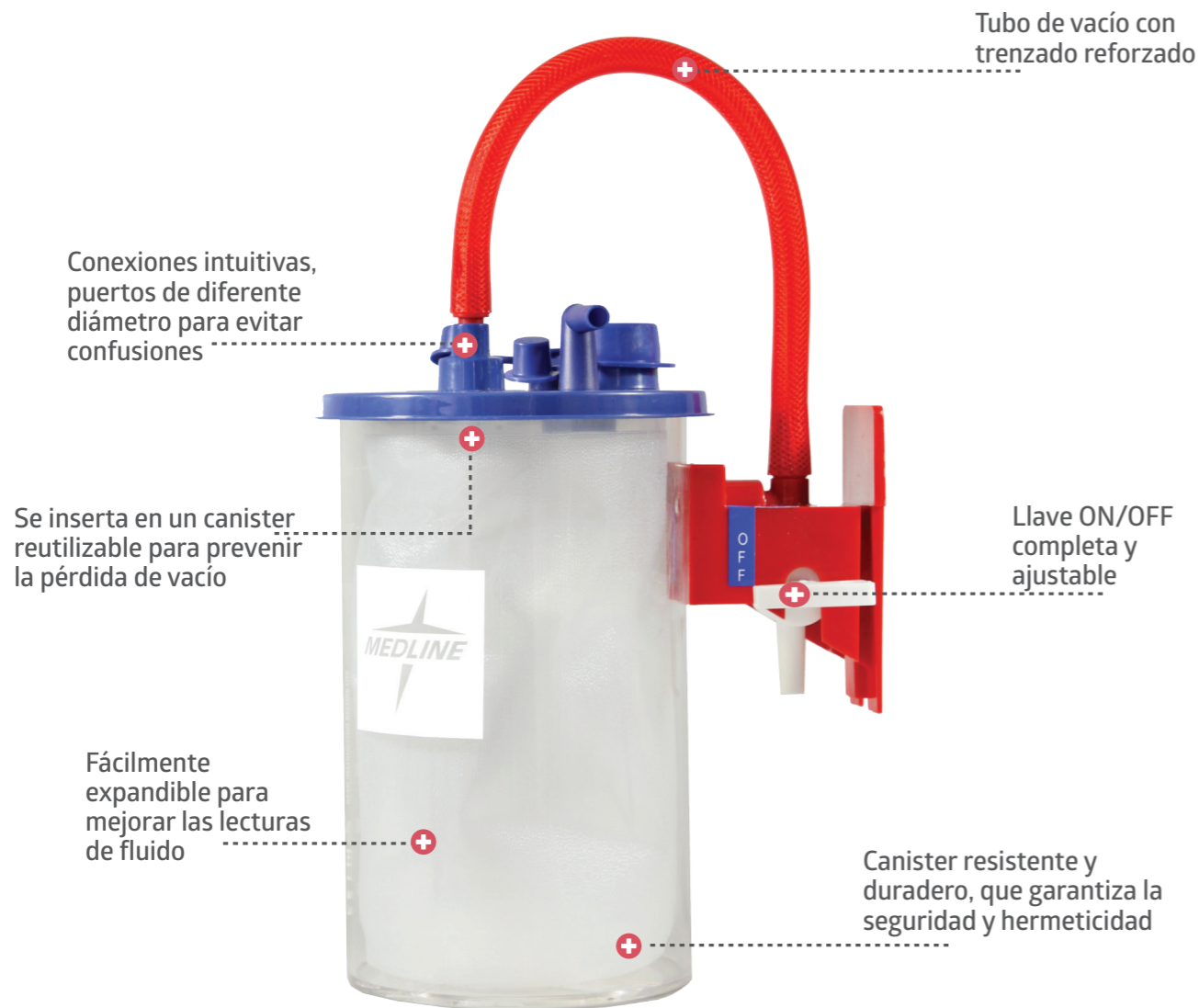

Las bolsas de aspiración MED-SOFT están diseñadas para ser seguras y fáciles de usar durante el proceso de recogida, almacenamiento y eliminación de líquidos.

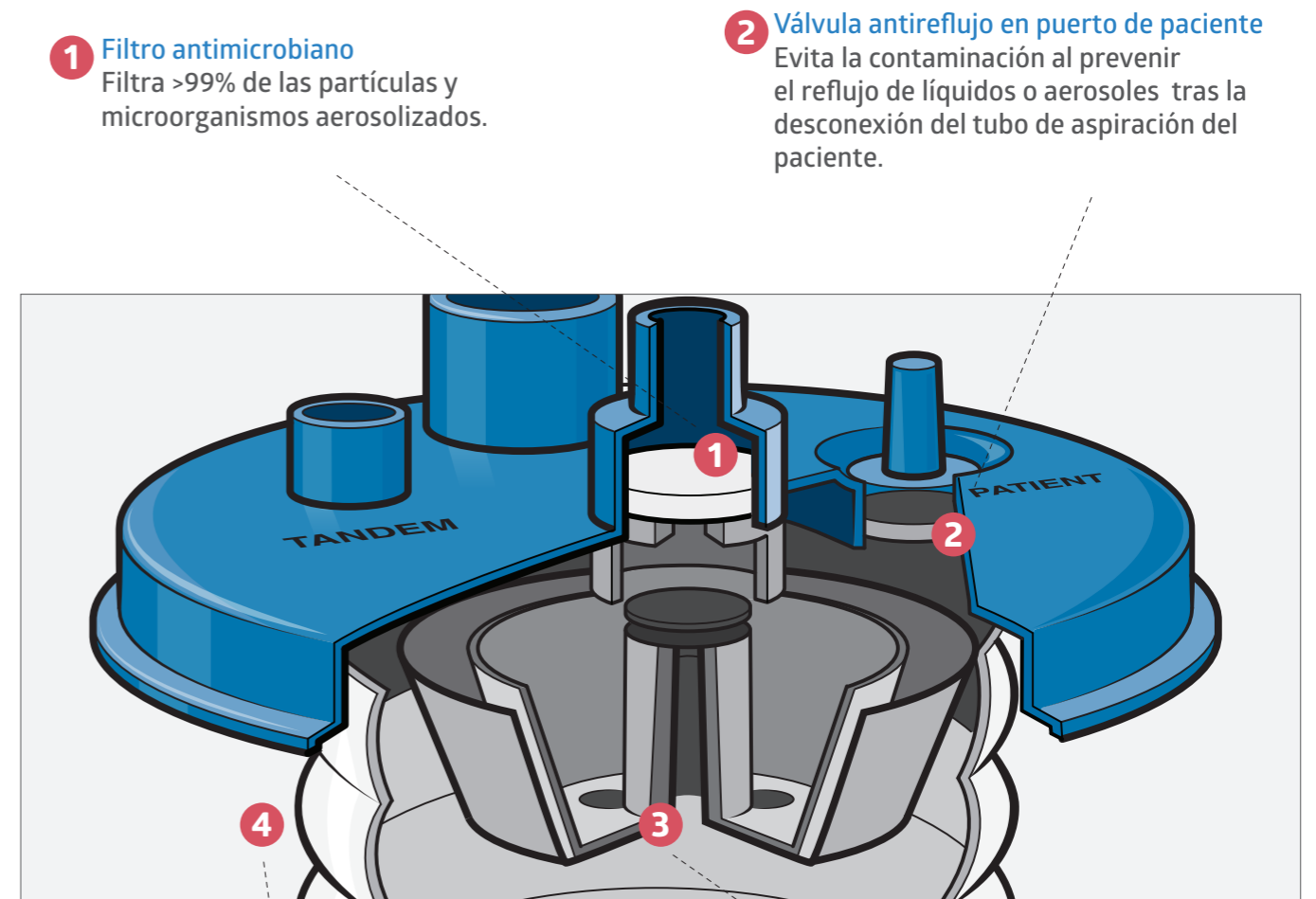

4 Estructura de acordeón expandible
Disponible en las bolsas de 3L. Protege a los usuarios del contacto con los líquidos recogidos y reduce una posible contaminación por fugas y derrames.

3 Válvula mecánica de seguridad en el puerto de vacío
Evita la contaminación de la línea de vacío.

Sistema cerrado: Aspiración segura y fiable :

- » Bolsas cerradas y de fácil ajuste en el canister
- » Bolsas selladas por ultrasonidos
- » 100% selladas y estancas



MED-SOFT Canisters y Bolsas

MED-SOFT Canisters

Canisters reutilizables disponibles en varias capacidades para satisfacer diferentes necesidades clínicas. Recipiente de policarbonato resistente con graduaciones, con brazo corto, uniones reforzadas y válvula ON/OFF.

Referencia	Descripción	Envasado
DYNDCL01000	Canister para bolsa MED-SOFT, 1L	8/caja
DYNDCL01500	Canister para bolsa MED-SOFT, 1.5L	8/caja
DYNDCL03000	Canister para bolsa MED-SOFT, 3L	8/caja



MED-SOFT Bolsas

Bolsas desechables para un solo paciente para insertar en canisters de la misma capacidad.

Referencia	Descripción	Envasado
DYNDSC1000	MED-SOFT bolsa, 1L	50/caja
DYNDSC1500	MED-SOFT bolsa, 1.5L	50/caja
DYNDSC13000	MED-SOFT bolsa, 3L	50/caja




MED-SOFT Tubo Tandem

Se utiliza para la conexión opcional de varios aspiradores y transferencia automática de fluidos entre bolsas.


- Conexión intuitiva a prueba de errores.
- Mantiene el sistema de aspiración seguro y cerrado durante el uso y eliminación de la bolsa usada.
- La válvula unidireccional interna previene fugas accidentales y el contacto con residuos infecciosos.



Referencia	Descripción	Envasado
DYNDTND	Tubo tandem para bolsa MED-SOFT	20/caja

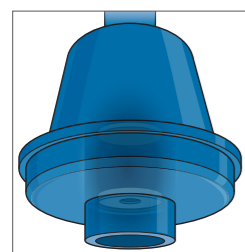

La válvula antigoteo unidireccional interna evita pérdidas cuando se desconecta, cuenta con tapón.

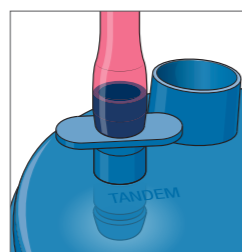

Una vez conectado al puerto tandem no puede desconectarse para mayor seguridad y estanqueidad.

MED-SOFT Bolsas con Tubo de Aspiración

ORNEX es un tubo flexible de baja memoria con superficie acanalada externa que aumenta su resistencia.

Referencia	Descripción	Envasado
OR916K	Bolsa MED SOFT de 1L + tubo 6mm x 1.80m	50/caja
OR926K	Bolsa MED SOFT de 1.5L + tubo 6mm x 1.80m	50/caja
OR936K	Bolsa MED SOFT de 3L + tubo 6mm x 1.80m	50/caja
OR929K	Bolsa MED SOFT de 1.5L + tubo 6mm x 3m	50/caja
OR939K	Bolsa MED SOFT de 3L + tubo 6mm x 3m	50/caja




MED-SOFT Bolsas con Tubo de Aspiración y MED-STOP

Estos kits contienen una bolsa MED-SOFT con un tubo ORNEX pre-conectado no estéril (descrito anteriormente) y un MED-STOP adulto o pediátrico. La válvula manual de control de presión permite un mejor control de la succión por el usuario durante la aspiración traqueal.

MED-STOP también está disponible en su versión no estéril o en kits con tubos preconectados.

Referencia	Descripción	Envasado
OR53916	Bolsa de aspiración MED SOFT de 1L + tubo de 6mmx 1.80m con MED STOP de adulto	50/caja
OR53926	Bolsa de aspiración MED SOFT de 1.5L + tubo de 6mmx 1.80m con MED STOP de adulto	50/caja
OR53929	Bolsa de aspiración MED SOFT de 1.5L + tubo de 6mmx 3m con MED STOP de adulto	50/caja
OR54916	Bolsa de aspiración MED SOFT de 1L + tubo de 6mmx 1.80m con MED STOP pediátrico	50/caja
OR54926	Bolsa de aspiración MED SOFT de 1.5L + tubo de 6mmx 1.80m con MED STOP pediátrico	50/caja

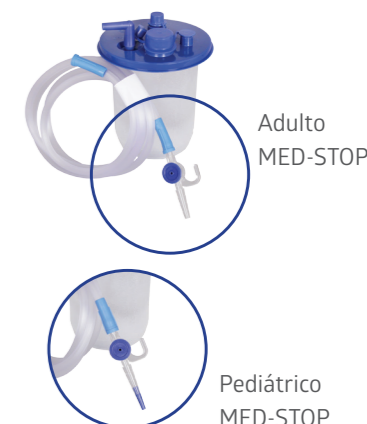

MED-SOFT Bolsa de Aspiración con Agente Solidificante MED-GEL

Las bolsas de aspiración pre-gelificadas MED-SOFT contienen una dosis de MED-GEL que solidifica los fluidos aspirados para una eliminación más segura.

MED-GEL también está disponible por separado, envasado en dosis o en cubos.

Referencia	Descripción	Envasado
OR1910PG	Bolsa de aspiración MES SOFT 1L + MED-GEL	45/caja
OR1920PG	Bolsa de aspiración MES SOFT 1.5L + MED-GEL	45/caja
OR1930PG	Bolsa de aspiración MES SOFT 3L + MED-GEL	45/caja



SOPORTES y Accesorios

Accesorios de Toma de Muestras


Los accesorios de toma de muestras desechables se utilizan para recoger y retener muestras para análisis. Se fijan en el puerto de accesorios de las bolsas de aspiración MEDLINE y conectan a un tubo de aspiración de 7 mm ó 10 mm.

Referencia	Descripción	Invasado
OR123	Accesorio corto (9cm) con conector macho, diámetro 7mm	100/caja
OR125	Accesorio estándar (23cm) con conector macho, diámetro 7mm	100/caja
OR124	Accesorio largo (23cm) con conector macho, diámetro 10mm	100/caja
CA6000	Cápsula de toma de muestras, diámetro 10cm	10/caja



Soportes fijos

Referencia	Descripción	Invasado
DYNDSCWL	Placa de plástico para pared	20/caja
LCLC1426CE	Pinza metálica para riel (ajustable)	1/caja

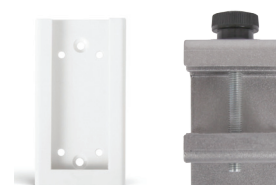

Carros

Con diferentes alturas y configuraciones

Referencia	Descripción	Invasado
DYNDSCC	Carro metálico Ajustable en altura, de 61 a 106cm Hasta 4 canisters	1/caja
ORBASE	Carro bajo altura fija de 50 cm Para 2 canisters.	1/caja



Manifold

Nuestros manifold o tubos distribuidores de vacío están disponibles para suministrar vacío a cualquier configuración posible.

Referencia	Descripción	Invasado
DYND2MNF	Manifold para 2 canisters	10/caja
DYND3MNF	Manifold para 3 canisters	10/caja
DYND4MNF	Manifold para 4 canisters	10/caja



ALWAYS
ON

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com