



FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT



MED-RIGID

Starre Einweg-Absaugbehälter

MED-RIGID Absaugbehälter

Stabile Konstruktion, genaue Flüssigkeitskontrolle, einfache Anwendung

MED-RIGID ist ein System zur Absaugung von Flüssigkeiten, Sekreten und Geweberesten, bestehend aus einem starren Einweg-Absaugbehälter und einer wiederverwendbaren Halterung. Der Absaugbehälter besteht aus einem fest schließenden Deckel und einem transparenten Behälter mit Graduierung. Durch den Einsatz ohne Innenbehälter ist ein genaues Ablesen der Füllmenge sowie bessere Begutachtung der abgesaugten Substanzen möglich.

Spezielle Montagehalterungen und Ständer sind verfügbar für maximale Flexibilität und Mobilität.



MED-RIGID Halterungen

Die wiederverwendbaren MED-RIGID Halterungen sind aus strapazierfähigem Polycarbonat hergestellt. Sie passen in alle Einschub-Montagehalterungen für Medline-Absaugbehälter, zum Beispiel an Wandhalterungen oder Rollständer. Jede Halterung verfügt über einen festmontierten Vakuumschlauch zur Verbindung mit dem Absaugbehälter sowie ein An-/Aus-Ventil zum individuellen Öffnen und Schließen der Vakuumzufuhr.



Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR159	MED-RIGID Halterung für 1,2L Behälter	20/Ktn
OR139	MED-RIGID Halterung für 2L oder 3L Behälter	20/Ktn

MED-RIGID Absaugbehälter

Absaugbehälter sind für den einmaligen Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Verfügbar in 1,2L, 2L, 3L und sogar als 12L-Variante, bestehend jeweils aus einem starren Einweg-Behälter und -Deckel.



Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR212	MED-RIGID Behälter, 1,2L	40/Ktn
OR220	MED-RIGID Behälter, 2L	40/Ktn
OR230	MED-RIGID Behälter, 3L	40/Ktn
OR12L	MED-RIGID Behälter, 12L Für diesen speziellen Behälter verwenden Sie bitte den passenden Rollständer mit der Artikelnummer OR12LTR	4/Ktn

MED-RIGID Absaugbehälter mit Patientenschlauch

Absaugbehälter sind auch verfügbar in Kits mit bereits angeschlossenem ORNEX-Schlauch. ORNEX ist ein flexibler Schlauch, der sich sehr leicht entfaltet. Um ein Abknicken zu verhindern und die Griffigkeit zu erhöhen, verfügt er über eine strukturierte Oberfläche.



Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR312	MED-RIGID Behälter 1,2L + 5mm x 1,8m Schlauch	30/Ktn
OR320	MED-RIGID Behälter 2L + 5mm x 1,8m Schlauch	30/Ktn
OR319	MED-RIGID Behälter 3L + 6mm x 3,0m Schlauch	30/Ktn

MED-RIGID Tandemschlauch

Ermöglicht die Verbindung von mehreren Behältern in Reihenschaltung - ist ein Behälter gefüllt, wird die Saugung automatisch im nächsten Behälter fortgesetzt.



Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR542	Tandemschlauch für MED-RIGID Behälter	50/Ktn

NÜTZLICHES ZUBEHÖR

Einweg-Gewebeauffangbehälter

Die Einweg-Gewebefallen werden genutzt um Gewebeproben zur Analyse zu sammeln und zu transportieren. Sie können an den Zubehö-Anschluss des Innenbehälters angeschlossen und in Kombination mit 7mm- oder 10mm-Absaugschläuchen verwendet werden.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
OR123	Kurze Gewebeauffangsocke (9cm), mit männlichem Anschluss, Durchmesser 7mm	100/Ktn
OR125	Mittellange Gewebeauffangsocke (23cm), mit männlichem Anschluss, Durchmesser 7mm	100/Ktn
OR124	Lange Gewebeauffangsocke (23cm), mit männlichem Anschluss, Durchmesser 10mm	100/Ktn
CA6000	Gewebeauffangschale, Durchmesser 10cm	10/Ktn



Montagehalterungen für Außenbehälter

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYNDSCW	Wanderhalterung aus Plastik	20/Ktn
LCLC1426CE	Metallklemme zur Befestigung an eine Normschiene	1/Ktn



Rollständer

Für erweiterte individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.


Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYNDSCC	Rollständer aus Metall. Höhenverstellbar zwischen ~ 61 und 106cm. Für bis zu 4 Behälter	1/Ktn
ORBASE	Niedriger Rollständer, Höhe 50cm. Für bis zu 2 Behälter	1/Ktn



Vakuum-Verteilerschläuche

Unsere wiederverwendbaren Verteilerschläuche (Manifolds) ermöglichen die unkomplizierte Verbindung mehrerer Absaugbehälter zur Vakuumquelle.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DYND2MNF	Manifold Verteilerschlauch für 2 Behälter	10/Ktn
DYND3MNF	Manifold Verteilerschlauch für 3 Behälter	10/Ktn
DYND4MNF	Manifold Verteilerschlauch für 4 Behälter	10/Ktn

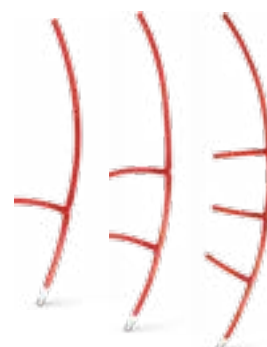

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2017 Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen von Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML546-DE01/SV/OV 09/2017.